



orders.innomed-europe.com

INNOMED

INSTRUMENTS ORTHOPÉDIQUES



2026

Avec de nombreux **Nouveau!** instruments partout

Écarteur de tissus mous de
Badger avec bras articulés

Page 18

Écarteur pour
technique de Latarjet

Page 16


Guide de trajectoire
parallèle mini invasive de
la bursite de Lee

Couverture arrière

Clamp de réduction des
fractures de Jones de Desai

Page 33

Membres supérieurs et petits os

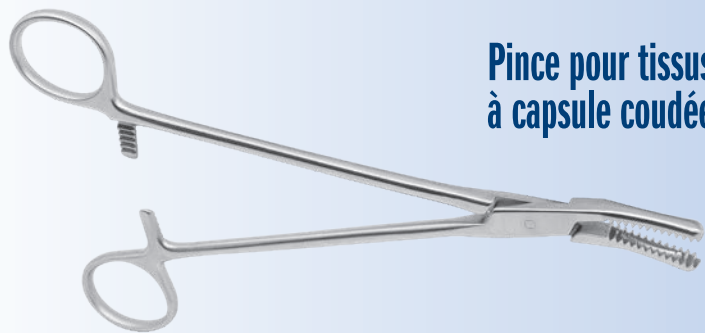


**Pince pour tissus mous
à capsule coudée**

Nouveau!



RÉF. DU PRODUIT :
1767
Longueur totale : 20,8 cm
Angle du mors : 17°

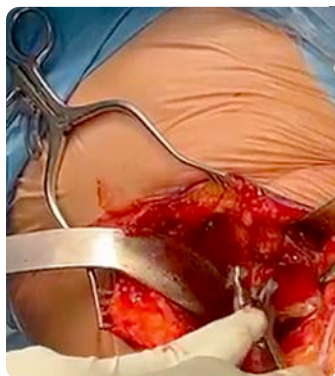


Rongeur à tête marteau de Beicker

Conçu par Clint Beicker, Docteur en médecine

*Conçu pour faciliter le retrait
des ostéophytes tout autour
du cotyle et de la glène*

RÉF. DU PRODUIT :
1775-05
Longueur totale : 20,3 cm
Largeur du mors : 15 mm x 7 mm

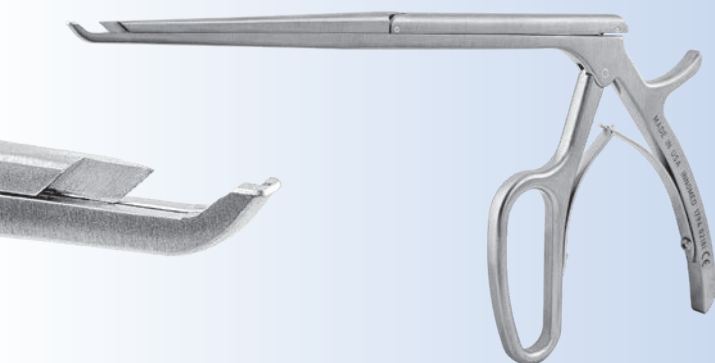


Cutter du nerf supra-scapulaire

Conçu par Michael Craig, OPA-C

*Conçu pour couper le ligament
transverse tout en protégeant
le nerf supra-scapulaire*

RÉF. DU PRODUIT :
1794
Longueur totale : 28,6 cm

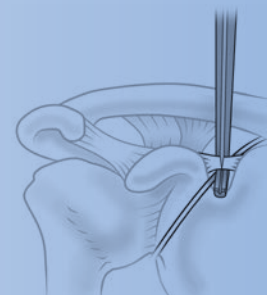



Mini écarteur de Hohmann modifié avec modification pour la coracoïde supérieure

*Conçu pour rétracter/exposer les petits
os et la coracoïde supérieure*



RÉF. DU PRODUIT :
1666-02
Longueur totale : 15,9 cm
Largeur de la lame : 8 mm
Partie tombante de la lame : 17 mm

Modification
coracoïde supérieure

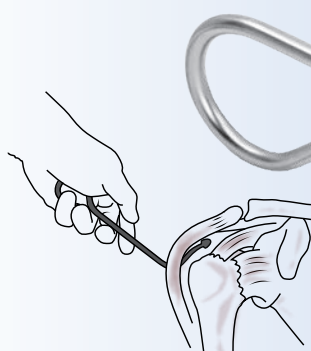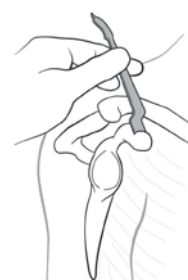


RÉF. DU PRODUIT :
5081
Longueur totale : 19,1 cm
Profondeur à partir de la courbure : 5,7 cm
Diamètre de la tige : 4,7 mm
Diamètre à son extrémité : 6 mm

Écarteur d'élévation du deltoïde sous arthroscopie de Bacast

Conçu par David Bacastow, Docteur en médecine

*Conçu pour améliorer la visualisation
de l'espace sous-acromial lors d'une
procédure de réparation de la coiffe
des rotateurs ou de mise en place
d'un écarteur à ballonnet*

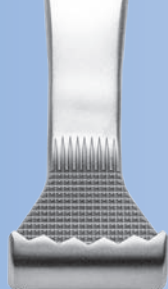

Écarteurs de tête humérale modifiés de Dingo


Conçus pour soulever et déplacer l'humérus proximal vers l'arrière

RÉF. DU PRODUIT :


2438

Longueur totale : 25,7 cm
Largeur de la lame : 2,54 cm
Enroulement de la lame au niveau de l'extrémité : 1,4 cm

Nouveau!

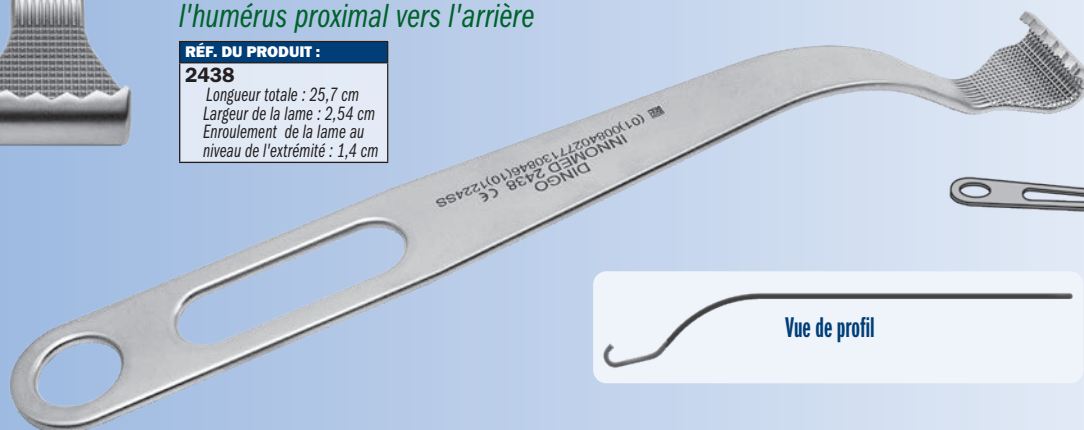

Vue de profil

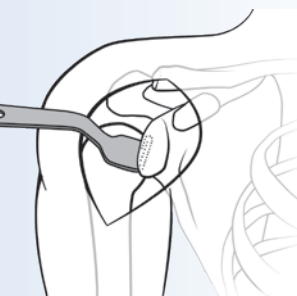

Système d'écarteurs pour les interventions de l'épaule

Développé en collaboration avec Mayo Clinic.



Écarteur glénoïdien fin modifié - Version étroite
Réf. 1252-N



Écarteur glénoïdien fin modifié - Version large
Réf. 1252-W




Écarteur Hohmann à angle droit
Réf. 1253



Écarteur Fukuda modifié
Réf. 1254



Écarteur Brown
Deltoid/Richardson - Grand format
Réf. 1255-L

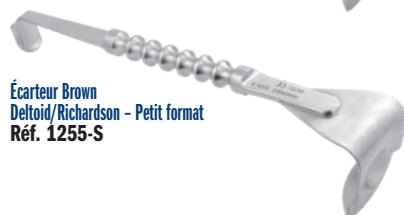

Écarteur Brown
Deltoid/Richardson - Petit format
Réf. 1255-S



Écarteur Darrach modifié,
version droite et étroite
Réf. 1256



Écarteur Darrach modifié,
version incurvée et large
Réf. 1257



Écarteur Darrach modifié,
version incurvée et large
Réf. 1258



Écarteur Darrach modifié,
version incurvée et large
Réf. 1259



Écarteur des tissus mous de l'épaule
Réf. 1260



Écarteur d'accès glénoïdien
Réf. 1261

RÉF. DU PRODUIT :

1251-00 [Système complet]

Composants inclus dans le kit/disponibles à l'unité :

1252-N [Écarteur glénoïdien fin modifié - Version étroite]

Deux écarteurs sont fournis dans le kit ;
un écarteur est fourni avec cette référence
Longueur totale : 30,2 cm
Largeur de la lame : 15 mm

1252-W [Écarteur glénoïdien fin modifié - Version large]

Deux écarteurs sont fournis dans le kit ;
un écarteur est fourni avec cette référence
Longueur totale : 30,2 cm
Largeur de la lame : 23 mm

1253 [Écarteur Hohmann à angle droit]

Longueur totale : 20,6 cm
Profondeur à partir de la courbure : 10,8 cm
Largeur de la lame : 16 mm

1254 [Écarteur Fukuda modifié]

Longueur totale : 21,9 cm
Profondeur : 7 cm
Largeur de la lame : 39 mm

1255-L [Écarteur Brown Deltoid/Richardson - Grand format]

Longueur totale : 10,5" (26,7 cm)
Profondeur : 2,5" (6,4 cm)
Largeur de la lame : 60 mm

1255-S [Écarteur Brown Deltoid/Richardson - Petit format]

Longueur totale : 10,5" (26,7 cm)
Profondeur : 2,5" (6,4 cm)
Largeur de la lame : 44 mm

1256 [Écarteur Darrach modifié, version droite et étroite]

Longueur totale : 26 cm
Largeur de la lame : 12,7 mm

1257 [Écarteur Darrach modifié, version incurvée et large]

Longueur totale : 26 cm
Largeur de la lame : 19 mm

1258 [Écarteur Darrach modifié, version incurvée et large]

Longueur totale : 27,3 cm
Largeur de la lame : 12,7 mm

1259 [Écarteur Darrach modifié, version incurvée et large]

Longueur totale : 27,3 cm
Largeur de la lame : 19 mm

1260 [Écarteur des tissus mous de l'épaule]

Longueur totale : 25,4 cm
Profondeur à partir de la courbure : 7,6 cm
Largeur de la lame : 19 mm

1261 [Écarteur d'accès glénoïdien]

Longueur totale : 34,3 cm
Diamètre interne de l'orifice d'accès : 36 mm X 30 mm
Profondeur des fourches : 8,5 mm

Écarteurs de tête humérale modifiés

Conçus pour soulever et déplacer l'humérus proximal vers l'arrière

RÉF. DU PRODUIT :

2436 [Version profonde]


Longueur totale : 25,4 cm

Largeur de la lame : 26 mm

2437 [Version peu profonde]

Longueur totale : 30 cm

Largeur de la lame : 26 mm

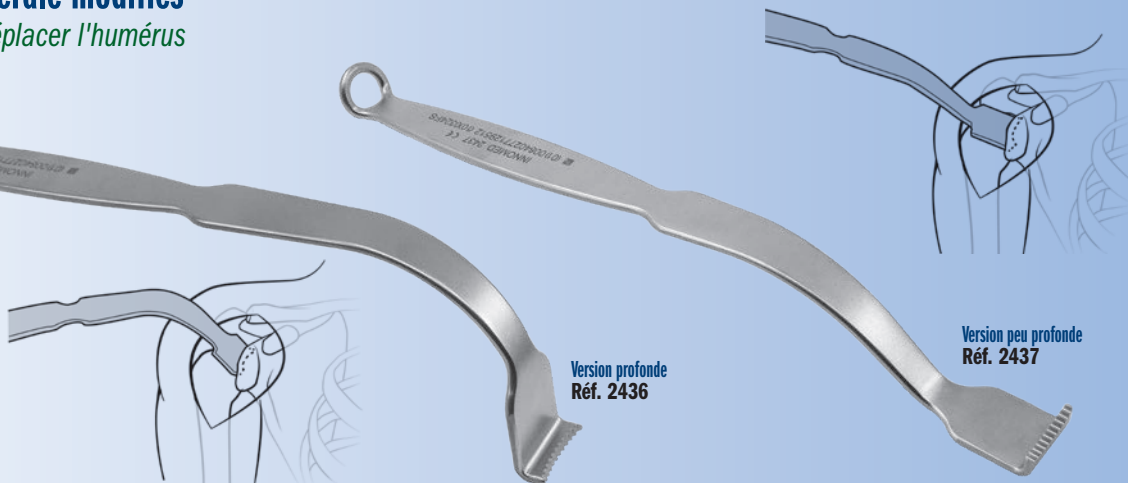

Version profonde
Réf. 2436

Version peu profonde
Réf. 2437



Jeu de lame et de cadre pour l'épaule de Bell-Hawkins

Conçu par Robert H. Bell, Docteur en médecine et
Richard Hawkins, Docteur en médecine

Système d'écarteur et de cadre pour une arthroplastie d'épaule totale

RÉF. DU PRODUIT :

4696-00 [Bell-Hawkins – Système complet]

Composants inclus dans le kit/disponibles à l'unité :

4696-01 [Petit écarteur réglable]

Longueur totale : 18,7 cm

Longueur de la poignée : 15,2 cm

Largeur de la lame : 32 mm

Profondeur de la lame : 20 mm

4696-02 [Écarteur réglable moyen format]

Longueur totale : 18,7 cm

Longueur de la poignée : 15,2 cm

Largeur de la lame : 43 mm

Profondeur de la lame : 32 mm

4696-03 [Écarteur réglable profond]

Longueur totale : 18,7 cm

Longueur de la poignée : 15,2 cm

Largeur de la lame : 41 mm

Profondeur de la lame : 51 mm

4696-04 [Petit écarteur fixe]

Longueur totale : 7,6 cm

Longueur de la poignée : 3,8 cm

Largeur de la lame : 32 mm

Profondeur de la lame : 20 mm

4696-05 [Écarteur fixe moyen format]

Longueur totale : 7,6 cm

Longueur de la poignée : 3,8 cm

Largeur de la lame : 43 mm

Profondeur de la lame : 32 mm

4696-06 [Écarteur fixe profond]

Longueur totale : 7,6 cm

Longueur de la poignée : 3,8 cm

Largeur de la lame : 32 mm


Profondeur de la lame : 60 mm

4696-07 [Bloc de verrouillage réglable]

Dimensions : 35 mm x 25 mm x 20 mm

4696-Frame [Cadre]

Dimensions : 25,4 cm x 22,9 cm

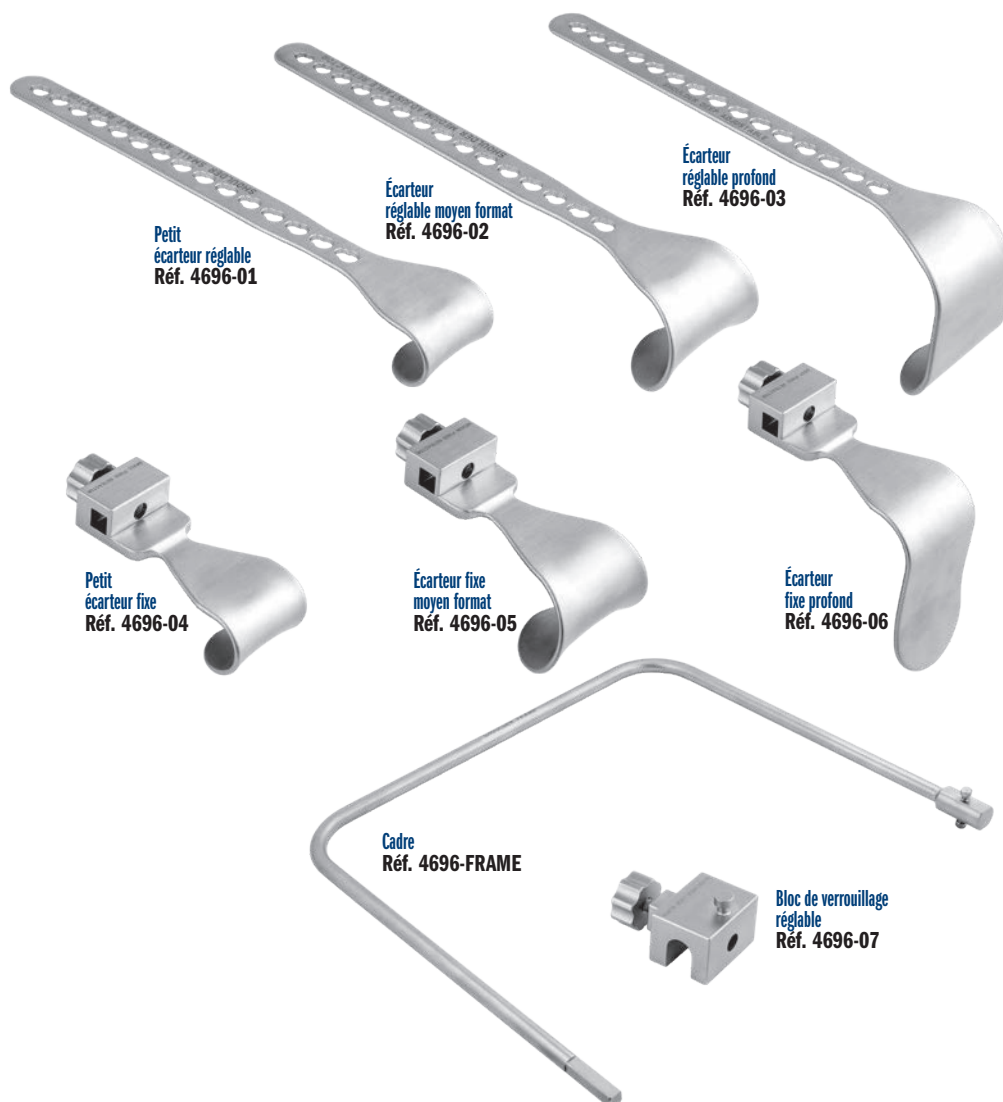

Petit
écarteur réglable
Réf. 4696-01

Écarteur
réglable moyen format
Réf. 4696-02

Écarteur
réglable profond
Réf. 4696-03

Petit
écarteur fixe
Réf. 4696-04

Écarteur fixe
moyen format
Réf. 4696-05

Écarteur
fixe profond
Réf. 4696-06

Cadre
Réf. 4696-FRAME


Bloc de verrouillage
réglable
Réf. 4696-07

Instruments pour l'épaule d'Hawkins

Conçus par Richard J. Hawkins, Docteur en médecine

RÉF. DU PRODUIT :	
5090 [Petit écarteur avec bras articulés]	Longueur totale : 15,9 cm Profondeur des bras : 5,7 cm Largeur de la fourche : 21 mm Longueur de la fourche : 16 mm
5091 [Grand écarteur avec bras articulés]	Longueur totale : 26,7 cm Profondeur des bras : 6 cm Largeur de la fourche : 23 mm Longueur de la fourche : 23 mm
5092 [Écarteur capsulaire antérieur]	Longueur totale : 28,6 cm Longueur de la poignée : 13,3 cm Profondeur de la lame : 8,3 cm Largeur de la lame : 19 mm
5093 [Petit écarteur pectoral]	Longueur totale : 26 cm Longueur de la poignée : 13,3 cm Profondeur de la lame : 6,4 cm Largeur de la lame : 25 mm
5094 [Écarteur pectoral extra petit]	Longueur totale : 27,9 cm Longueur de la poignée : 13,3 cm Profondeur de la lame : 3,8 cm Largeur de la lame : 25 mm
5095 [Élévateur de Cobb]	Longueur totale : 27,9 cm Longueur de la poignée : 14 cm Largeur de la lame : 19 mm
5096 [Écarteur de la tête humérale]	Longueur totale : 22,9 cm Profondeur de la lame : 7 cm Largeur de la lame : 37 mm
5097 [Écarteur glénoïdien antérieur]	Longueur totale : 27,9 cm Profondeur de la lame : 7 cm Largeur de la lame au coussin graisseux : 34 mm Largeur de la lame au col : 18 mm
5098 [Écarteur du deltoïde]	Longueur totale : 24,1 cm Profondeur de la lame : 9,5 cm Largeur de la lame au coussin graisseux : 45 mm Largeur de la lame au col : 32 mm
5099 [Écarteur Darrach modifié]	Longueur totale : 27,3 cm Largeur de la lame : 19 mm

Conçus pour améliorer l'exposition lors des arthroplasties de l'épaule

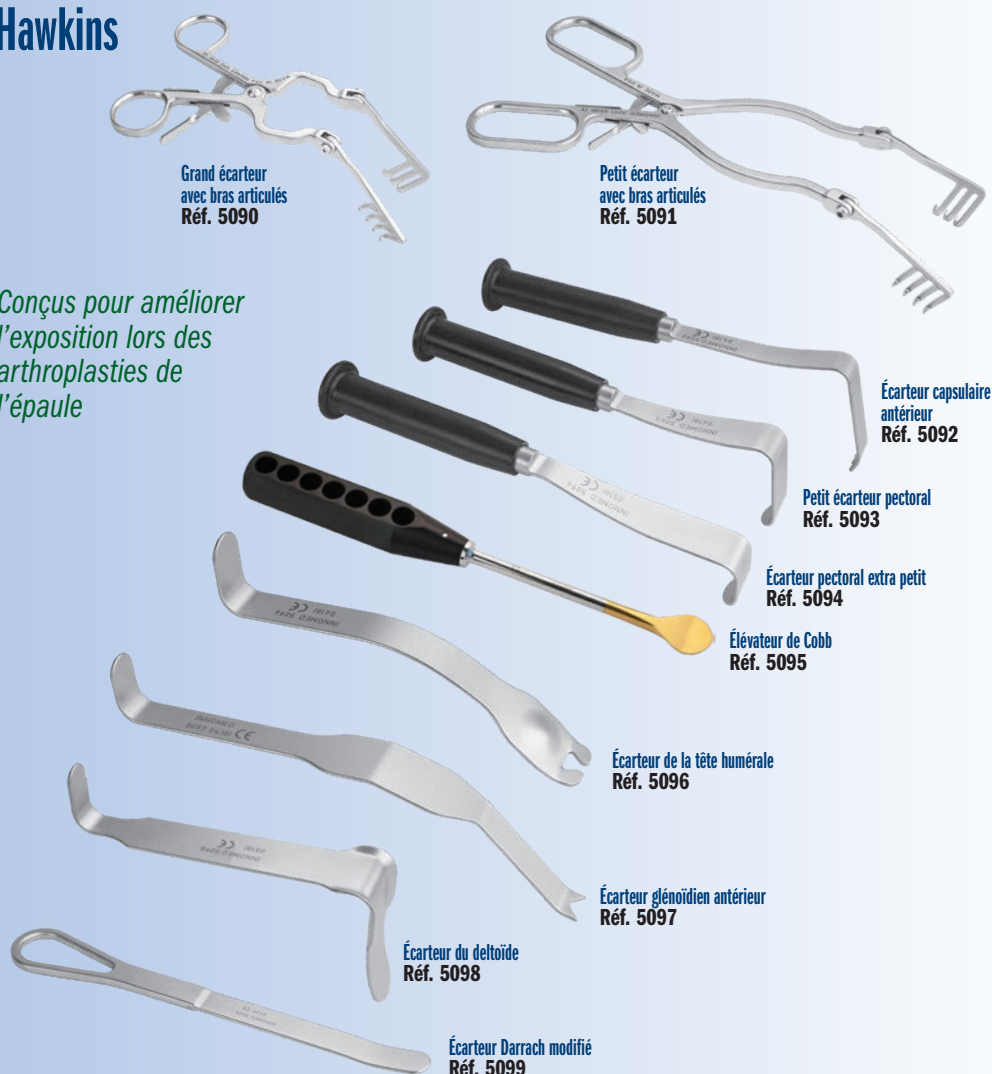

Grand écarteur avec bras articulés
Réf. 5090

Petit écarteur avec bras articulés
Réf. 5091

Écarteur capsulaire antérieur
Réf. 5092

Petit écarteur pectoral
Réf. 5093

Écarteur pectoral extra petit
Réf. 5094

Élévateur de Cobb
Réf. 5095

Écarteur de la tête humérale
Réf. 5096

Écarteur glénoïdien antérieur
Réf. 5097

Écarteur du deltoïde
Réf. 5098

Écarteur Darrach modifié
Réf. 5099

Écarteur glénoïdien coudé à fourches

Conçu par R. L. Stowell, Docteur en médecine

Conçu pour faciliter l'exposition de la glène et simplifier la mise en place de la glénosphère lors d'une arthroplastie inversée. Les versions larges et étroites permettent de s'adapter aux différentes tailles de glène

La courbure spécialement étudiée permet de laisser l'écarteur reposer le long du segment postérieur et d'exposer la voûte glénoïdienne dans le champ opératoire tout en rétractant la tête humérale vers l'arrière et sur le côté sans exercer de force excessive sur le col de la glène. L'extrémité fonctionnelle permet d'aléser et de retirer l'os périphérique sans forcer sur l'alésoir.



RÉF. DU PRODUIT :	
1902-N [Version étroite]	Longueur totale : 25,4 cm Largeur de la lame : 25 mm Largeur de la lame à son extrémité : 21 mm
1902-W [Version large]	Longueur totale : 25,4 cm Largeur de la lame : 25 mm Largeur de la lame à son extrémité : 28 mm

Version étroite
Réf. 1902-N


Version large
Réf. 1902-W



Écarteur glénoïdien coudé

Conçu par R. L. Stowell, Docteur en médecine

Le design arrondi permet une mise en place atraumatique autour de la glène quelle que soit la voie d'abord choisie (supérieure, antérieure et inférieure) lors d'une intervention à ciel ouvert de l'épaule afin de rétracter le sous-scapulaire et la capsule et faciliter le travail sur le bourrelet

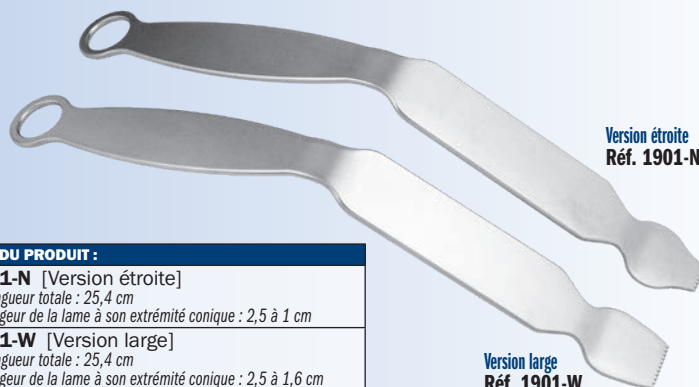

RÉF. DU PRODUIT :	
1901-N [Version étroite]	Longueur totale : 25,4 cm Largeur de la lame à son extrémité conique : 2,5 à 1 cm
1901-W [Version large]	Longueur totale : 25,4 cm Largeur de la lame à son extrémité conique : 2,5 à 1,6 cm

Version étroite
Réf. 1901-N

Version large
Réf. 1901-W

10 mm
Réf. 1950

12 mm
Réf. 1955

19 mm
Réf. 1960

25 mm
Réf. 1965

Version étroite
Réf. 1910

Version large
Réf. 1920

10 mm
Réf. 1980

12 mm
Réf. 1985

19 mm
Réf. 1990

Réf. 1970

Réf. 1975

Version étroite
Réf. 1930

Version large
Réf. 1940

Élévateurs de type Darrach modifiés

Utilisés pour rétracter et exposer les tissus mous. Ils peuvent également être utilisés pour exercer un effet de levier sur la tête humérale de manière inférieure ou supérieure et médialement afin de l'exposer à partir de la glène pendant la luxation de la tête humérale après le retrait du sous-scapulaire. Ils permettent en outre de rétracter la diaphyse humérale vers l'arrière pour faciliter l'exposition de la glène.

Écarteurs glénoïdiens fins

Permettent de rétracter les segments antérieur et postérieur de la cavité glénoïde antéro-postérieure.

Élévateurs glénoïdiens postérieurs

Permettent d'exposer le segment postérieur du segment de la glène. L'extrémité incurvée permet d'insérer l'élévateur dans le bord postérieur de la glène. La courbure de l'élévateur épouse les contours de la diaphyse humérale pour effectuer une rétraction postérieure.

Élévateurs de type Darrach à pic

L'élévateur à pic se place légèrement en-dessous du bord antérieur de la glène pour rétracter le bourrelet et la capsule antérieure.

Élévateur du biceps

Permet de rétracter le tendon du biceps vers le haut. La longue tête du biceps se place entre les deux protubérances. Les bords s'insèrent dans la partie supérieure de la cavité glénoïde.

Écarteurs de type Fukuda modifiés

Conçus pour rétracter la diaphyse humérale de manière postérieure et de faciliter l'exposition de l'intégralité de la surface de la glène.



RÉF. DU PRODUIT :	
1950 [10 mm]	Largeur de la lame : 10 mm Longueur totale : 27,3 cm
1955 [13 mm]	Largeur de la lame : 12 mm Longueur totale : 27,3 cm
1960 [19 mm]	Largeur de la lame : 19 mm Longueur totale : 27,3 cm
1965 [25 mm]	Largeur de la lame : 25 mm Longueur totale : 27,3 cm



RÉF. DU PRODUIT :	
1910 [Version étroite]	Largeur de la lame : 14 mm Longueur totale : 27,9 cm
1920 [Version large]	Largeur de la lame : 22 mm Longueur totale : 27,9 cm



RÉF. DU PRODUIT :	
1980 [10 mm]	Largeur de la lame : 10 mm Longueur totale : 27,9 cm
1985 [13 mm]	Largeur de la lame : 12 mm Longueur totale : 27,9 cm
1990 [19 mm]	Largeur de la lame : 19 mm Longueur totale : 27,9 cm



RÉF. DU PRODUIT :	
1970	Largeur de la lame : 19 mm Longueur totale : 27,3 cm



RÉF. DU PRODUIT :	
1975	Largeur de la lame : 25 mm Longueur totale : 27,3 cm



RÉF. DU PRODUIT :	
1930 [Version étroite]	Largeur de la lame : 32 mm Ouverture : 25 x 40 mm Longueur totale : 18,4 cm
1940 [Version large]	Largeur de la lame : 38 mm Ouverture : 32 x 40 mm Longueur totale : 18,4 cm

OrthoLucent™ Écarteurs de type Fukuda modifiés

Conçus pour rétracter la diaphyse humérale de manière postérieure et faciliter l'exposition de la surface de la glène

Fabriquée à partir d'un composite résistant et léger en fibres carbone/PEEK, qui est totalement radio-transparent. Il peut être stérilisé à la vapeur et protège les surfaces des composants contre les rayures.

RÉF. DU PRODUIT :

1930-R [Version étroite]

Largeur de la lame : 32 mm
Ouverture : 25 x 40 mm
Longueur totale : 19,1 cm

1940-R [Version large]

Largeur de la lame : 38 mm
Ouverture : 32 x 40 mm
Longueur totale : 19,1 cm



OrthoLucent™
Version large
Réf. 1940-R

OrthoLucent™
Version étroite
Réf. 1930-R

Écarteur de type Fukuda modifié avec encoche pour alésoir

Conçu par Richard J. Miller, Docteur en médecine

L'encoche centrale permet de placer la tige d'un alésoir davantage vers l'arrière

Produit disponible en versions petit format et grand format. Il permet de rétracter la diaphyse humérale de manière postérieure et de faciliter l'exposition de l'intégralité de la surface de la glène.


RÉF. DU PRODUIT :

1898 [Version étroite]

Longueur totale : 18,4 cm
Largeur de la lame : 32 mm
Ouverture : 25 x 40 mm

1899 [Version large]

Longueur totale : 18,4 cm
Largeur de la lame : 38 mm
Ouverture : 32 x 40 mm

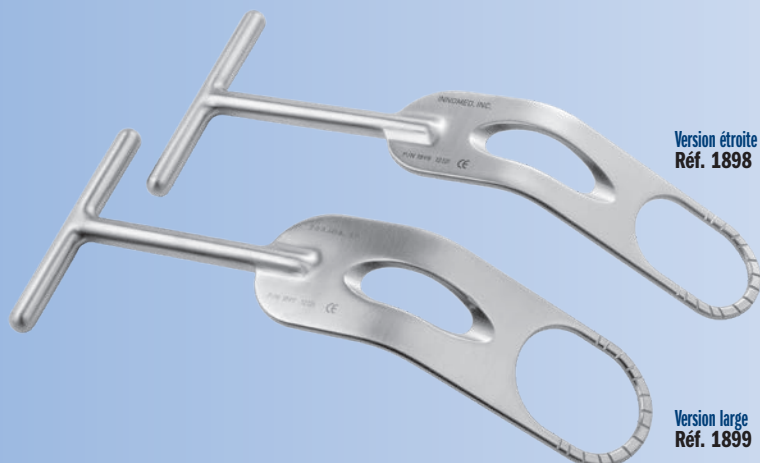

Version étroite
Réf. 1898

Version large
Réf. 1899

Écarteur Fakuda à oreille modifié


Conçu par Scot Rheinecker, PA

Conçu avec des bords arrondis pour réduire la pression exercée sur les tissus mous

RÉF. DU PRODUIT :

1896

Longueur totale : 19,1 cm
Largeur de la lame : 36 mm
Ouverture : 29 x 40 mm

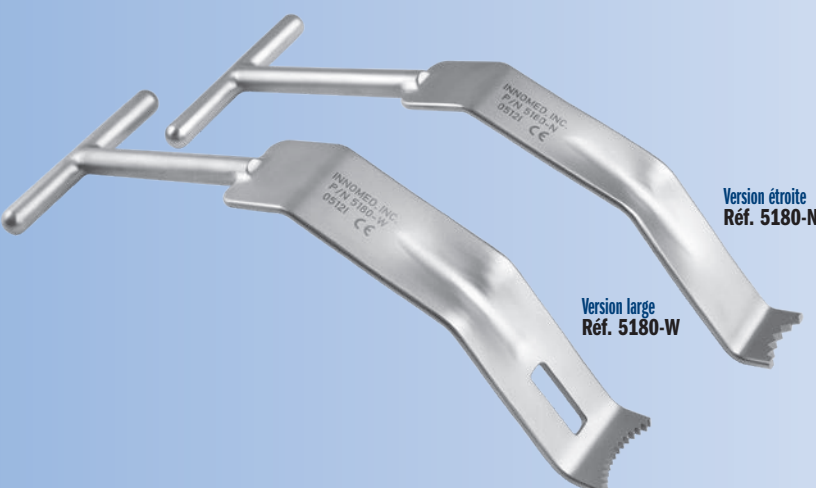

Version étroite
Réf. 5180-N

Version large
Réf. 5180-W

Écarteurs de type Fukuda modifiés de Evans

Conçu par Peter J. Evans, Docteur en médecine

Conçus pour rétracter la diaphyse humérale de manière postérieure et faciliter l'exposition de la surface de la glène

L'encoche centrale permet de placer la tige d'un alésoir davantage vers l'arrière.

RÉF. DU PRODUIT :

5180-N [Version étroite]

Longueur totale : 21,9 cm
Largeur de la lame : 25,4 mm
Profondeur de la lame : 9,5 cm

5180-W [Version large]

Longueur totale : 21,9 cm
Largeur de la lame : 31,7 mm
Profondeur de la lame : 9,5 cm


Écarteur du col de la glène

RÉF. DU PRODUIT :

5833

Longueur totale : 32,4 cm
Largeur du col : 75: 1,9 cm
Largeur de la fourche : 1,6 cm

Nouveau!

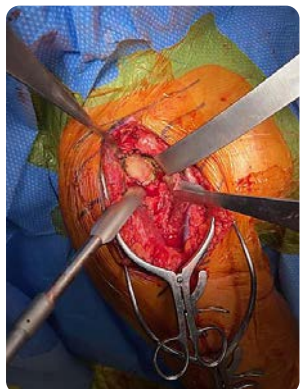

Écarteur glénoïdien de Rogozinski


Conçu par Chaim Rogozinski, Docteur en médecine

Conçu avec un profil ergonomique unique afin de réduire les efforts à déployer lors de la rétraction et d'écarter la main de l'assistant du champ opératoire pendant que la surface inférieure favorise la stabilisation de la tête humérale pour visualiser parfaitement la glène

RÉF. DU PRODUIT :

4271

Longueur totale : 28,6 cm
Largeur de la lame : 18 mm
Largeur de la poignée : 11,4 cm
Largeur des fourches : 3,4 mm
Espace entre les fourches : 10,8 mm

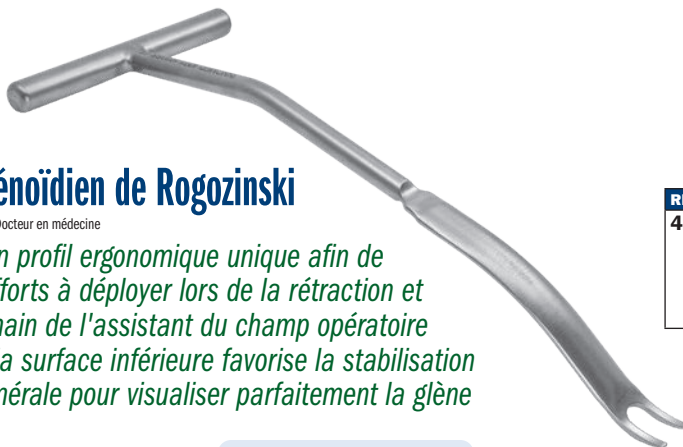

Écarteur glénoïdien de Rogozinski

Entwickelt von Chaim Rogozinski, MD

Conçu pour faciliter l'exposition de la glène en vue de réaliser l'alésage lors d'une arthroplastie totale de l'épaule

RÉF. DU PRODUIT :

4277-01

Longueur totale : 28,6 cm
Largeur de la poignée : 11,4 cm




Nouveau!

RÉF. DU PRODUIT :

4277-00 [Set]

L'ensemble comprend un Écarteur glénoïdien de Rogozinski et un Écarteur glénoïdien de Rogozinski.

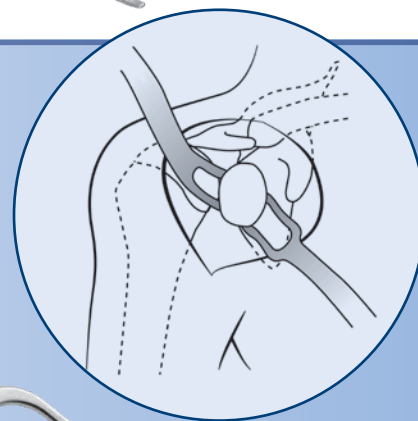

Écarteur glénoïdien de Gunther

Conçu par Stephen B. Gunther, Docteur en médecine

La conception ergonomique facilite la rétraction de la tête humérale vers l'arrière pendant l'exposition de la glène en évitant tout contact de l'alésage pendant l'intervention de remplacement de l'épaule

RÉF. DU PRODUIT :

1999

Longueur totale : 27,9 cm
Largeur du col : 15,9 mm
Largeur externe de la fourche : 25,4 mm
Largeur interne de la fourche : 15,9 mm



Écarteur glénoïdien antérieur de Levy

Conçu par Jonathan Levy, Docteur en médecine



Conçu pour soulager la tension exercée sur les structures glénoïdiennes antérieures. La poignée peut éventuellement être fixée au champ.

Petite format	Format Moyen	Grande format
Réf. 4536	Réf. 4536-01	Réf. 4536-02

RÉF. DU PRODUIT :

4536 [Petite format]

Longueur totale : 26,7 cm
Profondeur à partir de la courbure : 14,9 cm
Largeur de la lame : 1,9 cm
Espace entre les dents : 8,2 mm

4536-01 [Format Moyen]

Longueur totale : 26,7 cm
Profondeur à partir de la courbure : 14,9 cm
Largeur de la lame : 2,54 cm
Espace entre les dents : 10,6 mm


4536-02 [Grande format]

Longueur totale : 26,7 cm
Profondeur à partir de la courbure : 14,9 cm
Largeur de la lame : 3,2 cm
Espace entre les dents : 14 mm

Écarteur du col de la glène antérieure

Les dents sont spécifiquement conçues pour rétracter le sous-scapulaire et la capsule médialement lors d'une intervention chirurgicale de Bankart

- La section centrale large rétracte les tissus mous lors d'une intervention effectuée sur la glène antérieure
- La poignée coudée permet à l'assistant d'exercer une pression minimale pour effectuer l'exposition

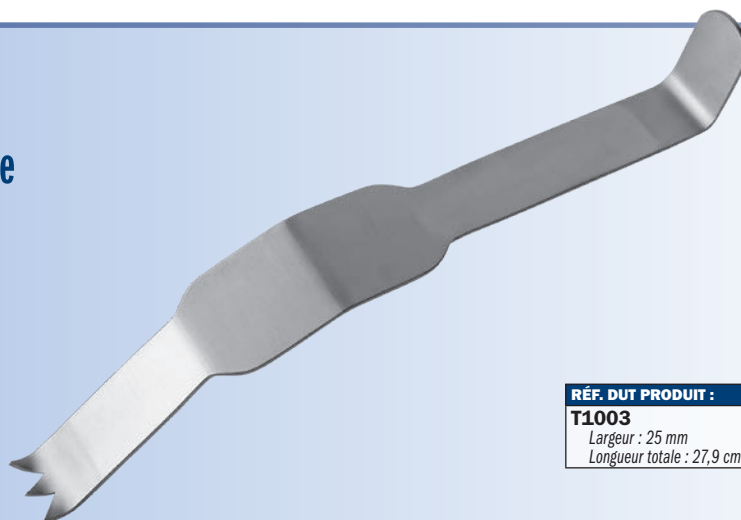

RÉF. DU PRODUIT :

T1003

Largeur : 25 mm
Longueur totale : 27,9 cm



Écarteur du col de la glène postérieure

Utilisé lors d'une ostéotomie de la tête humérale et les approches effectuées au niveau de la glène

- Conçu pour effectuer une rétraction en utilisant un seul doigt
- Sa forme permet de faire passer les dents derrière la glène et de rétracter les tissus pour accéder facilement à la glène

RÉF. DU PRODUIT :

T1002

Largeur : 30 mm
Longueur totale : 25,4 cm

Écarteur du col de la glène de Goldstein

Placé le long de la cavité glénoïde lors d'une intervention chirurgicale ouverte de Bankart pour offrir une exposition d'excellente qualité

- Les dents convexes pénètrent facilement dans la cavité glénoïde pendant que l'extrémité résistante de la tige permet de conserver l'instrument en dehors du champ de vision du chirurgien



RÉF. DU PRODUIT :


T1004

Largeur de la lame au niveau de la dent : 18 mm
Largeur de la lame au point le plus large : 36 mm
Longueur totale : 21,6 cm

Écarteurs de capsule

Conçus pour être utilisés lors d'une intervention chirurgicale de Bankart

L'écarteur à une seule fourche est communément lors de la rétraction du bord inférieur de la glène. Les écarteurs à deux ou trois fourches sont conçus pour être placés médialement le long du col de l'omoplate afin de rétracter la capsule antérieure et le bourrelet.

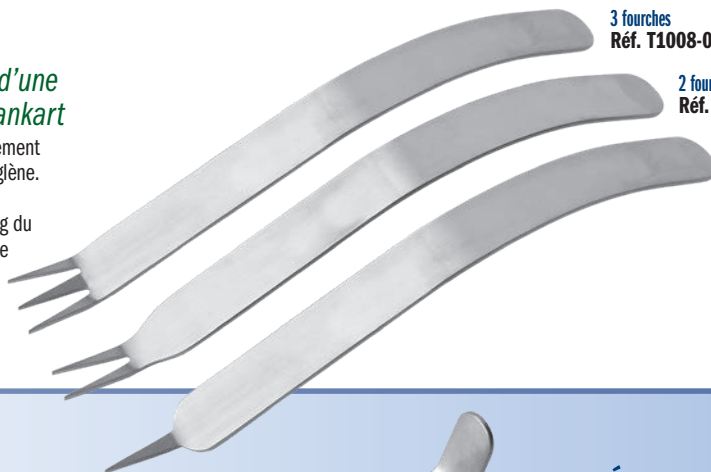


3 fourches
Réf. T1008-01

2 fourches
Réf. T1008

1 fourche
Réf. T1009

RÉF. DU PRODUIT :	
T1008-01	[3 fourches] Longueur totale : 25,4 cm Longueur de la fourche : 30 mm
T1008	[2 fourches] Longueur totale : 25,4 cm Longueur de la fourche : 30 mm
T1009	[1 fourche] Longueur totale : 25,4 cm Longueur de la fourche : 30 mm

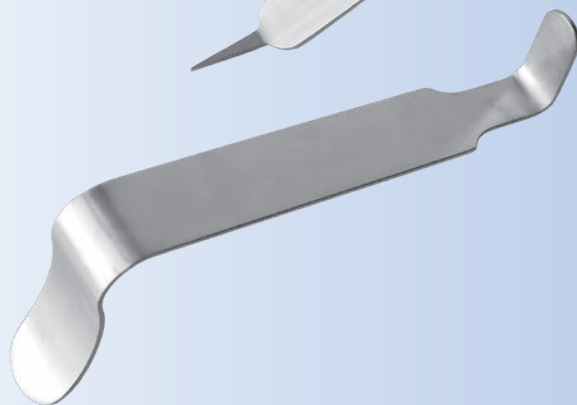

Écarteur du deltoïde

Il s'insère facilement sous l'acromion, le deltoïde et au-dessus de la tête humérale

► Utilisé dans la plupart des procédures ouvertes

RÉF. DU PRODUIT :	
T1001	Largeur : 30 mm Longueur totale : 20,3 cm

Écarteur de la tête humérale

Placé entre la glène et la tête humérale pour offrir une exposition d'excellente qualité


RÉF. DU PRODUIT :	
T1007	Largeur de la lame : 33 mm Largeur de la dent : 6 mm 21 mm Espace 6 mm Longueur totale : 17,8 cm



Écarteur d'acromioplastie

Conçu pour rétracter et protéger la tête humérale pendant la résection de la surface acromiale inférieure

La double fourche retient le segment postérieur de l'acromion pour la rétraction. La lime permet de lisser les bords rugueux de l'acromion après la résection.

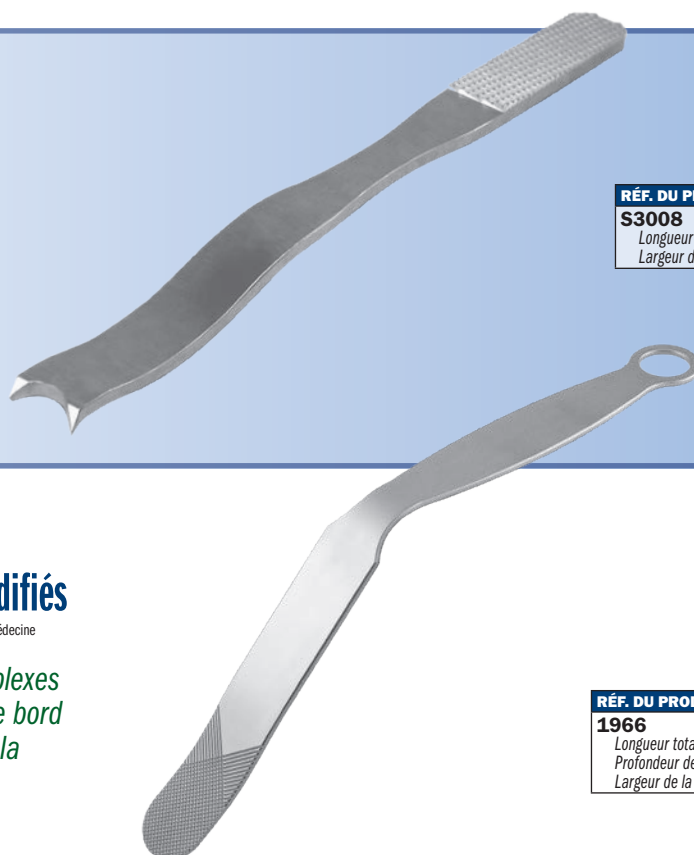


RÉF. DU PRODUIT :	
S3008	Longueur totale : 22,9 cm Largeur de la lame : 18 mm

Élévateurs de type Darrach modifiés

Modification de la conception réalisée par R.L. Stowell. Evan Flatow, Docteur en médecine est l'auteur de la conception d'origine.

Conçu pour les cas d'exposition complexes de la glène, l'élévateur se place sur le bord de la glène postérieure en rétractant la surface humérale coupée

RÉF. DU PRODUIT :	
1966	Longueur totale : 25,4 cm Profondeur de la lame : 12,7 cm Largeur de la lame : 2,54 cm

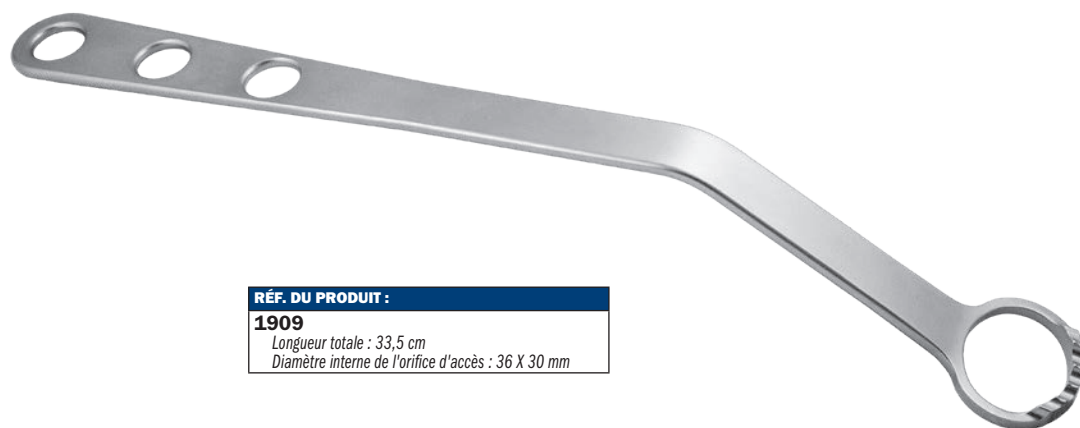

Écarteur glénoïdal postérieur à longue poignée de Mehalik

Conçu en collaboration avec Mayo Clinic, modifié par John Mehalik, Docteur en médecine.

Facilite l'exposition du segment postérieur de la glène

RÉF. DU PRODUIT :

1909

Longueur totale : 33,5 cm

Diamètre interne de l'orifice d'accès : 36 X 30 mm

Écarteur glénoïdal de Burkhead

Conçu par Wayne Burkhead, Docteur en médecine

La barre de l'écarteur appuie contre la glène pendant que l'extrémité de l'écarteur exerce une pression sur la capsule postérieure

RÉF. DU PRODUIT :

5839 [Grand format]




Longueur totale : 23,2 cm

Largeur de la lame à l'extrémité : 3,8 cm

5839-SM [Petit format]

Longueur totale : 22,2 cm

Largeur de la lame à l'extrémité : 2,54 cm

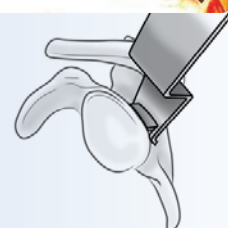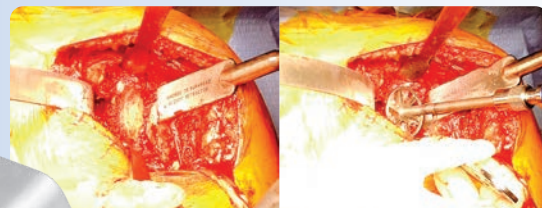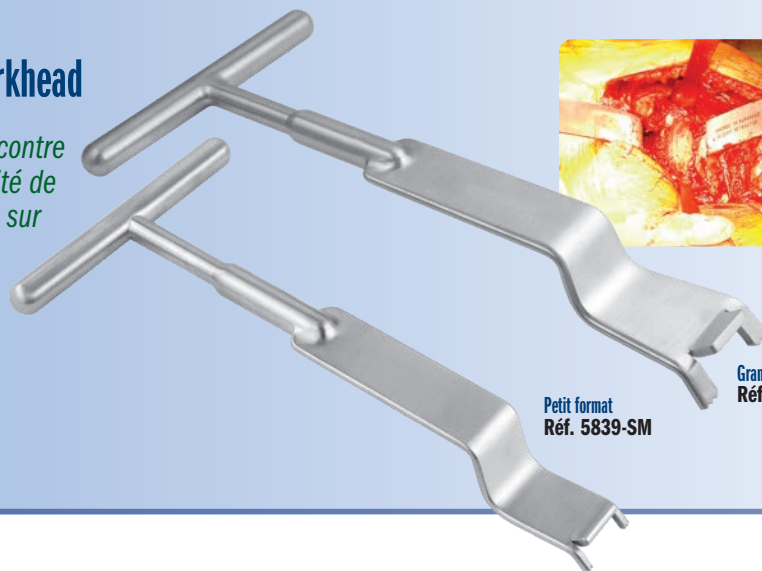

Petit format
Réf. 5839-SM

Grand format
Réf. 5839

Écarteur TSA/RSA réversible de Burkhead

Conçu par Wayne Burkhead, Docteur en médecine




La forme unique, les angles et l'extrémité à double canule permettent de pousser la capsule postérieure et l'humérus pour les éloigner de la glène afin de préparer la glène et la mise en place du/des composant(s) sans retirer l'écarteur

RÉF. DU PRODUIT :

5839-01

Longueur totale : 23,2 cm


Largeur de la lame à l'extrémité : 3,8 cm

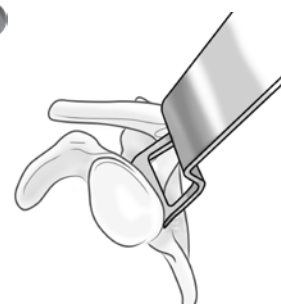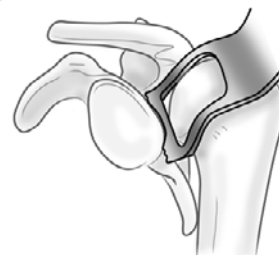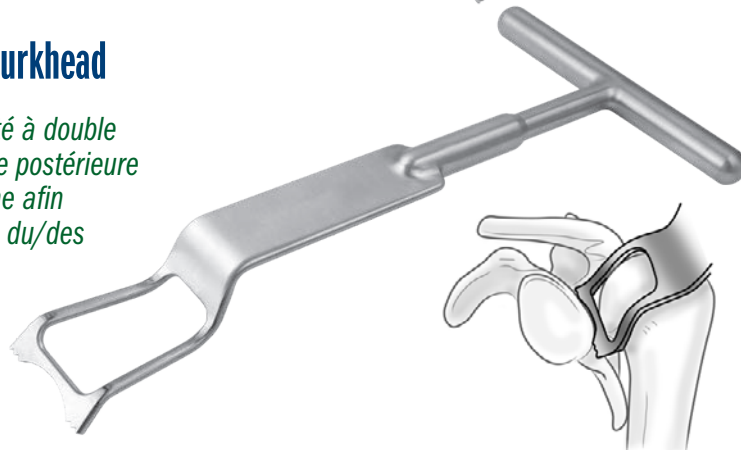

Écarteurs glénoïdien de Bacastow

Conçu par David Bacastow, Docteur en médecine

Conçus pour exposer la glène, notamment pour les interventions de prothèses d'épaule inversée où l'utilisation d'une voie d'abord inférieure est importante

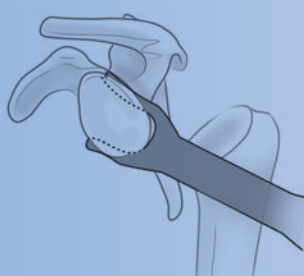

Droite
Réf. 1897-R



Gauche
Réf. 1897-L

RÉF. DU PRODUIT :

1897-L [Gauche]

Longueur totale : 29,8 cm

1897-R [Droite]

Longueur totale : 29,8 cm

Permet de visualiser et d'accéder directement à la plaque de base de la glénosphère par l'intermédiaire d'une incision deltopectorale avec une insertion intacte du grand pectoral.

Grand écarteur deltoïdien



RÉF. DU PRODUIT :

1671

Longueur totale : 22,6 cm
Largeur de la grande extrémité : 7 cm
Profondeur de la grande extrémité : 5,5 cm
Largeur de la petite extrémité : 5 cm
Profondeur de la petite extrémité : 4,5 cm




Nouveau!

Conçu pour réaliser une rétraction latérale du deltoïde lors d'une arthroplastie ou d'une intervention en ouvert de l'épaule. La grande taille de cet écarteur doté d'extrémités plus profondes et plus larges est utile pour les patients de grande taille et ayant une musculature particulièrement développée

Écarteur du deltoïde de Weatherly

Conçu par Wallace Weatherly,
Docteur en médecine

Conçu pour rétracter le deltoïde pendant une approche de dissociation du deltoïde moyen en « mini-open » pratiquée lors d'une intervention ouverte de la coiffe des rotateurs. La poignée décalée améliore la visualisation du site d'intervention et le revêtement antidérapant ergonomique de la poignée réduit la fatigue du chirurgien et de son équipe

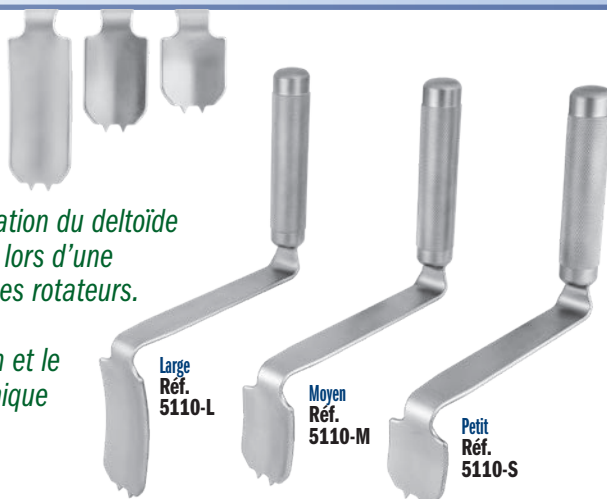

RÉF. DU PRODUIT :

5110-L [Large]



Longueur totale : 32,4 cm
Profondeur à partir de la lame : 11,4 cm
Dimensions de la lame : 40 x 90 mm

5110-M [Moyen]

Longueur totale : 27,9 cm
Profondeur à partir de la lame : 7,6 cm
Dimensions de la lame : 40 x 55 mm

5110-S [Petit]

Longueur totale : 26,7 cm
Profondeur à partir de la lame : 6,4 cm
Dimensions de la lame : 40 x 40 mm

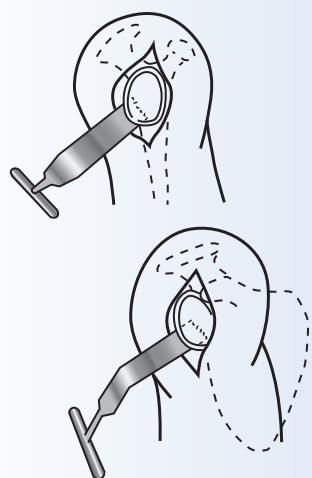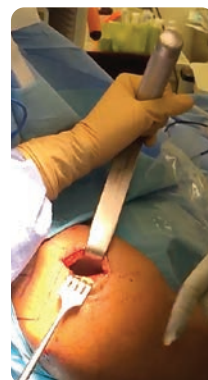

Écarteur de talon de Agrawal


Conçu par Vivek Agrawal, Docteur en médecine

Conçu pour faciliter l'exposition de la glène lors d'une arthroplastie d'épaule totale

RÉF. DU PRODUIT :

4695

Longueur totale : 20 cm
Largeur de la lame : 41 mm

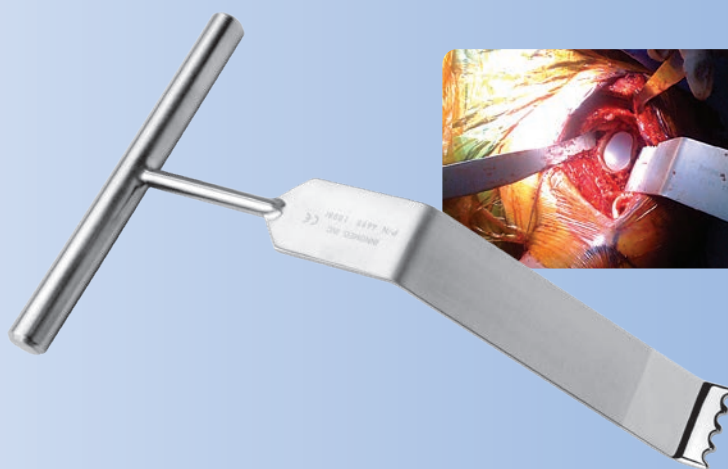

Écarteur des composants de la glénosphère

Conçu par Tim Seachris

Conçu pour les arthroplasties de l'épaule totale et d'épaule inversée

La version avec revêtement protège les surfaces des composants.




RÉF. DU PRODUIT :

5841 [Revêtement sur une extrémité]

Longueur totale : 25,7 cm
Largeur de la lame : 2,4 cm

5841-01 [Extrémité sans revêtement]

Longueur totale : 25,7 cm
Largeur de la lame : 2,4 cm

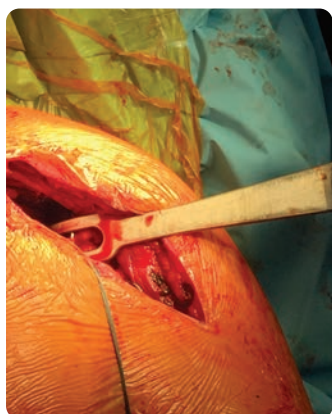



Écarteur du deltoïde large de Levy

Conçu par Jonathan Levy, Docteur en médecine


Conçu pour prendre en charge les fractures de l'humérus proximal. Facilite la rétraction appropriée du deltoïde sans aucune interférence lors d'une fluoroscopie active

RÉF. DU PRODUIT :

1672

Longueur totale : 29,8 cm
Largeur de la lame au point le plus large : 6,4 cm
Profondeur de la lame : 3,5 cm

Brevet en attente

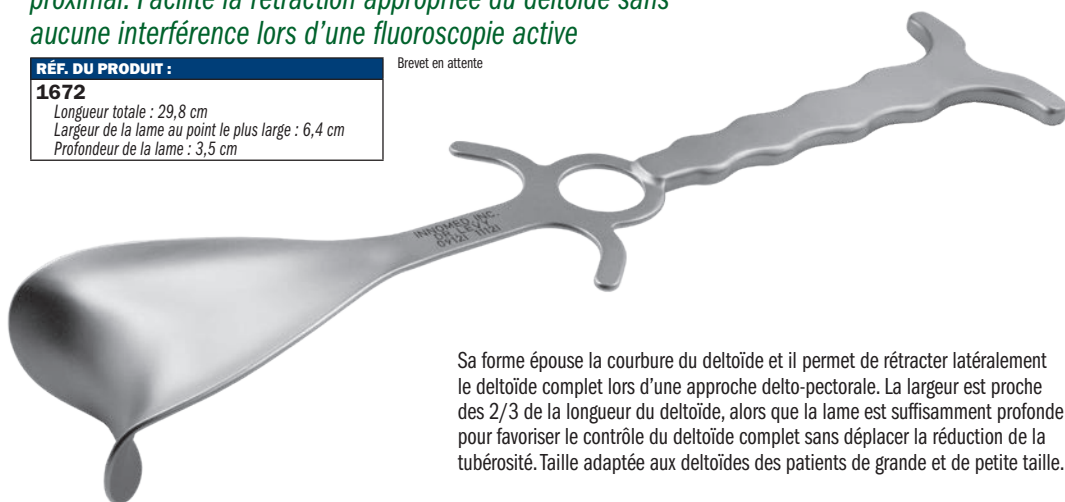

Sa forme épouse la courbure du deltoïde et il permet de rétracter latéralement le deltoïde complet lors d'une approche delto-pectorale. La largeur est proche des 2/3 de la longueur du deltoïde, alors que la lame est suffisamment profonde pour favoriser le contrôle du deltoïde complet sans déplacer la réduction de la tubérosité. Taille adaptée aux deltoïdes des patients de grande et de petite taille.

Écarteurs deltoïdiens de type Browne OrthoLucent™ de Kaminsky

Conçu par Sean B. Kaminsky, Docteur en médecine

Utilisés dans le cadre d'une approche delto-pectorale, ils peuvent rester en place pour réduire une fracture, positionner une plaque et confirmer l'emplacement d'une vis/d'un fil/d'un foret

Ils sont adaptés aux procédures d'acromioplastie, de réparation de la coiffe des rotateurs et à la fixation des fractures. Leur forme épouse le contour de la tête humérale et la rétraction du deltoïde permet d'effectuer une exposition prolongée. Ils permettent de réduire la durée de l'intervention, de faciliter la réduction d'une fracture et de maintenir la position du matériel sans devoir retirer et remettre en place fréquemment l'écarteur.

Le matériau composite PEI à base de fibres de carbone OrthoLucent™ résistantes et légères, complètement radio-transparent protège les surfaces des composants contre les rayures et peut être stérilisé à la vapeur.

RÉF. DU PRODUIT :

1670-01R [Petit format]
Largeur de la lame : 4,5 cm
Longueur totale : 26,7 cm

1670-02R [Grand format]
Largeur de la lame : 5,4 cm
Longueur totale : 26,7 cm



Klein
Réf. 1670-01R

Groß Réf. 1670-02R



Écarteur du deltoïde de Browne

Utilisé dans le cadre d'une approche delto-pectorale




RÉF. DU PRODUIT :

1670-01 [Petit format]
Largeur de la lame : 4,5 cm
Longueur totale : 29,2 cm

1670-01D [Petite profondeur]
Largeur de la lame : 45 mm
Longueur totale : 31,1 cm

1670-02 [Grand format]
Largeur de la lame : 5,7 cm
Longueur totale : 29,2 cm

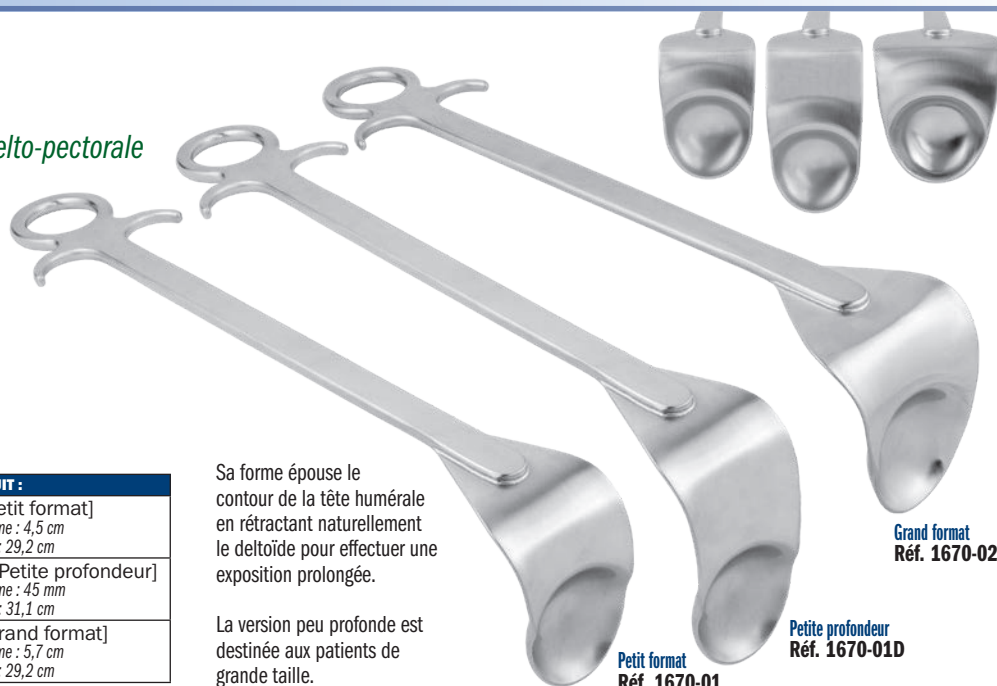

Sa forme épouse le contour de la tête humérale en rétractant naturellement le deltoïde pour effectuer une exposition prolongée.

La version peu profonde est destinée aux patients de grande taille.

Petit format
Réf. 1670-01



Petite profondeur
Réf. 1670-01D

Grand format
Réf. 1670-02

Écarteurs d'épaule malléables de McFarland

Conçu par Edward McFarland, Docteur en médecine

Conçus pour améliorer l'exposition lors des interventions de l'épaule

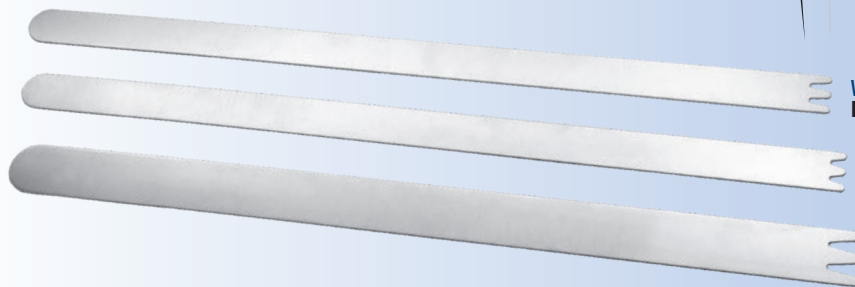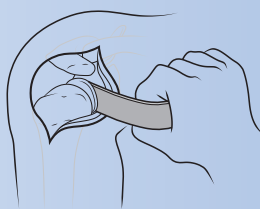

Version étroite profonde
Réf. 4537-01

Version étroite et superficielle
Réf. 4537-02

Version large
Réf. 4537-03

RÉF. DU PRODUIT :

4537-00 [Jeu de trois tailles]

Composants également disponibles à l'unité :

4537-01 [Version étroite profonde]

Longueur totale : 39,4 cm

Profondeur de la fourche : 10 mm

4537-02 [Version étroite et superficielle]

Longueur totale : 39,4 cm

Profondeur de la fourche : 6,8 mm

4537-03 [Version large]

Longueur totale : 39,4 cm

Profondeur de la fourche : 13,5 mm

Écarteurs à griffes

Conçu pour la rétraction des tissus mous



Poignée ergonomique Réf. 4839

Poignée de contour Réf. 4839-04

Nouveau!

Les parties métalliques de l'écarteur bénéficient d'une finition mate.

RÉF. DU PRODUIT :

4839 [Poignée ergonomique]

Longueur totale : 24,1 cm

Largeur des griffes : 1,3 cm

Profondeur des griffes : 1,4 cm

4839-04 [Poignée de contour]

Longueur totale : 24,1 cm

Largeur des griffes : 1,3 cm

Profondeur des griffes : 1,4 cm

Écarteurs de Chandler

RÉF. DU PRODUIT :

3220-01 [15,9 mm]

Longueur totale : 23,5 cm

Largeur de la lame : 16 mm

3220-02 [19 mm]

Longueur totale : 23,5 cm

Largeur de la lame : 19 mm

3220-04 [25,4 mm]

Longueur totale : 23,5 cm

Largeur de la lame : 25,4 mm

3220-02R [OrthoLucent™ 19 mm]

Longueur totale : 23,5 cm

Largeur de la lame : 19 mm



Utilisés pour rétracter les tissus de l'os

Ils permettent au chirurgien de rétracter les tissus mous de l'os et ils peuvent être utilisés dans les interventions effectuées sur la hanche et le genou. La poignée est cambrée pour rester en dehors du champ de vision et du site d'intervention. Trois tailles de lames sont disponibles : 15,9 mm, 19 mm et 25,4 mm.

La version OrthoLucent™ a été fabriquée à partir d'un composite résistant et léger en fibres carbone/PEEK, qui est totalement radio-transparent. Il peut être stérilisé à la vapeur et protège les surfaces des composants contre les rayures.

15,9 mm Réf. 3220-01

19 mm Réf. 3220-02

25,4 mm Réf. 3220-04

OrthoLucent™ 15,9 mm
Réf. 3220-02R*

Crochet à os pour l'épaule de Wiater

Conçu par J. Michael Wiater, Docteur en médecine, FAOS, FAOA

Grand crochet à os conçu pour rétracter l'humérus proximal vers l'arrière afin de fournir une exposition pour un réaliser un alésage de la glène lors d'une intervention à ciel ouvert de l'épaule

Également utile pour les interventions pratiquées sur de grandes articulations.


RÉF. DU PRODUIT :

5079

Diamètre de l'incursion : 68 mm

Longueur totale : 28,6 cm

Largeur de la poignée : 10,2 cm

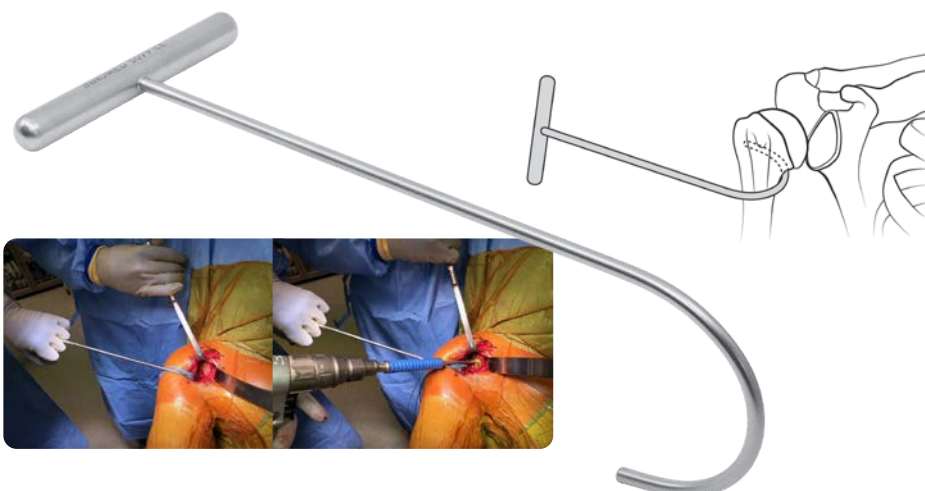

Cadre d'épaule en fer à cheval et lames

Conçus pour améliorer l'exposition lors des arthroplasties de l'épaule

Lame de l'écarteur - Large
Réf. 2030-02

Lame de l'écarteur -
Étroite et incurvée
Réf. 2030-04

Lame de l'écarteur -
Petit format et étroite
Réf. 2030-05

Lame de l'écarteur - Inférieure
Réf. 2030-06

Cadre en fer à cheval
Réf. 2030-01

RÉF. DU PRODUIT :

2030-00 [Kit]

Le kit inclut (1) cadre, (1) pour chaque modèle de lame

Composants également disponibles à l'unité :

2030-01 [Cadre en fer à cheval]

Dimensions générales : 17,8 cm x 12,7 cm

Largeur du cadre : 15 mm

2030-02 [Lame de l'écarteur - Large]

Largeur de la lame : 22 mm

Longueur totale : 27,9 cm

2030-03 [Lame de l'écarteur - Étroite]

Largeur de la lame : 16 mm

Longueur totale : 27,9 cm

2030-04 [Lame de l'écarteur - Étroite et incurvée]

Largeur de la lame : 16 mm

Longueur totale : 25,4 cm

Longueur de la poignée : 11,4 cm

2030-05 [Lame petit format et étroite]

Largeur de la lame : 14 mm

Profondeur de la lame : 5,1 cm

Longueur totale : 21,6 cm

2030-06 [Lame - Inférieure]


Largeur de la lame : Externe 34 mm, Interne 24 mm

Longueur totale : 29,2 cm

Longueur de la fourche : 28 mm

Approche delto-pectorale

Approche supéro-latérale

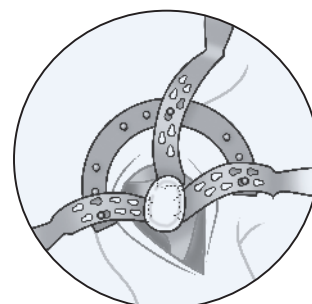

Élévateur Cobb coudé de McFarland

Conçu par Edward McFarland, Docteur en médecine

Conçu pour effectuer une rétraction tout en contribuant à protéger le nerf axillaire dans les interventions de l'épaule

Le revêtement en nitrure de titane ultra dur contribue à prolonger la précision.

RÉF. DU PRODUIT :

3431

Longueur totale : 24,1 cm

Longueur à partir de la courbure : 8,9 cm

Largeur de l'extrémité Cobb : 20 mm

Angle de courbure : 30°

Écarteur Hohmann inversé de Evans

Conçu par Peter J. Evans, Docteur en médecine

Son format plus compact est utile pour rétracter le muscle deltoïde par une voie d'abord supérieure ou latérale et également pour protéger le nerf axillaire selon une voie d'abord inférieure tout en exposant la glène

RÉF. DU PRODUIT :

4547

Largeur de la lame : elle passe de 30 mm à 18 mm

Profondeur de la lame : 7,6 cm

Largeur de la fourche : 6 mm

Longueur totale : 21,6 cm

Écarteur d'épaule de Bolanos

Conçu par Alberto Bolanos, Docteur en médecine

Conçu pour les interventions de réparation de la coiffe du rotateur en « mini open » et les arthroplasties de l'épaule. Le contour épouse la tête humérale et le bord arrondi évite de traumatiser la musculature environnante

La profondeur s'adapte à la morphologie de la plupart des patients et la poignée ergonomique facilite le travail de maintien des assistants.

RÉF. DU PRODUIT :

3222

Longueur totale : 19,1 cm

Largeur de la lame au point le plus large : 2,54 cm

Écarteur pour technique de Latarjet

Conçu par Joey A. LaMartina, II, Docteur en médecine

Écarteur pour voie antérieure conçu pour les interventions de Latarjet qui est positionné médialement au bloc osseux afin de rétracter le muscle sous-scapulaire et faciliter la rétraction de la scapula



Les petits picots facilitent l'insertion dans l'os glénoïdien afin d'éviter tout risque de glissement toute en permettant d'exercer une charge axiale au niveau de la scapula antérieure permettant ainsi de rétracter la scapula afin de mettre en place la vis parallèle. Principalement conçu pour les reconstructions effectuées avec la technique de Latarjet ou les reconstructions osseuses de la glène antérieure ou pour les réparations en ouvert de Bankart.

Nouveau!

RÉF. DU PRODUIT :

5256

Longueur totale : 32 cm
Largeur de la lame : 2,5 cm
Bord de la lame : 11 cm
Longueur de la fourche : 1,6 mm

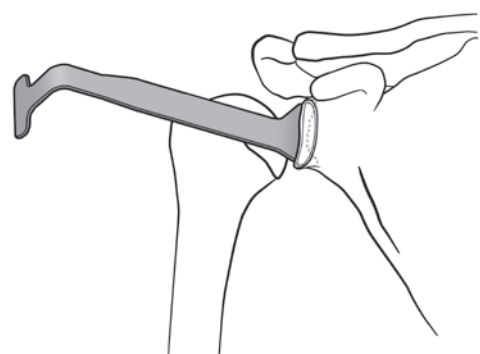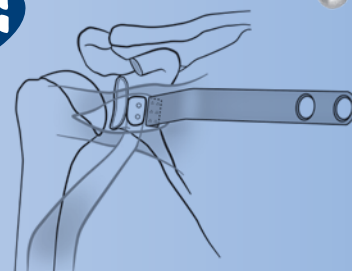

Écarteur glénoïdien semi-arrondi de George

Conçu par Michael S. George, Docteur en médecine

Conçu pour abaisser la tête humérale et rétracter le tissu à partir de la moitié postérieure de la glène en améliorant l'exposition en vue de préparer et de mettre en place le composant glénoïdien lors d'une arthroplastie d'épaule totale

RÉF. DU PRODUIT :

2435

Longueur totale : 20,3 cm
Largeur de la lame : 5,4 cm



Écarteur d'épaule en V de McFarland

Conçu par Edward McFarland, Docteur en médecine


Conçu pour offrir un accès en profondeur du bord de la glène lors de la réalisation d'une approche de dissociation du muscle sous-scapulaire de l'épaule

Cannelé pour améliorer la visualisation et optimiser l'espace lors de la mise en place des sutures dans les lambeaux capsulaires avant de placer les écarteurs à trois fourches.

RÉF. DU PRODUIT :

4851

Longueur totale : 22,9 cm
Longueur à partir de la courbure : 21,6 cm
Longueur de la poignée : 10,2 cm
Profondeur de la lame : 7 cm
Largeur de la lame : .1 cm

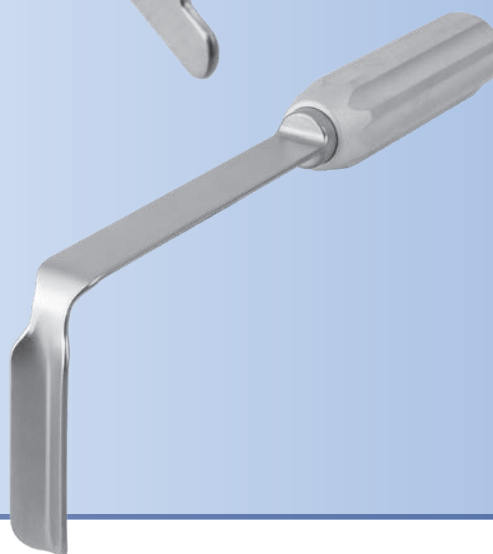

Écarteur d'acromioplastie de Kirschenbaum

Conçu par Ira Kirschenbaum, Docteur en médecine


Protège le segment postérieur de l'épaule et de la surface articulaire de la tête humérale lors d'une acromioplastie et d'une intervention ouvertes de la coiffe des rotateurs

Conçu pour s'insérer sous le bord postérieur de l'acromion et soulever la tête humérale pour dégager le site d'intervention.


RÉF. DU PRODUIT :

5840

Longueur totale : 23,5 cm
Largeur de la lame à son extrémité : 21 mm

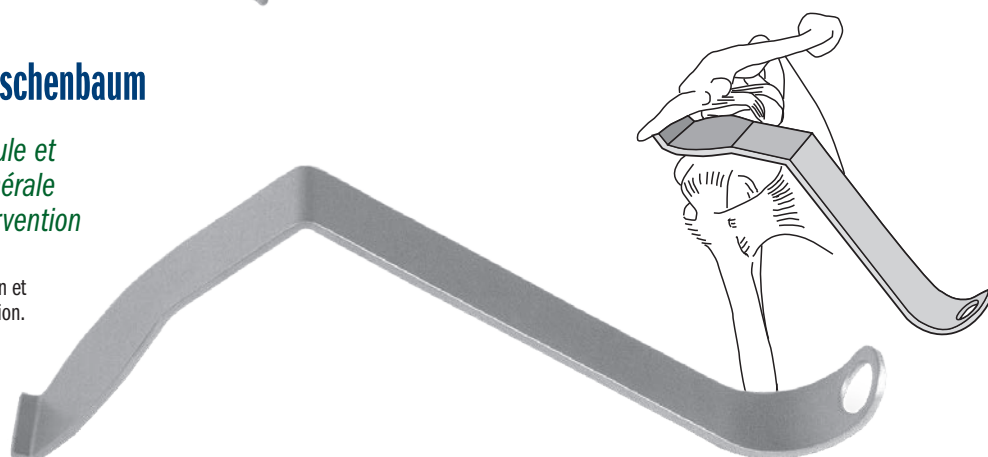

Distance entre les
trous de perçage :
Petit = 9,9 mm
Grand = 12,5 mm

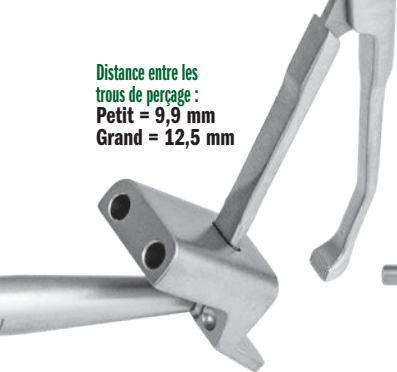

Forceps de Latarjet, Petit format
Réf. 5257-01



Latarjet Guide-foret, Petit format
Réf. 5257-02



Forceps de Latarjet, Grand format
Réf. 5258-01



Latarjet Guide-foret, Grand format
Réf. 5258-02

Guide-foret et forceps de Meyer Latarjet

Conçu par le professeur Dominik Meyer

Dispositif de visée pour
positionner un bloc osseux au
ras d'une surface articulaire

RÉF. DU PRODUIT :	
VERSION À PETIT ESPACEMENT	
5257-00	[Version à petit espacement]
Le kit Inclut:	
5257-01	[Forceps de Latarjet, Petit format] Longueur totale : 14,9 cm Largeur entre la plateforme et le bras de serrage : 5,6 mm
5257-02	[Latarjet Guide-foret, Petit format] Longueur totale : 21,6 cm Diamètre du trou de perçage : 3,5 mm Distance entre les trous de perçage : 9,9 mm
1025	[Boîte]

RÉF. DU PRODUIT :	
VERSION À GRAND ESPACEMENT	
5258-00	[Version à grand espacement]
Le kit Inclut:	
5258-01	[Forceps de Latarjet, Grand format] Longueur totale : 14,9 cm Largeur entre la plateforme et le bras de serrage : 8,15 mm
5258-02	[Latarjet Guide-foret, Grand format] Longueur totale : 21,6 cm Diamètre du trou de perçage : 3,5 mm Distance entre les trous de perçage : 12,5 mm
1025	[Boîte]



La coracoïde ostéotomisée
est fixée avec le côté latéral
orienté vers l'articulation de la
coracoïde (où le ligament est
situé) qui fait face au bord du
guide-foret.



Deux trous de guidage de
3,5 mm sont percés.




Le guide-foret est placé contre la
glène antéro-inférieure, le bord
reposant sur le cartilage et le
premier trou fileté de 2,5 mm de
fixation de la vis est percé.



Le deuxième trou fileté de
2,5 mm est percé parallèlement à
une aiguille de 2,5 mm qui a été
introduite dans le premier trou
pour garantir une distance et une
orientation correctes.



La coracoïde est à présent fixée à
l'aide de deux vis de 3,5 mm ou de
4,5 mm placées au ras du cartilage
à cause de la distance identique
entre le bord et les trous de vis
percés sur la coracoïde et la glène.

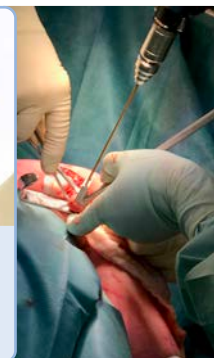

Gouttière d'épaule de Wiater

Conçue par J. Michael Wiater, Docteur en médecine, FAOS, FAOA

Conçue pour préserver les surfaces d'appui de la prothèse lors des phases
de luxation et de réduction pendant une arthroplastie de l'épaule

Elle s'avère également utile pour les arthroplasties totales de
la hanche ou pour les procédures de préservation de la
hanche chez les patients de petite taille.



Elle est fabriquée en delrin pour contribuer
à éliminer les dommages causés à l'implant. Cet instrument est
radio-transparent et il peut être stérilisé à la vapeur ou au gaz.

RÉF. DU PRODUIT :	
6879	
Longueur totale : 27,9 cm	
Largeur : 3,5 cm	

Protecteur du nerf axillaire

Conçus par Brett Sanders, Docteur en médecine

Conçu pour libérer la capsule inférieure lors d'une
arthroplastie de l'épaule et de l'exposition de la glène

L'extrémité Freer conique facilite la séparation du nerf axillaire et de la capsule
inférieure même lors des expositions complexes. Le matériau non-conducteur permet
d'utiliser un bistouri Bowie directement dans le guide de découpe du petit canal (sur les
deux côtés). Réversible afin de pouvoir être utilisé à droite ou à gauche.



RÉF. DU PRODUIT :	
8029	
Longueur totale : 18,1 cm	
Largeur : 12 mm	
Épaisseur : 4 mm	



Écarteur de tissus mous de Badger avec bras articulés

Conçu par Gregory Colbath, Docteur en médecine

Facilite le passage et la fixation des greffons, en particulier pour les interventions chirurgicales de l'épaule et du genou, ouvertes et arthroscopiques

RÉF. DU PRODUIT :

5084

Longueur totale : 15,3 cm
Profondeur de la lame : 3,7 cm
Largeur de la lame : 13 mm





Nouveau!

Écarteur capsulaire d'épaule de Bacastow

Conçu par David Bacastow, Docteur en médecine

Conçu pour favoriser la mise sous tension de la capsule inférieure afin d'améliorer la visualisation et la dissection lors des interventions de remplacement d'épaule renversée ou anatomique

Les bras pivotants prennent en charge une utilisation ambidextre.

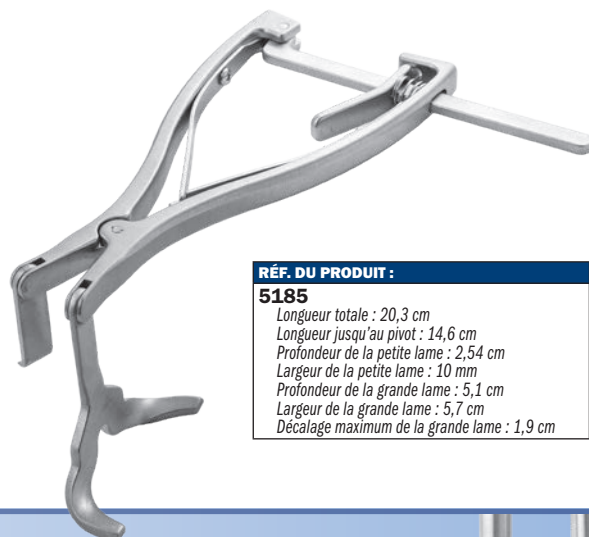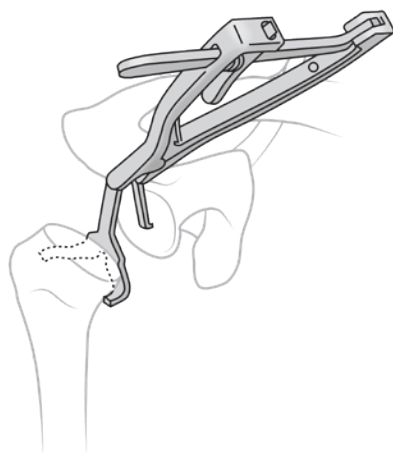

RÉF. DU PRODUIT :

5185

Longueur totale : 20,3 cm
Longueur jusqu'au pivot : 14,6 cm
Profondeur de la petite lame : 2,54 cm
Largeur de la petite lame : 10 mm
Profondeur de la grande lame : 5,1 cm
Largeur de la grande lame : 5,7 cm
Décalage maximum de la grande lame : 1,9 cm

Écarteur Zelpi décalé de Durham

Conçu par Alfred Durham, Docteur en médecine

Écarteur à profondeur variable conçu pour effectuer des expositions lors des arthroscopies totales de la hanche totale et de l'épaule

- ▶ Lors des interventions de la hanche, la poignée doit être orientée vers le chirurgien afin que la jambe longue soit située sur le côté intérieur.
- ▶ Lors des interventions de l'épaule, la poignée doit être orientée vers le bas afin que la jambe longue soit située sur le côté extérieur.
- ▶ La jambe longue peut être déployée à une profondeur supplémentaire de 2,8 cm.




RÉF. DU PRODUIT :

1573-L [Gauche]

Longueur totale : 21,6 cm
Profondeurs des jambes : 7,9 cm & 10,7 cm

1573-R [Droite]

Longueur totale : 21,6 cm
Profondeurs des jambes : 7,9 cm & 10,7 cm

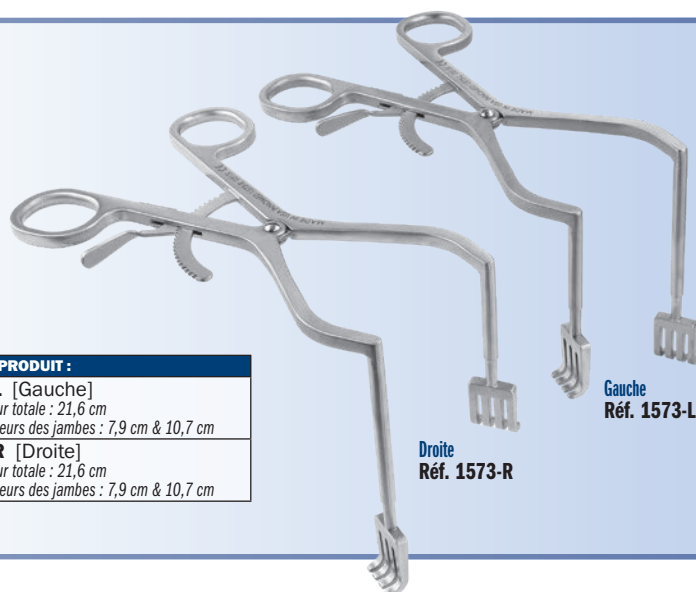

Gauche
Réf. 1573-L

Droite
Réf. 1573-R

Écarteur sous-acromial de Gerber

Conçu pour bénéficier d'un accès optimal à l'espace sous-acromial

Conçu pour bénéficier d'un accès optimal à l'espace sous-acromial en distrayant de manière inférieure la tête humérale à partir de l'acromion.

RÉF. DU PRODUIT :

Version standard

1640-01 [Droite]

Longueur de la lame : 19 mm
Diam. anneau interne : 32 mm
Longueur totale : 17,8 cm

1640-02 [Gauche]

Longueur de la lame : 19 mm
Diam. anneau interne : 32 mm
Longueur totale : 17,8 cm


Version modifiée

1641-01 [Droite]

Longueur de la lame : 34 mm
Diam. anneau interne : 25 mm
Longueur totale : 17,8 cm

1641-02 [Gauche]

Longueur de la lame : 34 mm
Diam. anneau interne : 25 mm
Longueur totale : 17,8 cm

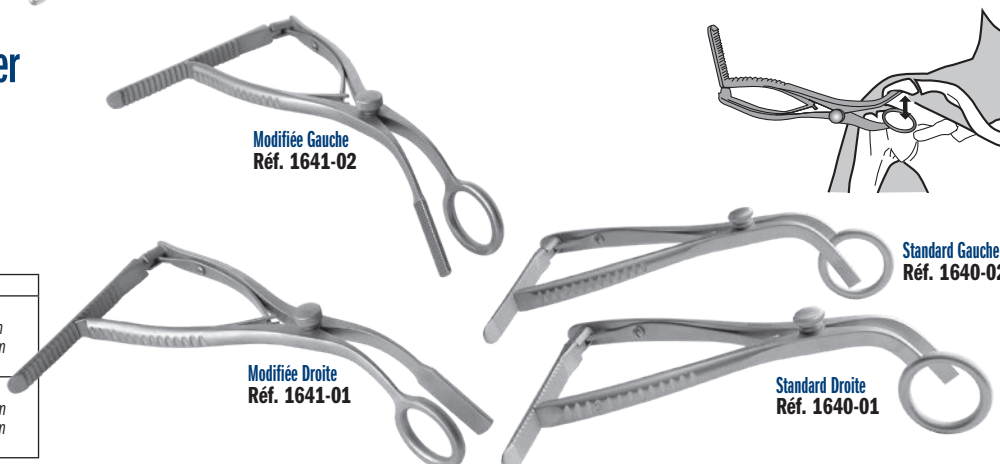

Modifiée Gauche
Réf. 1641-02

Modifiée Droite
Réf. 1641-01

Standard Gauche
Réf. 1640-02

Standard Droite
Réf. 1640-01

Écarteur glénoïdien autostatique avec charnière et double poignée ergonomique de Kolbel



Deux paires de lames clipsables pivotant librement sont fournies.

RÉF. DU PRODUIT :

T1016-01 [Kit]

Le kit inclut :

T1016-01-2F [Écarteur]

Longueur totale : 23,5 cm

Longueur jusqu'à la charnière : 17,8 cm

Longueur du bras : 5,7 cm

T1018-P [Paire de lames] 36 X 36 mm

T1019-P [Paire de lames] 36 X 53 mm

RÉF. DU PRODUIT :

T1030 [Kit]

Composants également disponibles à l'unité :

T1030-01 [Poignée de l'écarteur]

Longueur totale : 17,8 cm

T1030-L [Lame décalée longue]

(2) inclus dans le kit ; (1) avec

cette référence uniquement

Longueur du décalage : 35 mm

Dimensions de la lame : 36 x 36 mm

T1030-S [Lame décalée courte]

(2) inclus dans le kit ; (1) avec

cette référence uniquement

Longueur du décalage : 10 mm

Dimensions de la lame : 36 x 36 mm


Le kit inclut : (1) T1030-01, (2) T1030-L, (2) T1030-S

Jeu d'écarteurs pour l'épaule Kolbel décalés de Durham

Conçu par Alfred A. Durham, Docteur en médecine

Conçu pour la rétraction du deltoïde et sous la tête courte du biceps pour exposer l'épaule. Les lames décalées plus longues sont utiles chez les patients qui possèdent de grands muscles. Les lames décalées plus courtes sont adaptées aux patients âgés de plus petite taille

Les lames incurvées lisses clipsables pivotant librement permettent de concentrer les forces au centre du ventre des muscles en gardant ainsi l'écarteur centré sans gêner l'exposition.

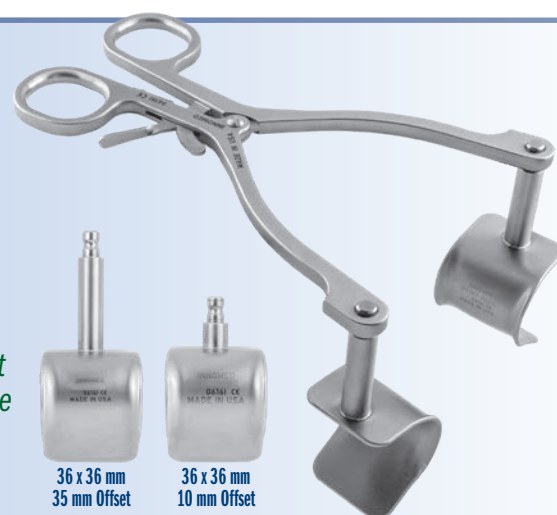

36 x 36 mm
35 mm Offset

36 x 36 mm
10 mm Offset

Écarteurs de tissus mous larges de Kolbel

Utile lors de la phase initiale pour rétracter les tissus mous comprenant l'articulation gléno-humérale

Son utilisation facilite l'introduction d'écarteurs plus profonds qui sont indispensables pour offrir une visibilité suffisante de la glène, de l'acromion et de la coiffe des rotateurs.

RÉF. DU PRODUIT :

T1006 [Version standard]


Longueur totale : 20,3 cm

T1006-01 [Version profonde]

Longueur totale : 19,1 cm

T1006-L [Version longue]

Longueur totale : 21,6 cm

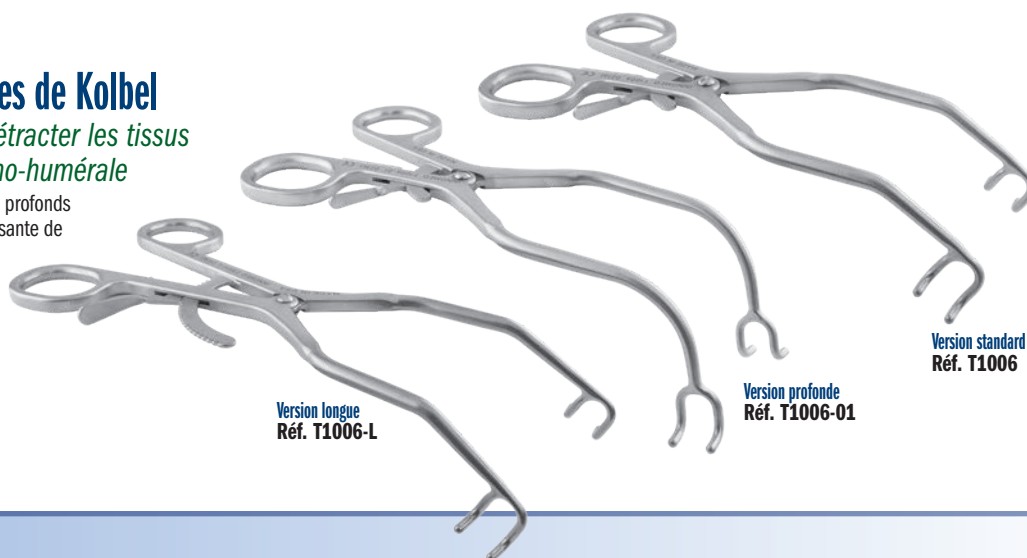

Version longue
Réf. T1006-L

Version profonde
Réf. T1006-01

Version standard
Réf. T1006

Écarteur de tissus mous modifié de Havens

Conçu par Philip Havens, Docteur en médecine

Conçu pour effectuer une rétraction dans les incisions du deltoïde fendu lors des interventions de réparation de la coiffe du rotateur en « mini open »

Les mors et les bras sont parallèles et se ferment sans laisser aucun jeu pour faciliter l'insertion dans les espaces confinés.


RÉF. DU PRODUIT :

T1006-02

Longueur totale : 19,1 cm

Largeur d'ouverture : 11,4 cm

Profondeur de la fourche : 18 mm

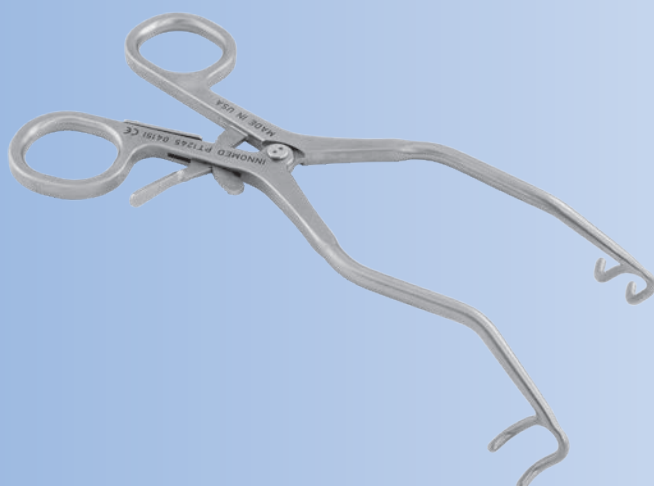

Écarteur glénoïdien autostatique de Kolbel

Lames pour l'écarteur auto statique de Kolbel

Lames larges

36 x 36 mm Réf. T1018 36 x 53 mm Réf. T1019 36 x 68 mm Réf. T1020 36 x 85 mm Réf. T1021



Lame OrthoLucent™ ▶




36 x 53 mm
Réf. T1019-R

La lame à base de fibres de carbone/ PEEK OrthoLucent™ est résistante et légère, complètement radio-transparente. Elle peut être stérilisée à la vapeur et protège les surfaces des composants contre les rayures.

Lames étroites

20 x 36 mm Réf. T1022 20 x 53 mm Réf. T1023 20 x 68 mm Réf. T1024 20 x 85 mm Réf. T1025

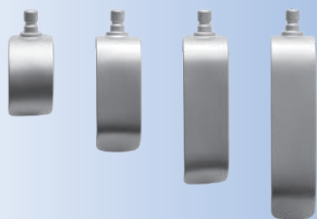

Nouveau!

La conception moletée au niveau de la partie basse des lames contribue à réduire les risques de glissement

Écarteurs autostatiques de Kolbel à lames moletées


Lames larges moletées

36 x 36 mm Réf. T1018-K 36 x 53 mm Réf. T1019-K 36 x 68 mm Réf. T1020-K 36 x 85 mm Réf. T1021-K



Lames étroites moletées

20 x 36 mm Réf. T1022-K 20 x 53 mm Réf. T1023-K 20 x 68 mm Réf. T1024-K 20 x 85 mm Réf. T1025-K

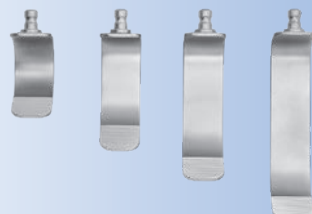

Écarteur glénoïdien auto statique avec charnière modifié de Kolbel

Deux paires de lames clipsables pivotant librement sont fournies.

RÉF. DU PRODUIT :

T1014-01 [Kit – Poignée standard]

T1014-012F [Kit – Poignée ergonomique]

Le kit inclut :

T1015-01 [Écarteur – Poignée standard]

Longueur totale : 21 cm

Longueur jusqu'à la charnière : 15,2 cm

Longueur du bras : 5,7 cm

– OU –

T1015-012F [Écarteur – Poignée ergonomique]

Longueur totale : 23,5 cm

Longueur jusqu'à la charnière : 17,8 cm

Longueur du bras : 5,7 cm

T1018-P [Paire de lames] 36 mm X 36 mm

T1019-P [Paire de lames] 36 mm X 53 mm



Kit avec
Poignée standard
Réf. T1014-01

Kit avec
Poignée ergonomique
Réf. T1014-01-2F
Poignée ergonomique Pour
améliorer la maîtrise et le confort

Écarteur glénoïdien auto statique de Kolbel

Deux paires de lames clipsables pivotant librement sont fournies.

RÉF. DU PRODUIT :

T1014 [Kit – Poignée standard]

T1014-2F [Kit – Poignée ergonomique]

Le kit inclut :

T1015 [Écarteur – Poignée standard]

Longueur totale : 21 cm

– OU –

T1015-2F [Écarteur – Poignée ergonomique]

Longueur totale : 23,5 cm

T1018-P [Paire de lames] 36 mm X 36 mm

T1019-P [Paire de lames] 36 mm X 53 mm



Kit avec
Poignée standard
Réf. T1014

Kit avec
Poignée ergonomique
Réf. T1014-2F
Poignée ergonomique Pour
améliorer la maîtrise et le confort

Écarteur glénoïdien auto statique avec lame centrale de Kolbel

La lame centrale peut être inversée pour effectuer une rétraction superficielle ou profonde

Deux paires de lames clipsables pivotant librement sont fournies.

RÉF. DU PRODUIT :

T1050 [Kit – Poignée standard]

T1050-2F [Kit – Poignée ergonomique]

Le kit inclut :

T1050-01 [Écarteur – Poignée standard]

Longueur totale : 20,3 cm

– OU –

T1015-01-2F [Écarteur – Poignée ergonomique]

Longueur totale : 22,9 cm


T1050-02 [Lame centrale]

Longueur jusqu'à l'incurvation : 15,9 cm

Profondeur : 6,4 cm

T1018-P [Paire de lames] 36 mm X 36 mm

T1019-P [Paire de lames] 36 mm X 53 mm

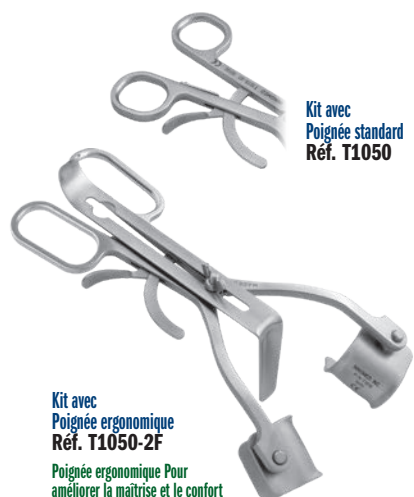

Kit avec
Poignée standard
Réf. T1050

Kit avec
Poignée ergonomique
Réf. T1050-2F
Poignée ergonomique Pour
améliorer la maîtrise et le confort

Écarteur auto statique de Kolbel

Deux paires de lames clipsables pivotant librement sont fournies.

RÉF. DU PRODUIT :

T1016 [Kit]

Le kit inclut :

T1017 [Écarteur]


Longueur totale : 21 cm

Longueur du bras : 15,6 cm


Longueur jusqu'à la charnière : 7,6 cm

T1018-P [Paire de lames] 36 mm X 36 mm

T1019-P [Paire de lames] 36 mm X 53 mm

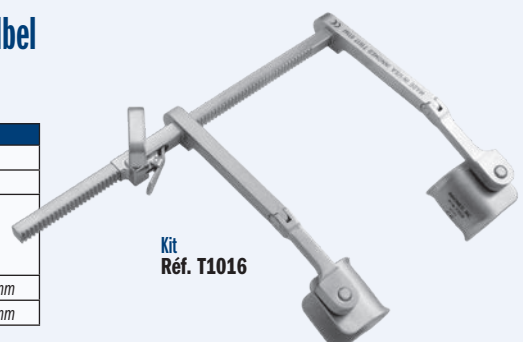

Kit
Réf. T1016

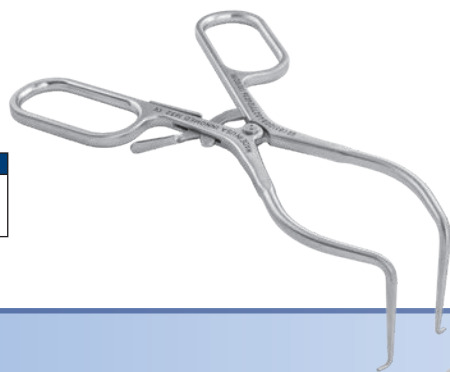RÉF. DU PRODUIT :**1652**Longueur totale : 19,1 cm
Profondeur de la lame : 5,1 cm

Écarteur sous-scapulaire à angle droit – Pointes émoussées

Conçu par Edward McFarland, Docteur en médecine

Conçu pour garder le muscle sous-scapulaire ouvert lors de la réalisation d'une approche de dissociation du sous-scapulaire de la glène

Écarteur sous-scapulaire

Pénètre profondément pour faciliter la scission du sous-scapulaire dans une manœuvre de Jobe



Il est également utilisé pour rétracter un deltoïde fendu lors des interventions de réparation de la coiffe des rotateurs en « mini open ».

RÉF. DU PRODUIT :**T1005** [Version standard]

Longueur totale : 21,3 cm

T1005-L [Version longue]


Longueur totale : 23,5 cm

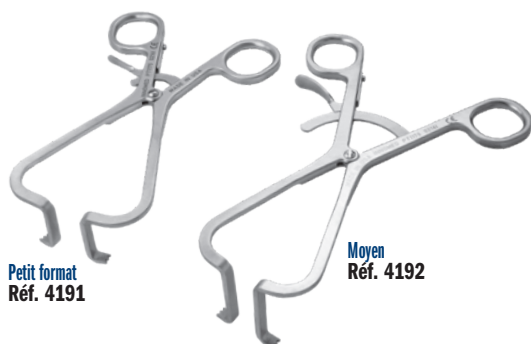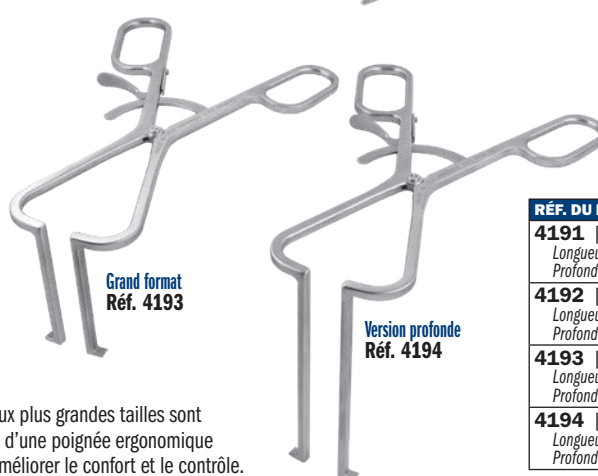Version longue
Réf. T1005-LVersion standard
Réf. T1005Petit format
Réf. 4191Moyen
Réf. 4192Grand format
Réf. 4193Version profonde
Réf. 4194**RÉF. DU PRODUIT :****4191** [Petit format]Longueur totale : 16,5 cm
Profondeur de la fourche : 3,2 cm**4192** [Moyen]Longueur totale : 18,4 cm
Profondeur de la fourche : 4,4 cm**4193** [Grand format]Longueur totale : 22,9 cm
Profondeur de la fourche : 7,6 cm**4194** [Version profonde]Longueur totale : 24,4 cm
Profondeur de la fourche : 12,7 cm

Écarteurs Gelpi plats

Conçus pour faciliter la rétraction de la partie large d'un tissu mou ou d'un muscle

Les deux plus grandes tailles sont dotées d'une poignée ergonomique pour améliorer le confort et le contrôle.

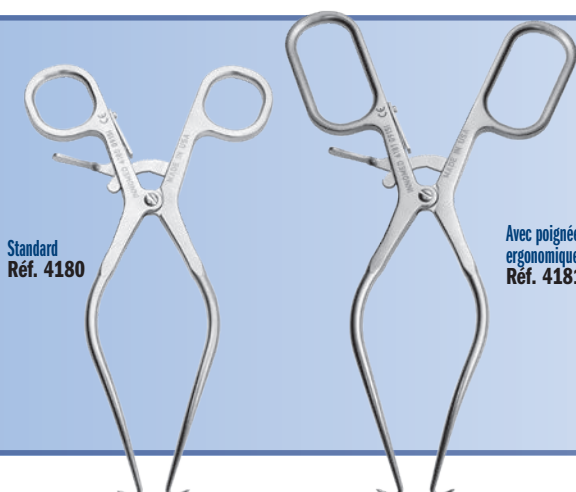Standard
Réf. 4180Avec poignée
ergonomique
Réf. 4181


Écarteurs Gelpi

RÉF. DU PRODUIT :**4180** [Standard]

Longueur totale : 19,1 cm


4181 [Avec poignée ergonomique]

Longueur totale : 19,1 cm

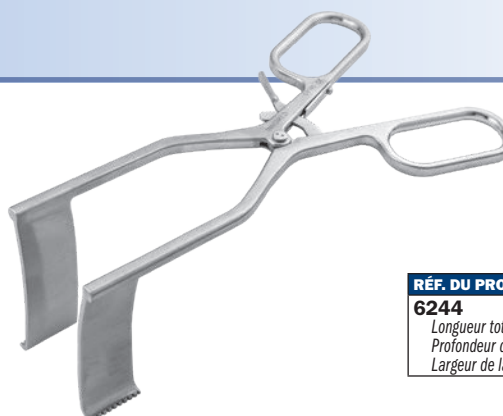**RÉF. DU PRODUIT :****6244**Longueur totale : 21,6 cm
Profondeur de la lame : 8,9 cm
Largeur de la lame : 2,54 cm

Écarteur Meyerding profond avec poignée ergonomique


Cet écarteur de tissus mous autostatique peut être utilisé lors des interventions de la hanche, du genou et de l'épaule

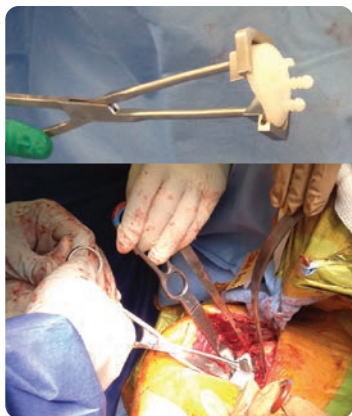

Système d'insertion glénoïdien de Burkhead

Conçu par Wayne « Buzz » Burkhead, Jr, Docteur en médecine, Michael Radon et Aaron Merges

Conçu pour faciliter l'insertion d'un composant glénoïdien

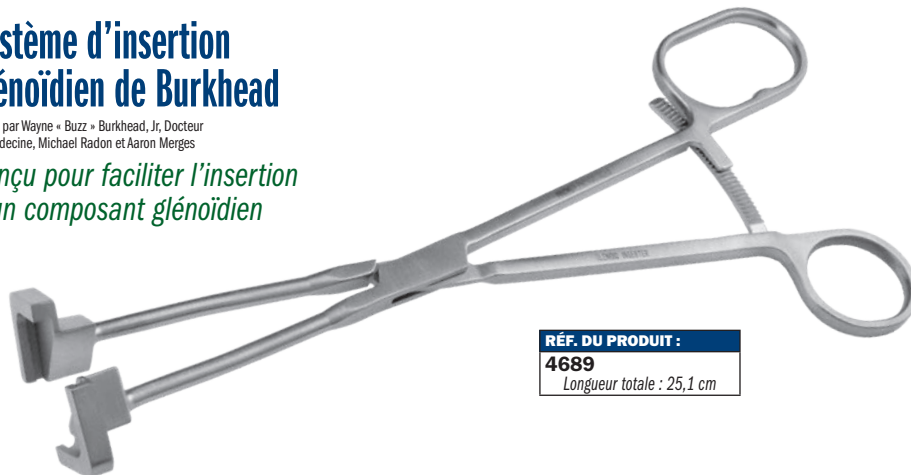

RÉF. DU PRODUIT :

4689

Longueur totale : 25,1 cm

Système d'insertion glénoïdien

Conçu par Chase Kuhn & J. Kevin Rudder, Docteurs en médecine

Conçu pour la mise en place de la prothèse glénoïdienne

Les extrémités de préhension possèdent un revêtement pour protéger les surfaces du composant contre les rayures.



RÉF. DU PRODUIT :

5076

Longueur totale : 21,6 cm



Système d'insertion avec revêtement pour les composants de la glénosphère d'épaule inversée

Conçu par Michael Radon, Ilya Voloshin, Docteurs en médecine ; et Nathan Mineo

RÉF. DU PRODUIT :

5071

Longueur totale : 24,1 cm

Angle du bras du système d'insertion : 30°



Conçu pour faciliter l'insertion des glénosphères chez les patients présentant une exposition limitée, grâce à la possibilité de les insérer par le côté. Le revêtement permet en outre de protéger les surfaces des composants contre les rayures

Plaques de protection humérales

Conçu par Ronald E. Delanois, Docteur en médecine

Permet de protéger l'humérus proximal contre le risque de fracture après une ostéotomie de la tête humérale

La plaque est placée sur l'humérus proximal après l'ostéotomie initiale de la tête humérale pour effectuer un remplacement de l'épaule totale. Protège l'humérus proximal contre le risque de fracture dans la mesure où l'humérus est rétracté pour améliorer la visualisation de la glène afin de la préparer à la mise en place de l'implant glénoïdien.

RÉF. DU PRODUIT :

5259-01 [46 mm]

5259-02 [50 mm]




50 mm

Réf. 5259-02



46 mm

Réf. 5259-01

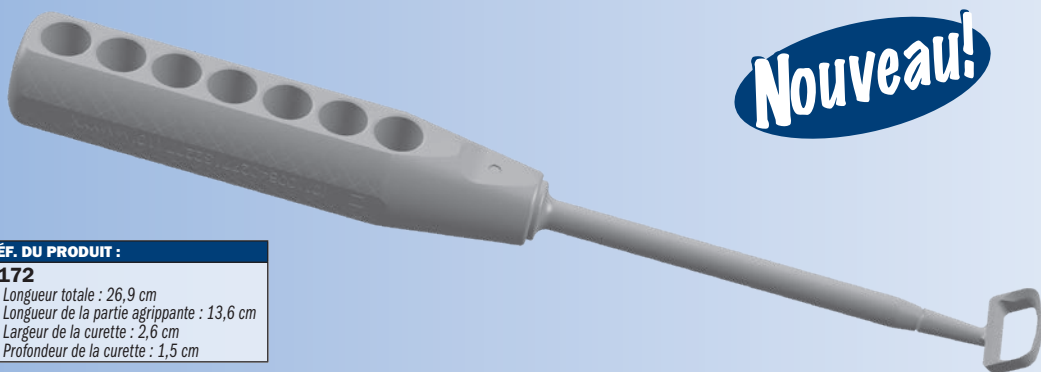

Nouveau!

Curette pour le cartilage de la glène de Lipof

Conçue par Jason Lipof, Docteur en médecine

Conçue pour faciliter le retrait uniforme du cartilage présent à la surface de la glène

RÉF. DU PRODUIT :

5172

Longueur totale : 26,9 cm
Longueur de la partie agrippante : 13,6 cm
Largeur de la curette : 2,6 cm
Profondeur de la curette : 1,5 cm

Pince de réduction de fracture à double incurvation avec système de raccord rapide

Conçue avec un système de raccord rapide et des extrémités à épaulement pour réduire les fractures osseuses

RÉF. DU PRODUIT :

1755-01

Longueur totale : 20 cm



Clamp de plaque osseuse de Stoll

Conçu par Jordan Stoll, Docteur en médecine

Conçu pour favoriser le maintien d'un os ou d'une plaque osseuse dans une position donnée afin de réaliser une réduction et une fixation

RÉF. DU PRODUIT :

1774

Longueur totale : 25,4 cm



Clamp de serrage de réduction de fracture




Conçu par Jong-Keon Oh, Docteur en médecine

Destiné à être utilisé dans des procédures spécifiques lorsqu'un serrage dans le plan vertical (ou sagittal) est requis lors de la réduction d'une fracture de l'avant-bras, de l'humérus ou de la diaphyse tibiale

RÉF. DU PRODUIT :

5072

Longueur totale : 26,7 cm
Ouverture point à point :
- Minimum 10 mm
- Maximum 35 mm
Diamètre de la broche : 3,2 mm

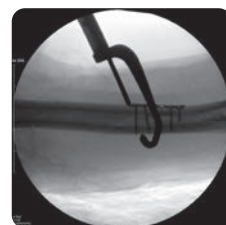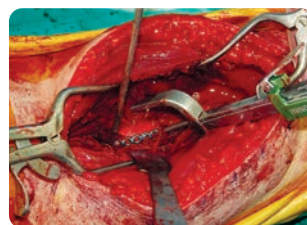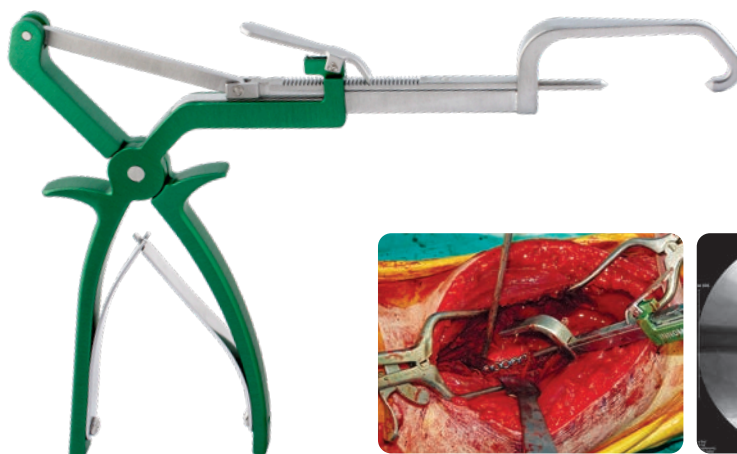

Manchon de ténodèse du biceps d'Argintar

Conçu par Evan Argintar, Docteur en médecine

Conçu pour simplifier la ténodèse sous-pectorale du biceps en « mini-open » en conservant la trajectoire de la mèche à l'aide de l'extrémité dentelée du manchon. Les trous huméraux percés sont facilement localisés avec la mise en place percutanée standard du bouton bicortical


La partie fendue située sur l'envers des manchons permet de détacher le dispositif de fixation du bouton en facilitant la réalisation d'une ténodèse du biceps en « mini-open » efficace et reproductible à l'aide de la technique du bouton.



RÉF. DU PRODUIT :

5835

Longueur totale : 10,2 cm
Diamètre externe : 6,35 mm
Diamètre interne : 5 mm
Fente : 2,75 mm

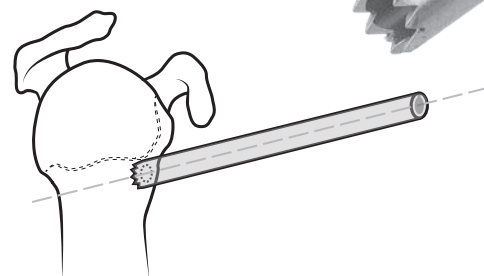

Barre transversale pour champs d'épaule de Wiater

Conçue par J. Michael Wiater, Docteur en médecine, FAAOS, FAOA

Conçue pour être utilisée lors des chirurgies de l'épaule en position assise ou pendant d'autres procédures chirurgicales pour soutenir et éloigner les champs chirurgicaux du site opératoire en préservant le champ stérile et en permettant à l'anesthésiste d'accéder facilement aux voies respiratoires

RÉF. DU PRODUIT :

2417

Longueur totale : 152,4 cm

Barre en acier inoxydable légère avec des fixations d'extrémité de chaque côté aux potences intraveineuses.



AVANT:
Barre transversale fixée à 2
potences IV



APRÈS:
Mise en place du champ pour
accéder au site opératoire




Appuie-tête de Nicholson

Conçu par Gregory Nicholson, Docteur en médecine

Offre un excellent support lors du positionnement du patient pour tous types d'interventions chirurgicales de l'épaule en position chaise longue

Conçu pour offrir une excellente exposition de l'épaule, l'appui-tête est compatible avec les tables d'opération standard qui n'ont pas été modifiées. L'appui-tête soutient le patient et facilite son positionnement pour différents types d'interventions chirurgicales de l'épaule, ouvertes et arthroscopiques en position chaise longue. Sa mise en place et son réglage sont rapides.

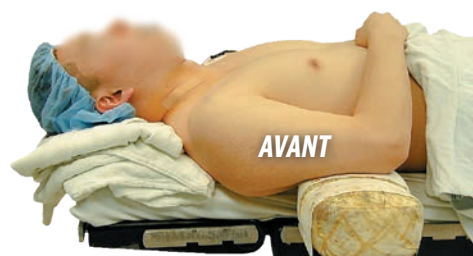

AVANT



APRÈS

RÉF. DU PRODUIT :

2450 [Appui-tête]

Dimensions de la plaque principale :

15,2 cm x 45,7 cm

Réglage du décalage du cou : 20,3 cm

Composants inclus sans le système/
Pièces de rechange :

2450-S [Bande avec coussinet
à base de gel]

4150-PD2 [Jeu de 2 coussinets]

Le kit inclut un appui-tête, une bande avec
coussinet à base de gel et deux coussinets



Décalage du cou
Réglage : 20,3 cm



Bandeau à base de gel

Kit support de bras et écarteur à griffes d'Auerbach

Conçu par David M. Auerbach, Docteur en médecine



RÉF. DU PRODUIT :

2415-00 [Kit support de bras et écarteur à griffes d'Auerbach]

Pièces de rechange vendues séparément :

2415-01 [Support de bras d'Auerbach]

Longueur totale : 50,4 cm

Dimensions du support de bras : 36,9 x 10,2 cm

Largeur totale avec les taquets : 19,1 cm

2415-02 [Tige verticale du support de bras d'Auerbach]

Longueur totale : 49,9 cm

2415-04 [Écarteur à griffes avec une chaîne d'Auerbach à 4 fourches]

Deux écarteurs sont fournis dans le kit ; un écarteur est fourni avec cette référence

Longueur totale avec la chaîne : 25,4 cm

Largeur de l'écarteur : 1,9 cm

2415-06 [Écarteur à griffes avec une chaîne d'Auerbach à 6 fourches]

Deux écarteurs sont fournis dans le kit ; un écarteur est fourni avec cette référence

Longueur totale avec la chaîne : 25,4 cm

Largeur de l'écarteur : 3,2 cm

2590-S01 [Sangle noire]

Deux écarteurs sont fournis dans le kit ; un écarteur est fourni avec cette référence

Dimensions : 2,5 x 61 cm

2595 [Clameau]


2770-P [Tapis en silicone]

Dimensions : 30,5 x 14 cm

Pièces de rechange :

2590-S [Sangles noires] Lot de 10

- Son design simple permet un positionnement facile et rapide
- Il se fixe au-dessus du champ stérile à l'aide du clameau et de la tige fournis
- Il peut être repositionné pendant l'intervention
- Les patins en caoutchouc stérilisables protègent le bras
- Les écarteurs des tissus cutanés et mous peuvent être fixés au support
- Sa forme compacte facilite son rangement

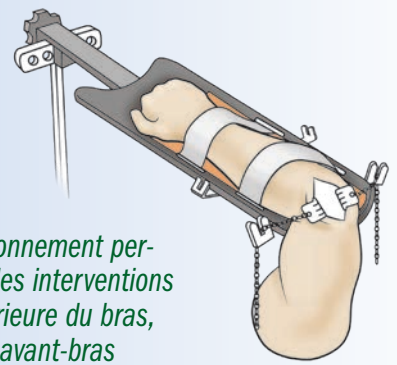

Permet un positionnement per-opératoire dans les interventions de la zone postérieure du bras, du coude et de l'avant-bras




Le kit inclut : (1) Un support de bras, (1) Une tige verticale pour le support de bras, (2) Des écarteurs avec une chaîne à 4 fourches, (2) Des écarteurs avec une chaîne à 6 fourches, (2) Des sangles noires, (1) Un tapis en silicone, et (1) Un clameau.





Plaque pour fractures de l'humérus distal

Conçu par Burk Young, Docteur en médecine

Permet au chirurgien de brocher ces fractures sans maintenir manuellement la fracture réduite. Le chirurgien peut ainsi concentrer son attention sur la mise en place précise de la broche et la réduction de la fracture. La hauteur de la barre transversale est entièrement réglable afin de s'adapter à la taille de chaque patient. La réduction est réalisée par un assistant qui va exercer une légère traction axiale sur l'avant-bras pendant que la barre transversale exercera une contre-traction. Le brochage est effectué avec le bras en C placé en position latérale. Un accessoire séparé optionnel est disponible pour soutenir le bras suite à une fracture de l'humérus distal chez les patients adultes. **Le système ne peut pas être stérilisé.**

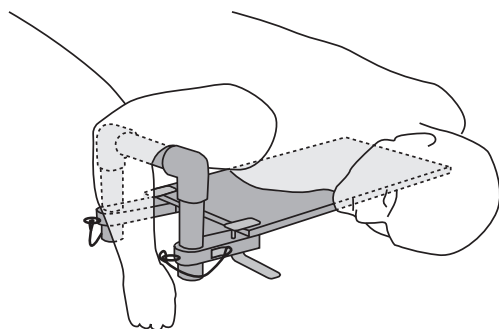

Conçue pour l'enclouage des fractures supracondyliennes chez l'enfant et des fractures de l'humérus distal chez les adultes

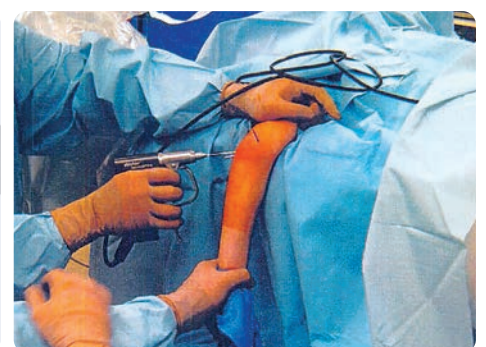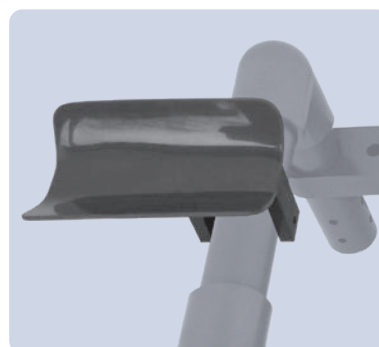

RÉF. DU PRODUIT :

2445 [Plaque pour fracture – Version pédiatrique]


Dimensions de la plaque principale : 55,8 cm x 30,5 cm

Plage de réglage en hauteur de la barre transversale : 11,4 cm à 19,1 cm

2445-01 [Plaque pour fracture – Avec système d'adaptation pour les patients adultes]

Composants optionnels/de rechange :

2445-06 [Système d'adaptation pour les patients adultes]

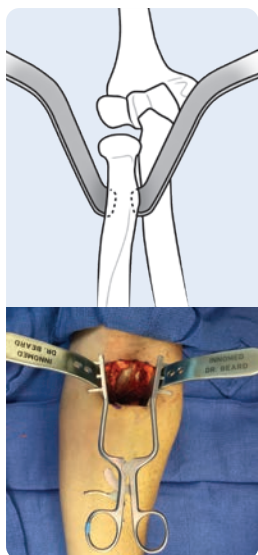

Écarteur du biceps distal de Beard

Conçu par David Beard, Docteur en médecine

Conçu pour favoriser l'optimisation de l'exposition chirurgicale lors d'une procédure de réinsertion du tendon du biceps distal via une incision antérieure

La conception de la lame possède une extrémité distale avec des contours anatomiques pour pincer le cortex du radius. L'extrémité distale lisse évite tout risque de pénétration profonde et sa largeur correspond à la largeur du site d'insertion du tendon du biceps distal. Le manche recourbé mince contribue à optimiser la zone de travail et la visualisation. Produit vendu en kit ou à l'unité à des fins de remplacement.

RÉF. DU PRODUIT :

5834-00 [Kit - Écarteur et deux lames]

Disponible à l'unité :


5834-01 [Lame] 1 lame disponible avec cette référence

Longueur totale : 16,2 cm

Largeur : 16 mm

5834-02 [Écarteur autostatique]

Longueur totale : 19,1 cm

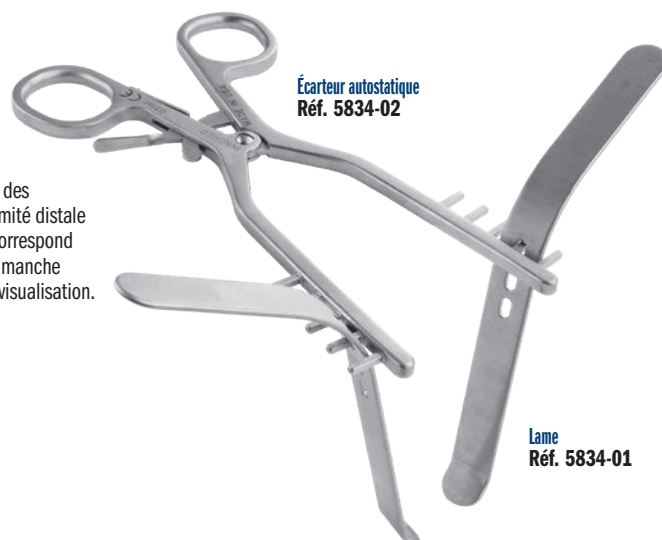

Écarteur autostatique
Réf. 5834-02

Lame
Réf. 5834-01

Forceps de réduction de l'olécrâne de Calvo

Conçu par Ignacio J. Calvo, Docteur en médecine


Conçus pour réduire et immobiliser les fractures transversales de l'olécrâne afin de faciliter l'insertion des fils de Kirschner et des bandes de tension

Cet instrument s'avère également très utile pour les fractures de la malléole.

RÉF. DU PRODUIT :

1801-L [Gauche]

1801-R [Droite]

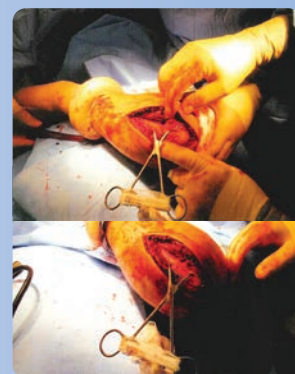

Kit pour les fractures du condyle latéral

Conçu par Carl R. Weinert, Docteur en médecine

Conçu pour les fractures du condyle latéral chez l'enfant ou l'adulte

Écarteur de coude

Conçu pour être utilisé au niveau de l'articulation du coude pour rétracter la capsule et offrir une exposition complète de la surface articulaire antérieure pour la réduction et la fixation des fractures du condyle latéral déplacé. La petite pointe mousse vient se fixer sur le condyle médian intact.

Clamp - Symétrique


Le clamp de réduction symétrique (1755) est utile pour comprimer les fractures en T du condyle ainsi que dans diverses autres applications de réduction des fractures.

Les butées présentes à chaque extrémité contribuent à éviter toute pénétration excessive des os métaphysaires et mous.



Écarteur pour coude
Réf. 4697

Clamp - Symétrique
Réf. 1755

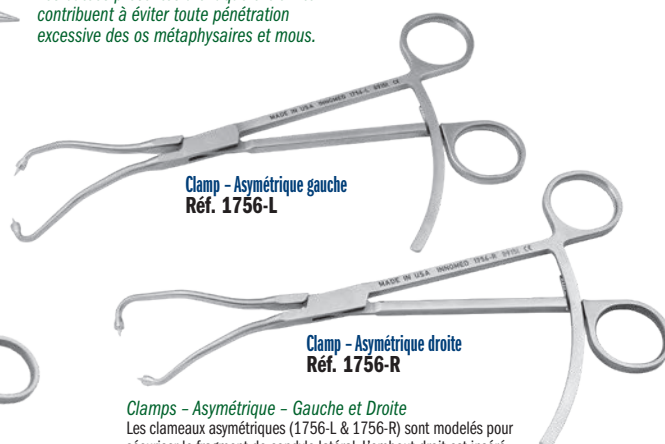

Clamp - Asymétrique gauche
Réf. 1756-L

Clamp - Asymétrique droite
Réf. 1756-R

Clamps - Asymétrique - Gauche et Droite

Les clameaux asymétriques (1756-L & 1756-R) sont modelés pour sécuriser le fragment de condyle latéral. L'embout droit est inséré dans la cavité coronoidienne et l'extrémité incurvée est utilisée pour attraper et comprimer le fragment de condyle latéral.

RÉF. DU PRODUIT :

4697-00 [Kit avec boîte]

Le kit inclut :

1755 [Clamp - Symétrique]

Longueur totale : 21,6 cm

Largeur d'ouverture du mors : 7,6 cm

1756-L [Clamp - Asymétrique gauche]

Longueur totale : 22,2 cm

1756-R [Clamp - Asymétrique droite]

Longueur totale : 22,2 cm

4697 [Écarteur pour coude]

Longueur totale : 16,5 cm

Largeur de la lame : 2,54 cm

1015 [Boîte de stérilisation]

Dimensions : 28,6 cm x 18,1 cm x 7,9 cm



Pointeau d'extraction de tige humérale de Levy

Conçu par Jonathan Levy, Docteur en médecine

La tige et l'embout de l'impacteur fabriqués en alliage de chrome-cobalt ultra résistant sont destinés à faciliter le retrait d'une tige humérale lors d'une arthroplastie de l'épaule totale de reprise

RÉF. DU PRODUIT :

8627

Longueur totale : 30,5 cm
Longueur poignée/plate-forme : 12,1 cm
Longueur de la tige du pointeau : 18,4 cm
Plate-forme : 7,6 cm x 1,9 cm
Diamètre de la tige : 8 mm, effilée à 4 mm à l'extrémité



Il peut être utilisé pour percer le manteau ou le piédestal de ciment distal lors des interventions de reprise.



Impacteur avec extrémité en forme de pied de Nicholson

Conçu par Gregory Nicholson, Docteur en médecine

Conçu pour faciliter l'extraction d'une prothèse humérale en impactant la bague médiane par le dessous après l'exposition d'un espace entre l'interface col/os

RÉF. DU PRODUIT :

5255

Taille de la partie en forme de pied : 8,5 mm x 11,5 mm
Diamètre de la tige : 8,5 mm
Longueur totale : 32,4 cm
Longueur de la poignée : 11,4 cm

L'extrémité distale en forme de pied de l'impacteur est placée sous le bord du col de la prothèse et un maillet est utilisé pour donner des coups sur la grande plate-forme proximale de l'impacteur afin de faciliter le déblocage et le retrait de la prothèse dans l'alignement de la tige.

Gouges de retrait du ciment pour l'épaule et les petits os de Nicholson

Conçu par Gregory Nicholson, Docteur en médecine

Conçues pour faciliter le retrait du ciment dans l'os de petit diamètre de l'humérus, du cubitus et dans les géométries d'implant plus petites



Gouge extra petite
Réf. 5251-05

Petite gouge
Réf. 5251-07

Gouge moyenne
Réf. 5251-09

Grande gouge
Réf. 5251-11

Petite gouge avec séparateur
Réf. 5252-07


Gouge moyenne avec séparateur
Réf. 5252-09

Grande gouge avec séparateur
Réf. 5252-11

Rétro crochet
Réf. 5254

Impacteur avec extrémité en forme de pied
Réf. 5255

- La pointe biseautée à l'envers permet à la gouge de glisser plus facilement entre l'os et le ciment
- La gouge avec séparateur en forme de T permet à la gouge de glisser entre le ciment et l'os et de scinder verticalement la couche de ciment pour faciliter le retrait
- Les largeurs et incurvations de petit diamètre sont plus adaptées à la forme des implants d'épaule et de coude et aux os de plus petits diamètres
- La longueur plus courte améliore le contrôle et l'accès
- Il permet d'extraire un implant huméral en impactant la bague médiane de la prothèse. Il contribue à fournir une force parallèle directe à l'implant afin de le retirer

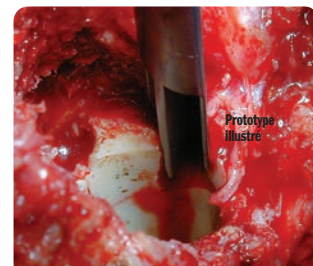

RÉF. DU PRODUIT :

Gouges Longueur totale : 22,9 cm
Gouges Longueur de la poignée : 10,2 cm

5251-00 [Kit complet avec la boîte]

5251-05 [Extra petit]
Largeur de la gouge : 5 mm

5251-07 [Petit format]
Largeur de la gouge : 7 mm

5251-09 [Moyen format]
Largeur de la gouge : 9 mm

5251-11 [Grand format]
Largeur de la gouge : 11 mm

5252-07 [Petit format avec séparateur]
Largeur de la gouge : 7 mm
Hauteur du séparateur : 4 mm

5252-09 [Format moyen avec séparateur]
Largeur de la gouge : 9 mm
Hauteur du séparateur : 5 mm

5252-11 [Grand format avec séparateur]
Largeur de la gouge : 11 mm
Hauteur du séparateur : 6 mm

5254 [Rétro crochet]
Longueur totale : 31,8 cm
Longueur de la poignée : 11,4 cm
Diamètre de la tige : 4 mm

5255 [Impacteur avec extrémité en forme de pied]
Taille de la partie en forme de pied : 8,5 mm x 11,5 mm
Diamètre de la tige : 8,5 mm
Longueur totale : 32,4 cm
Longueur de la poignée : 11,4 cm

5253 [Boîte du kit]

Gouge mini Lexer

Peut être utilisée pour retirer l'os situé au niveau des têtes de vis ou des vis cassées

RÉF. DU PRODUIT :

2022-02 [Gouge mini Lexer - 4 mm]
Longueur totale : 17,8 cm
Largeur de la gouge : 4 mm

2022-03 [Gouge mini Lexer - 6 mm]
Longueur totale : 17,8 cm
Largeur de la gouge : 6 mm

2022-04 [Gouge mini Lexer - 10 mm]
Longueur totale : 17,8 cm
Largeur de la gouge : 10 mm

Nouveau!

Gouge de 4 mm
Réf. 2022-02

Gouge de 6 mm
Réf. 2022-03

Gouge de 10 mm
Réf. 2022-04



Micro curettes

Quatre tailles de godets sont proposées pour chaque version de tige disponible (avec extrémité droite ou coudée à 45°)

Le revêtement en nitrure de titane ultra dur contribue à prolonger la durée de vie de la lame en augmentant la dureté de la surface, en prolongeant le tranchant et en résistant aux substances chimiques et à la corrosion.



Droite 6/0 Réf. 4246

Droite 4/0 Réf. 4244

Droite 1 Réf. 4240

Droite 2 Réf. 4242

Godet 6/0 Réf. 4246-01

Godet 4/0 Réf. 4244-01

Godet 1 Réf. 4240-01

Godet 2 Réf. 4242-01

RÉF. DU PRODUIT :

Micro curettes droites

Longueur totale : 24,8 cm
Longueur de la tige : 11,4 cm

4242 Taille de godet 2

4240 Taille de godet 1

4244 Taille de godet 4/0

4246 Taille de godet 6/0

Micro curettes coudées

Longueur totale : 24,8 cm
Longueur de la tige : 11,4 cm

4242-01 Taille de godet 2

4240-01 Taille de godet 1

4244-01 Taille de godet 4/0

4246-01 Taille de godet 6/0

Pointeaux osseux à crochet

Conçus par Reza Firoozabadi, Docteur en médecine

Conçus pour faciliter la manipulation des fragments osseux en vue d'une fixation

RÉF. DU PRODUIT :

5078 [Standard]
Longueur totale : 26,7 cm
Longueur de la poignée : 12,7 cm

5078-01 [Version longue]
Longueur totale : 34 cm
Longueur de la poignée : 15,2 cm

Standard
Réf. 5078

Lang
Réf. 5078-01



Utilisation du pointeau osseux à crochet standard pour gagner de la longueur afin de faciliter la réduction d'une fracture de la fibula. Un trou pilote de 2 mm est effectué pour accueillir l'extrémité du pointeau osseux.



RÉF. DU PRODUIT :

7653-00 [Jeu de trois ostéotomes avec la boîte]

7653-01 [Extracteur de vis de 1,5 mm]
Longueur totale : 15,2 cm
Largeur de la poignée : 10,2 cm

7653-02 [Extracteur de vis de 2,5 mm]
Longueur totale : 15,2 cm
Largeur de la poignée : 10,2 cm


7653-03 [Extracteur de vis de 3,5 mm]
Longueur totale : 15,2 cm
Largeur de la poignée : 10,2 cm

1025 [Boîte de stérilisation]

1,5 mm
Réf. 7653-01

2,5 mm
Réf. 7653-02

3,5 mm
Réf. 7653-03

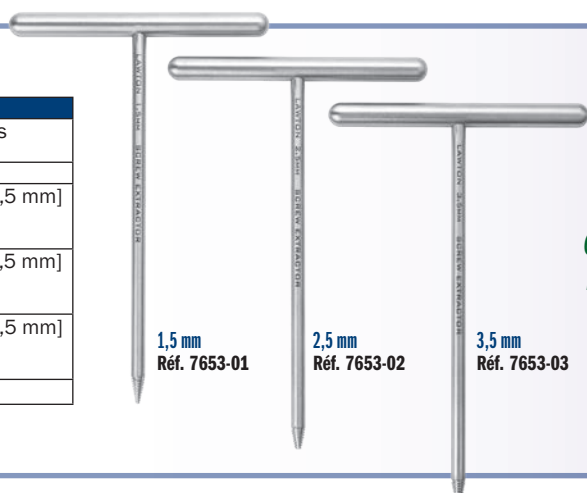

Extracteurs de vis de Lawton

Conçu par Jeffrey Lawton, Docteur en médecine

Conçus pour extraire les mini et micro fragments de vis, les petites vis creuses ou les vis dépourvues de tête



Pic de réduction de fracture

Permet d'aligner les fragments osseux et de ramasser les tissus et les fragments osseux



RÉF. DU PRODUIT :

S0129
Longueur totale : 15,9 cm



Ostéotome à curette de Desai

Conçu par Sarang Desai,
Docteur en ostéopathie

RÉF. DU PRODUIT :

5242 [8 mm]
Longueur totale : 21 cm
Longueur de la poignée : 10,8 mm
Godet : 8 x 10 mm
Largeur de l'ostéotome : 6,5 mm
Longueur de l'ostéotome : 3 mm
à partir du bord du godet

La partie ostéotome
peut également être utilisée pour
« biseauter » la surface sous-chondrale afin
d'exposer l'os vascularisé. Il est également
utile pour prélever des autogreffes en créant
une fenêtre osseuse et en retirant ensuite l'os spongieux.

Tailles de godet :
8 x 10 mm



3 mm Droite Réf. 5150



6 mm Droite Réf. 5152



8 mm Droite Réf. 5154



RÉF. DU PRODUIT :

Tige droite
Longueur totale : 22,2 cm
5150 [3 mm, version droite]
Diamètre de l'anneau : 3 mm
5152 [6 mm, version droite]
Diamètre de l'anneau : 6 mm
5154 [8 mm, version droite]
Diamètre de l'anneau : 8 mm

3 mm Coudée Réf. 5156



6 mm Coudée Réf. 5157



8 mm Coudée Réf. 5158



Curettes à anneau

RÉF. DU PRODUIT :

Tige coudée
Longueur totale : 21,9 cm
5156 [3 mm, version coudée]
Diamètre de l'anneau : 3 mm
5157 [6 mm, version coudée]
Diamètre de l'anneau : 6 mm
5158 [8 mm, version coudée]
Diamètre de l'anneau : 8 mm

Mini burins orthopédiques

Mini burins orthopédiques disponibles en versions droite
et décalée dotés de poignées droites et ergonomiques

1 mm Burin décalé Réf. 1169-1
2 mm Burin décalé Réf. 1169-2
3 mm Burin décalé Réf. 1169-3
4 mm Burin décalé Réf. 1169-4
5 mm Burin décalé Réf. 1169-5



3 mm Burin droit Réf. 1170-3
4 mm Burin droit Réf. 1170-4
5 mm Burin droit Réf. 1170-5



RÉF. DU PRODUIT :

Burins décalés	Burins droits
Longueur totale : 15,9 cm	Longueur totale : 16,3 cm
1169-1 [1 mm] Largeur du burin : 1 mm	1170-3 [3 mm] Largeur du burin : 3 mm
1169-2 [2 mm] Largeur du burin : 2 mm	1170-4 [4 mm] Largeur du burin : 4 mm
1169-3 [3 mm] Largeur du burin : 3 mm	1170-5 [5 mm] Largeur du burin : 5 mm
1169-4 [4 mm] Largeur du burin : 4 mm	
1169-5 [5 mm] Largeur du burin : 5 mm	

Mini gouges orthopédiques

2 mm Réf. 1168-2
3 mm Réf. 1168-3
4 mm Réf. 1168-4
5 mm Réf. 1168-5
6 mm Réf. 1168-6
7 mm Réf. 1168-7
8 mm Réf. 1168-8



Mini gouges orthopédiques
dotées de poignées ergonomiques conçues pour la
résection osseuse dans les espaces confinés et pour la résection du périoste

RÉF. DU PRODUIT :

Longueur totale : 14,6 cm	
1168-2 [2 mm] Largeur de la gouge : 2 mm	
1168-3 [3 mm] Largeur de la gouge : 3 mm	1168-6 [6 mm] Largeur de la gouge : 6 mm
1168-4 [4 mm] Largeur de la gouge : 4 mm	1168-7 [7 mm] Largeur de la gouge : 7 mm
1168-5 [5 mm] Largeur de la gouge : 5 mm	1168-8 [8 mm] Largeur de la gouge : 8 mm

Dodson Adson Rongeur

Conçu par Mark A. Dodson, Docteur en médecine

Conçu pour faciliter le retrait des tissus ou des os dans les zones confinées. Il s'apparente à une pince d'Adson avec une extrémité « mordante »

RÉF. DU PRODUIT :

1156

Longueur totale : 12 cm

Mordant de l'extrémité en forme de cuvette : 3,5 x 4,5 mm

Nouveau!



Forceps de réduction des petits os de Rudisill



Conçu par Ed Rudisill, Docteur en médecine

Permet de réduire les fractures des phalanges de la main et du métacarpe

RÉF. DU PRODUIT :

2017

Longueur totale : 12,4 cm

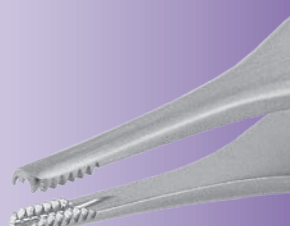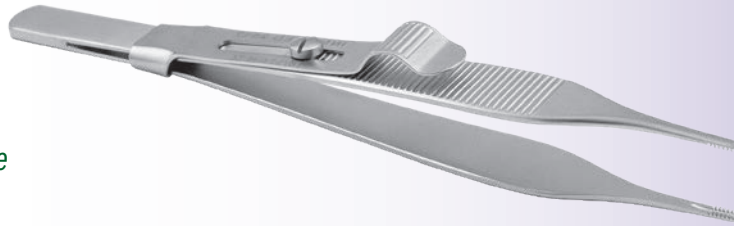

Pince d'impaction/de greffe osseuse de Faillace

Conçu par John J. Faillace, Docteur en médecine, FAOS


Les longues rainures verticales présentes au niveau de l'extrémité de l'instrument sont destinées à fournir le greffon dans un espace restreint où un élévateur Freer peut être utilisé pour enfoncer le greffon dans la zone prévue. L'extrémité plate fermée peut ensuite être utilisée pour tasser le greffon.

RÉF. DU PRODUIT :

5011

Longueur totale : 12,7 cm

Diamètre de l'extrémité en position fermée : 3,2 mm

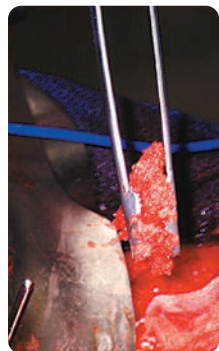


Une fois le greffon mis en place, la pince peut être fermée et transformer ainsi les extrémités en pointeau d'impaction

Pinces universelles d'impaction/de greffons osseux

Conçu par J. A. Amis, Docteur en médecine

Instrument conçu avec des extrémités agrippantes pour déplacer le greffon osseux. Une fois le greffon mis en place, la pince peut être fermée et transformer ainsi les extrémités en pointeau d'impaction. L'extrémité de la pince constitue la plate-forme de frappe pour marteler et impacter le greffon. Quatre diamètres d'extrémité sont disponibles dans deux longueurs.

3 mm Version courte Réf. 5010-01
5 mm Version courte Réf. 5010-02
6,5 mm Version courte Réf. 5010-03
8 mm Version courte Réf. 5010-04

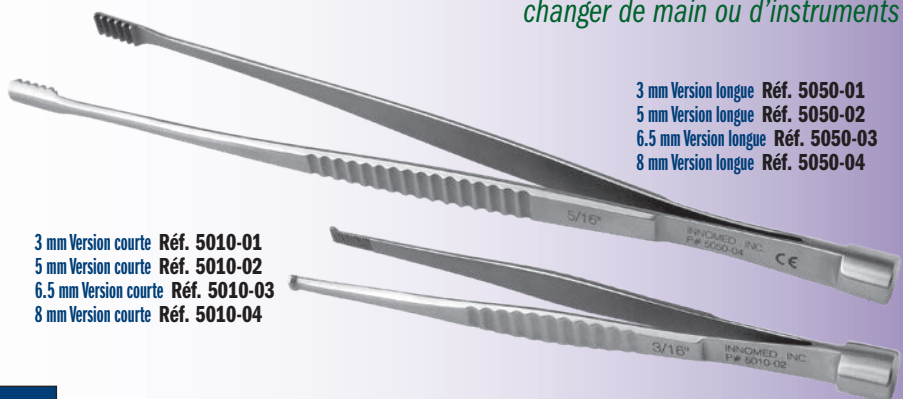

Les greffons osseux peuvent être saisis, mis en place et impactés sans changer de main ou d'instruments

3 mm Version longue Réf. 5050-01
5 mm Version longue Réf. 5050-02
6,5 mm Version longue Réf. 5050-03
8 mm Version longue Réf. 5050-04

RÉF. DU PRODUIT :

Version courte : 15,2 cm de long

5010-01 Diamètre d'extrémité de 3,2 mm

5010-02 Diamètre d'extrémité de 4,8 mm

5010-03 Diamètre d'extrémité de 6,3 mm

5010-04 Diamètre d'extrémité de 8 mm

Version longue : 25,4 cm de long

5050-01 Diamètre d'extrémité de 3,2 mm


5050-02 Diamètre d'extrémité de 4,8 mm

5050-03 Diamètre d'extrémité de 6,3 mm

5050-04 Diamètre d'extrémité de 8 mm



3 mm 5 mm 6,5 mm 8 mm
Diamètres d'extrémité à la taille réelle (pinces fermées)

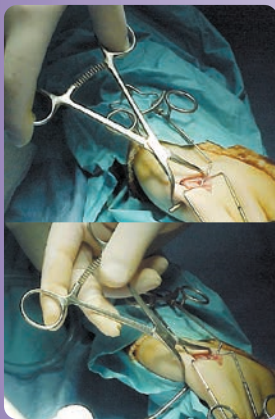

Clamp à aiguille percutanée de Redler

Conçu par M.R. Redler, Docteur en médecine

Maintient un petit os en apposition pendant le brochage percutané d'une fracture

Conçu avec un tube à aiguille proximal avec des dents. Le tube guide l'aiguille et les dents contribuent à maintenir le tube en place dans l'os. L'extrémité distale est utilisée pour contrôler le fragment osseux. Inclut un cliquet long pour effectuer un verrouillage sur diverses tailles d'os allant de 1 mm à 14 mm. Il s'avère également utile pendant l'insertion de fils-guides de vis perforées.

RÉF. DU PRODUIT :

Longueur totale : 12,7 cm	
1810-35	Diamètre du tube : 0,9 mm
1810-45	Diamètre du tube : 1,1 mm
1810-62	Diamètre du tube : 1,6 mm



Clamp d'aiguille de Chang

Conçu par Win Chang, Docteur en médecine

Conçu pour insérer de manière précise les aiguilles afin de réaliser une fixation interne

Utilisé pour les petits os, le clamp permet d'insérer les aiguilles en vue de réaliser une fixation interne. La canule possède un diamètre interne de 1,8 mm.

RÉF. DU PRODUIT :

1760-01
Diamètre interne de la canule : 1,8 mm
Longueur totale : 15,2 cm
Ouverture du cliquet de verrouillage : 25 mm



Clamp de fixation d'ostéotomie de Ludloff/Mau

Conçu par A. Austin

Utilisé après une correction d'hallux valgus latéral du métatarsien, le clamp permet d'effectuer une fixation de l'ostéotomie et de la vis perforée guide le sens du fil

Le clamp fixe l'ostéotomie afin de conserver la correction et le guide-fil de Kirschner perforé incliné à 15° permet au chirurgien de mettre le guide-fil de la vis canulée perpendiculairement à l'ostéotomie en vue de la fixation finale de l'ostéotomie.



RÉF. DU PRODUIT :

1812
Diamètre de la canule : 1,1 mm
Longueur totale : 12,7 cm

Clamp malléolaire médial avec guide-fil de Teurlings

Conçu par Luc Teurlings, Docteur en médecine

Contribue à stabiliser le fragment malléolaire médial pendant une fixation interne

RÉF. DU PRODUIT :

1803
Diamètre de la canule : 1,6 mm
Longueur totale : 13,3 cm



Clamp à os de O'Brien

Conçu par Todd O'Brien, Docteur en médecine pédiatrique

Conçu pour stabiliser une fracture ou une ostéotomie

RÉF. DU PRODUIT :

1816

Longueur totale : 13,3 cm



RÉF. DU PRODUIT :

1815-R

Longueur totale : 13,3 cm

Clamp à os OrthoLucent de O'Brien

Conçu par Todd O'Brien, Docteur en médecine pédiatrique

Conçu pour stabiliser une fracture ou une ostéotomie

Instrument à base de fibres de carbone/PEEK résistantes et légères, complètement radio-transparent. Il peut être stérilisé à la vapeur et protège les surfaces des composants contre les rayures.

Clamp pour os extra petite de Faillace

Conçu par John J. Faillace, Docteur en médecine


Allie délicatesse pour les métacarpiens et résistance pour le radius distal et les os plus gros grâce à son cliquet extra lon

RÉF. DU PRODUIT :

1171

Longueur totale : 12,7 cm

Longueur du mors : 2,5 cm

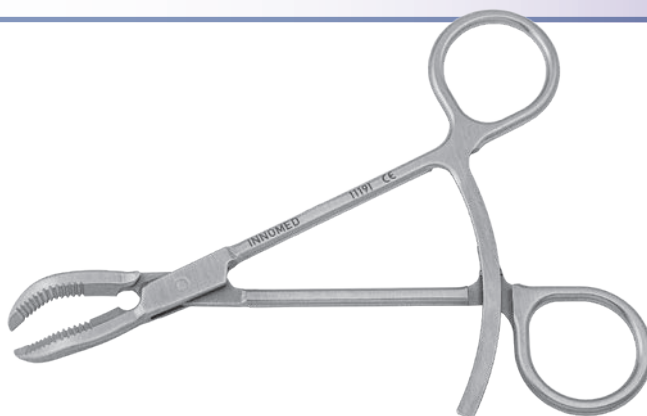

Pince de maintien des petits os à long cliquet

Conçue pour stabiliser une fracture ou une ostéotomie

RÉF. DU PRODUIT :

1170

Longueur totale : 14,6 cm



Petit clamp à os de Lewin

RÉF. DU PRODUIT :

4685

Longueur totale : 12,7 cm





Clamp de réduction des fractures de Jones de Desai



Conçu par Sarang Desai, Docteur en ostéopathie

Conçu pour réduire et conserver la réduction des fractures de Jones en évitant tout risque de distraction et/ou de rotation pendant la mise en place ultérieure du fil, du taraud et des vis


Deux orifices pour broches de Kirschner sont présents au niveau de son extrémité distale afin de le placer au niveau du 5ème métatarse distal et le clamp à 2 fourches au niveau de l'extrémité proximale vient se placer sur la tubérosité, permettant ainsi un positionnement de la vis « en hauteur et à l'intérieur » sans interférences.



RÉF. DU PRODUIT :
1802
Longueur totale : 15,2 cm
Longueur du bloc de fils : 20 mm
Espace entre les trous : 5 mm au milieu

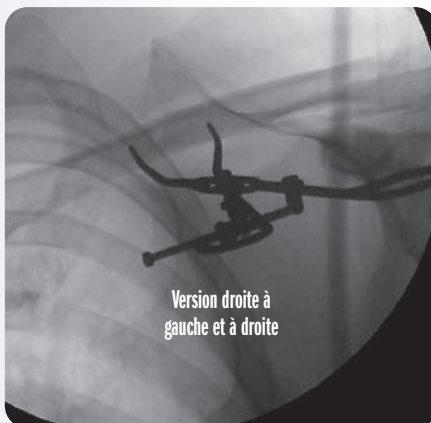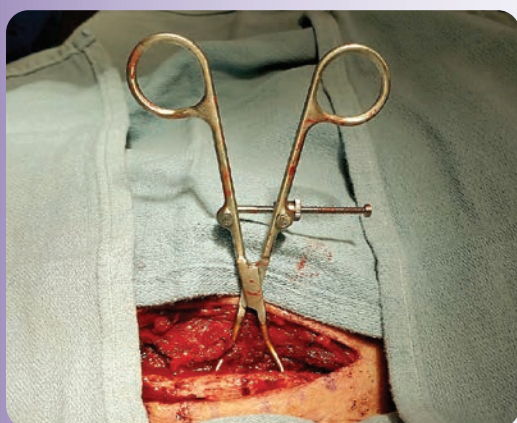

Version droite à gauche et à droite

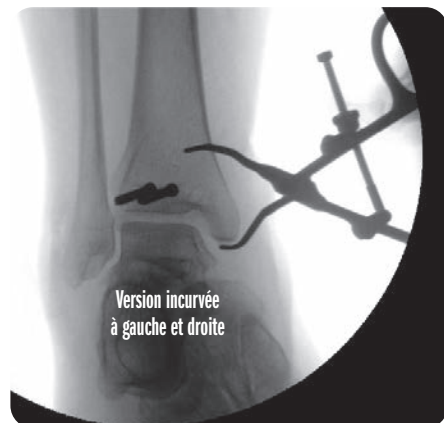

Version incurvée à gauche et à droite

Clamps de réduction des fractures pointus

Conçus par Reza Firoozabadi, Docteur en médecine, MA

Jeu polyvalent de clamps de réduction des fractures bénéficiant d'une conception spécifique à fourchons permettant une mise en place appropriée du vecteur afin d'obtenir une réduction anatomique pour différents types de fractures



Version Petit à verrouillage rapide

Version droite à gauche et à droite Réf. 3666
Version incurvée à gauche et à droite Réf. 3667
Version incurvée à gauche et droite à droite Réf. 3666-L
Version droite à gauche et incurvée à droite Réf. 3666-R



Version Moyen à verrouillage rapide

Version droite à gauche et à droite Réf. 3666-01
Version incurvée à gauche et à droite Réf. 3667-01
Version incurvée à gauche et droite à droite Réf. 3666-L-01
Version droite à gauche et incurvée à droite Réf. 3666-R-01



Version Petit à cliquet

Version droite à gauche et à droite Réf. 3668
Version incurvée à gauche et à droite Réf. 3669
Version incurvée à gauche et droite à droite Réf. 3668-L
Version droite à gauche et incurvée à droite Réf. 3668-R

Deux modèles (à verrouillage rapide et à cliquet)
avec quatre configurations de fourchons disponibles



Version droite à gauche et à droite



Version incurvée à gauche et à droite



Version incurvée à gauche et droite à droite



Version droite à gauche et incurvée à droite

- ▶ Les fourchons de 1,9 mm garantissent un emboîtement correct dans les trous de mèche de 2 mm
- ▶ Les fourchons sont coudés pour éviter tout risque de glissement du clamp suite à la compression
- ▶ Les fourchons droits peuvent être insérés en profondeur dans l'os pour effectuer une compression du cortex éloigné

- ▶ Exemples d'applications : fractures transversales (clamp droit-droit), fractures des deux os de l'avant-bras, fractures de l'olécrâne, fractures de la malléole médiale, etc.
- ▶ Version à verrouillage rapide : La longue vis permet à l'écrou de pivoter et élargit la plage d'utilisation du clamp et le raccord ouvert pivote pour offrir une plage d'ouverture accrue et permettre également une libération rapide

RÉF. DU PRODUIT :	
PETIT AVEC LE MÉCANISME À VERROUILLAGE RAPIDE	
Longueur totale : 14 cm	
3666	[Version droite à gauche et à droite]
3667	[Version incurvée à gauche et à droite]
3666-L	[Version incurvée à gauche et droite à droite]
3666-R	[Version droite à gauche et incurvée à droite]
PETIT AVEC LE MÉCANISME À CLIQUET	
Longueur totale : 14 cm	
3668	[Version droite à gauche et à droite]
3669	[Version incurvée à gauche et à droite]
3668-L	[Version incurvée à gauche et droite à droite]
3668-R	[Version droite à gauche et incurvée à droite]
MOYEN AVEC LE MÉCANISME À VERROUILLAGE RAPIDE	
Longueur totale : 17,8 cm	
3666-01	[Version droite à gauche et à droite]
3667-01	[Version incurvée à gauche et à droite]
3666-L-01	[Version incurvée à gauche et droite à droite]
3666-R-01	[Version droite à gauche et incurvée à droite]

Pincers de réduction pour doigts/bras OrthoLucent™


Conçu par Emad Aboujaoude, MS, MPAS, PA-C

Pincers radio-transparents destinées à stabiliser les fractures des doigts/de la main pendant la réalisation de radiographies ou de l'insertion de broches

RÉF. DU PRODUIT :

1383

Dimensions : 16,8 cm x 12,3 cm x 0,95 cm

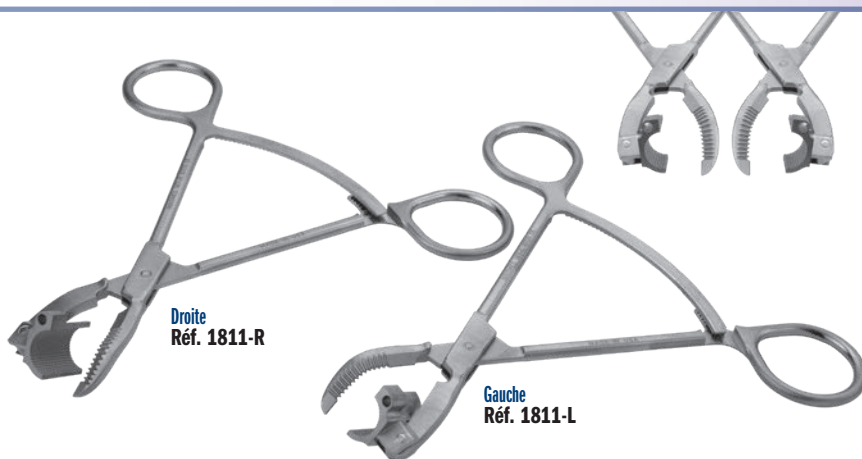

Clamps pour petits os articulés de Stanton

Conçu par John L. Stanton, Docteur en médecine

RÉF. DU PRODUIT :

1811-00 [Jeu de clamps gauche et droite]

Composants également disponibles à l'unité :

1811-L [Gauche]

Longueur totale : 13 cm

Rayon de la plaque incurvée : 5 mm

Trou pour des broches mesurant jusqu'à : 2,4 mm


1811-R [Droite]

Longueur totale : 13 cm

Rayon de la plaque incurvée : 5 mm

Trou pour des broches mesurant jusqu'à : 2,4 mm

Les clamps opposés facilitent la manipulation des extrémités de la fracture

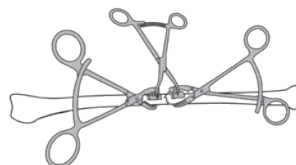

Le petit tube permet d'utiliser un clamp capitonné pour comprimer la non-consolidation et la réduction de l'ostéotomie lors d'une fixation. Il permet en outre d'utiliser des écarteurs Gelpi pour distraire les non-consolidations lors d'une intervention de reprise.




Forceps de réduction des petits os de Bush

Conçu par Andrew P. Bush, Docteur en médecine

Conçus pour favoriser le maintien d'un petit os ou d'une plaque osseuse dans une position donnée à des fins de réduction et de fixation

Angle d'ouverture de 13 mm environ.

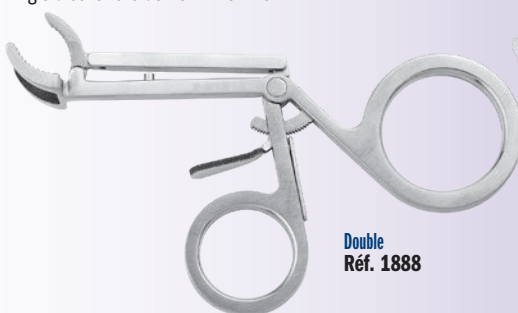

RÉF. DU PRODUIT :

1888 [Double]

Longueur totale : 11,4 cm

Largeur du mors : 17,7 mm

1889 [Simple]

Longueur totale : 11,4 cm

Largeur du mors : 3,7 mm

Clamp de fracture malléolaire médiale de Calvo

Conçu par Ignacio J. Calvo, Docteur en médecine

Conçu pour réduire et immobiliser une fracture de la malléole médiale déplacée

Cet instrument s'avère également très utile pour les fractures de la malléole.



RÉF. DU PRODUIT :

1801-L [Gauche]


1801-R [Droite]



Forceps de réparation du tendon d'Achille par voie percutanée

POUR LES RÉPARATIONS DU TENDON D'ACHILLE PAR VOIE OUVERTE LIMITÉE

Conçu pour améliorer la précision lors de la réparation percutanée des ruptures du tendon d'Achille

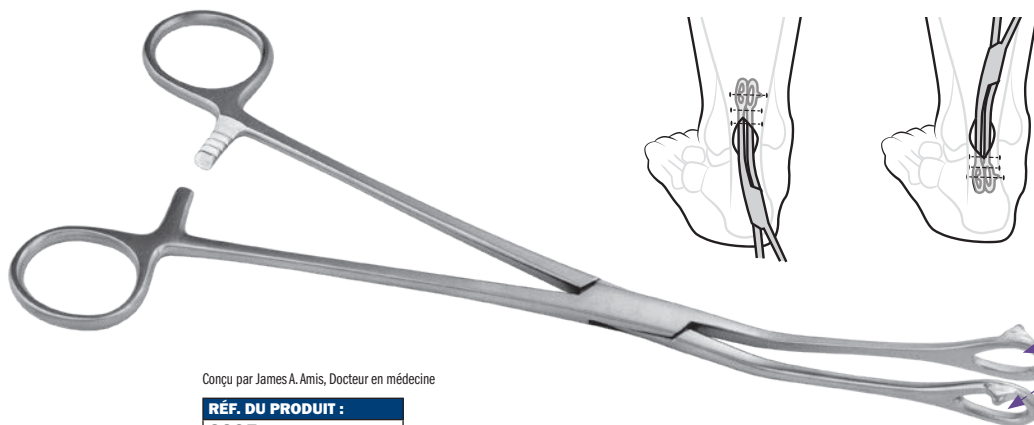

Conçu par James A. Amis, Docteur en médecine

RÉF. DU PRODUIT :

8235

Longueur totale : 24,4 cm

Ergot latéral

Les ergots situés sur le bord latéral de chaque anneau permettent aux chirurgiens de déterminer par palpation le centre précis de l'anneau, de l'extrémité proximale à l'extrémité distale, et d'insérer une aiguille juste en dessous (patient en position couchée) ou avant les ergots pour le point de départ, et de viser juste en-dessous des ergots sur le côté opposé.

Clamps de fragments osseux/malléolaires médiaux

Conçu par Edward L. Scamberg, Docteur en médecine



RÉF. DU PRODUIT :

1830 [Standard]

Longueur totale : 14 cm

Longueur de l'extrémité du clamp : 2,54 cm

1835 [Moyen]

Longueur totale : 15,2 cm

Longueur de l'extrémité du clamp : 5,1 cm

1840 [Grand]

Longueur totale : 20,3 cm

Longueur de l'extrémité du clamp : 7,6 cm



Clamp doté d'un dispositif de serrage rapide et d'un profil surbaissé de libération avec des possibilités de réglage illimitées

Kit de clamp de réduction à cliquet

Conçu par Michael Craig, OPA-C

Conçu comme un clamp de réduction des fractures avec préservation des tissus mous

RÉF. DU PRODUIT :

3840-00 [Kit du clamp]

Composants également disponibles à l'unité :

3840-02 [Pointe plane]

Gesamtlänge: 2,54 cm

3840-03 [Pointe en forme de vis]

Gesamtlänge: 2,2 cm

3840-04 [Pointe percutanée]

Deux écarteurs sont fournis dans le kit ; un écarteur est fourni avec cette référence

Longueur totale : 2,54 cm

3840-MA [Bras mobile de réduction à cliquet Avec molette à cliquet]


Longueur totale : 16,5 cm

3840-SA [Bras fixe de réduction à cliquet]

Longueur totale : 26,7 cm

Largeur : 22,9 cm

Hauteur : 15,2 cm

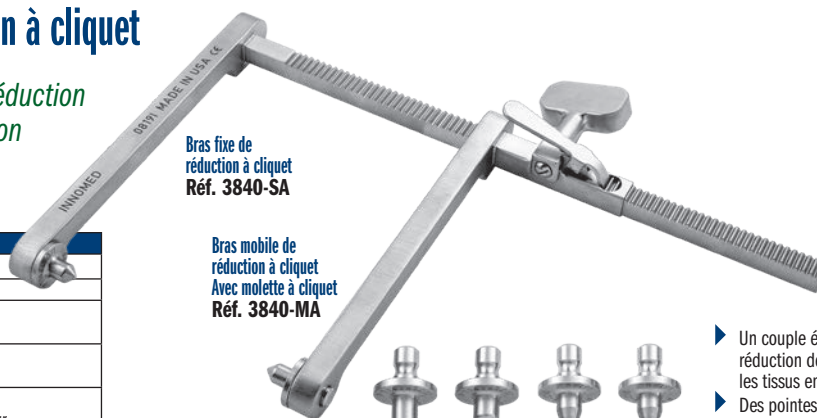

Bras fixe de réduction à cliquet
Réf. 3840-SA


Bras mobile de réduction à cliquet
Avec molette à cliquet
Réf. 3840-MA

Pointe plane
Réf. 3840-02

Pointe en forme de vis
Réf. 3840-03

Pointe percutanée
Réf. 3840-04
(Each)

Le kit inclut :
(1) bras fixe de réduction à cliquet, (1) bras mobile de réduction à cliquet avec une molette à cliquet, (1) pointe plane, (1) pointe en forme de vis, et (2) pointes percutanées

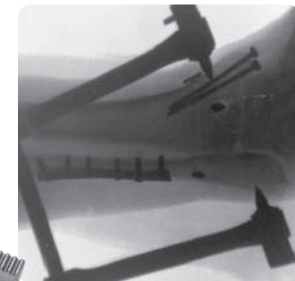

- ▶ Un couple élevé peut contribuer à fournir une réduction de l'os et de l'articulation sans comprimer les tissus environnants
- ▶ Des pointes pivotantes sont placées sur l'os, la plaque ou la vis et le cadran à cliquet est pivoté sur le couple voulu afin de libérer les mains du chirurgien
- ▶ La pointe pivotante permet de déplacer facilement le clamp à partir d'une radiographie sans compromettre la réduction
- ▶ La pointe en forme de vis peut être insérée dans une tête de vis
- ▶ La pointe plane peut être insérée dans un trou de plaque de 3,5 mm

Clamp à os/de plaque surbaissé de Chen

Conçu par Franklin Chen, Docteur en médecine

Conçu pour le clampage des os et des plaques dans diverses fractures des membres inférieurs et supérieurs



Utile pour les fractures diaphysaires des os de l'avant-bras, les fractures de l'humérus et les fractures du radius distal.

RÉF. DU PRODUIT :

1639

Longueur totale : 7 cm


Profondeur de la fourche : 1,7 cm

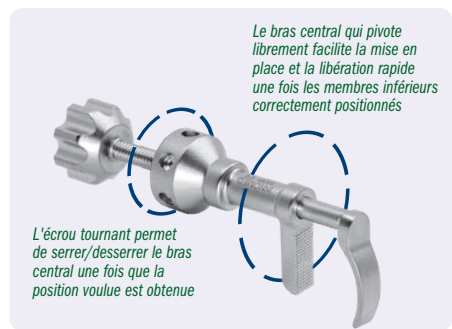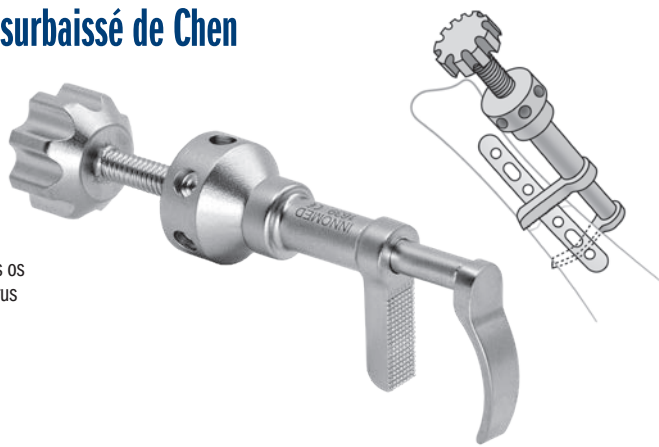

Clamp à os Allis de Resnick

Conçu par Charles T. Resnick, Docteur en médecine

Clamp à os Allis classique doté d'un cliquet plus long offrant une largeur d'ouverture plus grande pour permettre de fixer et de verrouiller un os

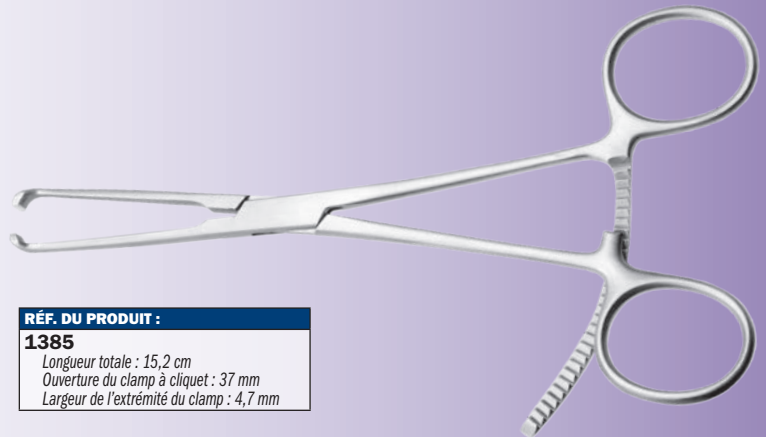

RÉF. DU PRODUIT :

1385

Longueur totale : 15,2 cm

Ouverture du clamp à cliquet : 37 mm

Largeur de l'extrémité du clamp : 4,7 mm

Clamp à os Allis avec revêtement

Modification de la conception réalisée par Charles T. Resnick, Docteur en médecine

Clamp à os Allis classique doté d'un cliquet plus long offrant une largeur d'ouverture plus grande pour permettre de fixer et de verrouiller un os et une plaque et d'une extrémité revêtue afin de protéger la surface du composant contre les rayures

RÉF. DU PRODUIT :

1381 [Revêtement à une extrémité]



Longueur totale : 15,9 cm

Ouverture du clamp à cliquet : 35 mm

1382 [Revêtement sur les deux extrémités]

Longueur totale : 15,9 cm

Ouverture du clamp à cliquet : 35 mm

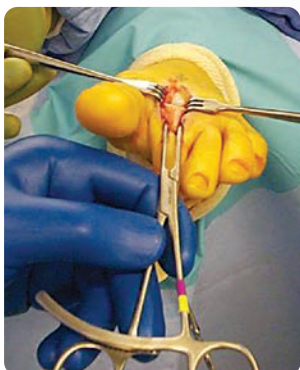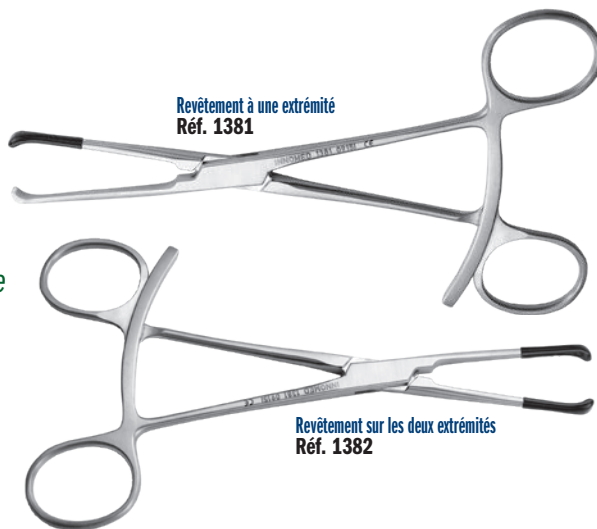

Forceps phalangien de Slavitt

Jerome Slavitt, Docteur en médecine podiatrique

Conçu pour permettre au chirurgien de fournir une distraction et une stabilité articulaire pendant le placement de l'articulation à la base de la phalange proximale des doigts les plus petits

Permet de distraire l'articulation et de maintenir l'os en améliorant l'accès à la base. Il peut également être utilisé pour les fusions des doigts afin d'améliorer le maintien des os pour les applications de perçage et de découpe.



RÉF. DU PRODUIT :

1163

Longueur totale : 15,2 cm

Diamètre d'ouverture interne du clamp : 4 mm



Nouveau!

RÉF. DU PRODUIT :
1748
Longueur totale : 19,1 cm



Clamp de maintien d'os de Chandran avec deux tiges de réduction osseuse

Conçu par Rama E. Chandran, Docteur en médecine

Conçu pour maintenir une fracture afin de la réduire


Cet instrument est particulièrement utile en cas de déplacement de la fracture.



Clamp pour os du poignet de Redler avec guide-fil

Conçu par M.R. Redler, Docteur en médecine

Conçu pour maintenir les fragments osseux en vue d'insérer des guide-fils

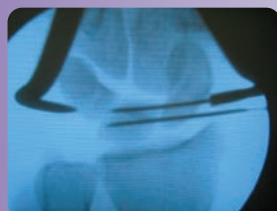

RÉF. DU PRODUIT :

1885-45

Pour des broches mesurant jusqu'à 1,1 mm

Longueur totale : 24,1 cm


Largeur d'ouverture du mors : 8,9 cm

1885-62

Pour des broches mesurant jusqu'à 1,6 mm

Longueur totale : 24,1 cm

Largeur d'ouverture du mors : 8,9 cm

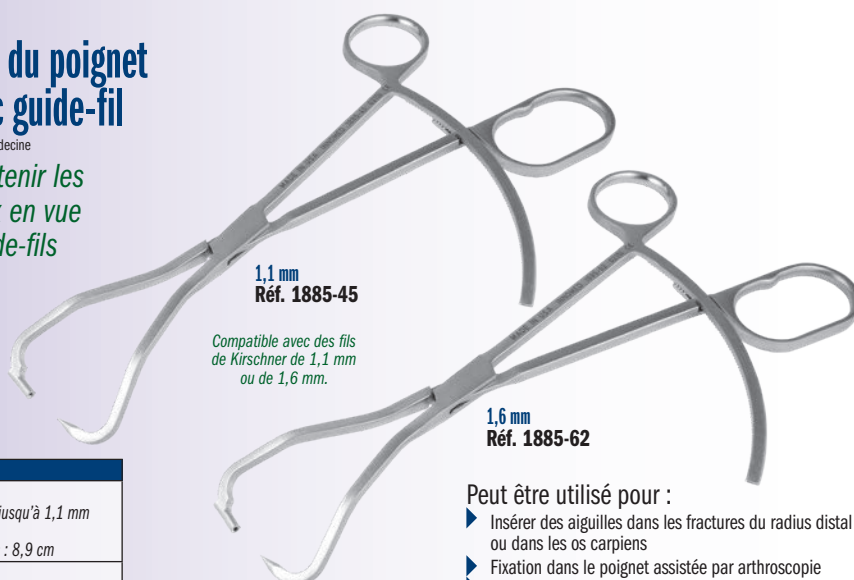


1,1 mm
Réf. 1885-45

Compatible avec des fils de Kirschner de 1,1 mm ou de 1,6 mm.

1,6 mm
Réf. 1885-62

Peut être utilisé pour :

- ▶ Insérer des aiguilles dans les fractures du radius distal ou dans les os carpiens
- ▶ Fixation dans le poignet assistée par arthroscopie
- ▶ Fracture des fragments au niveau du coude
- ▶ Mise en place des guide-fils lors d'une réduction ouverte et d'une fixation interne d'une fracture de la rotule

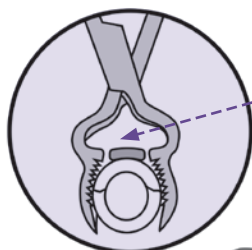

La grande fenêtre située juste au-dessus du mors elle permet d'insérer une plaque osseuse en la faisant glisser sans retirer le clamp.

Clamp de réduction osseuse de Durham

Conçu par Alfred A. Durham, Docteur en médecine

Permet l'application d'une plaque osseuse sans retirer le clamp osseux sur les os de taille moyenne comme le péroné, le cubitus et le radius



RÉF. DU PRODUIT :
3652
Longueur totale : 18,7 cm

Écarteur pour avant-bras à lame pivotante de Wurapa

Conçu par Raymond Wurapa, Docteur en médecine

Conçu pour exposer les fractures de l'avant-bras et du poignet. Les lames pivotantes soulagent les contraintes exercées sur les tissus mous.

La technologie de lame pivotante favorise le déploiement parallèle des lames de l'écarteur afin d'optimiser l'exposition de la plaie et de réduire la tension exercée sur les tissus mous. Le déploiement parallèle des lames de l'écarteur contribue également à éviter tout risque de rotation et de migration de l'écarteur pendant l'intervention.



RÉF. DU PRODUIT :

1646-00 [Jeu]

Inclut un écarteur et deux lames pivotantes

Composants également disponibles à l'unité :

1646-01 [Écarteur]

Longueur totale : 13 cm

Largeur d'ouverture : 6,4 cm

1646-02 [Lame pivotante]

Une seule lame avec cette référence de produit est

fournie et deux lames sont fournies dans le jeu

Largeur : 24 mm


Profondeur : 19 mm



Écarteur Weitlaner de Chung

Conçu par Raymond Chung, Docteur en médecine

Les fourches rallongées permettent de l'utiliser dans les petites plaies profondes

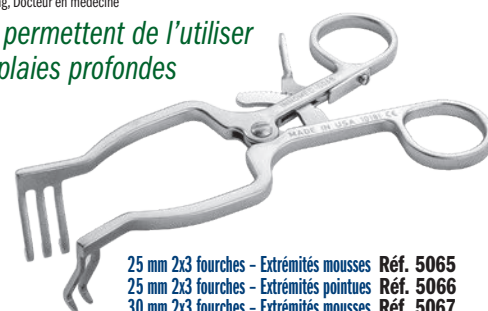

25 mm 3x4 fourches - Extrémités mousses Réf. 5065-01

25 mm 3x4 fourches - Extrémités pointues Réf. 5066-01

30 mm 3x4 fourches - Extrémités mousses Réf. 5067-01

30 mm 3x4 fourches - Extrémités pointues Réf. 5068-01

25 mm 2x3 fourches - Extrémités mousses Réf. 5065

25 mm 2x3 fourches - Extrémités pointues Réf. 5066

30 mm 2x3 fourches - Extrémités mousses Réf. 5067

30 mm 2x3 fourches - Extrémités pointues Réf. 5068

RÉF. DU PRODUIT :

3x4 fourches -

Extrémités mousses

5065-01 [25 mm]

Profondeur de la lame : 25 mm

Longueur totale : 11,4 cm

5067-01 [30 mm]

Profondeur de la lame : 30 mm

Longueur totale : 11,4 cm

3x4 fourches -

Extrémités pointues

5066-01 [25 mm]

Profondeur de la lame : 25 mm

Longueur totale : 11,4 cm

5068-01 [30 mm]

Profondeur de la lame : 30 mm

Longueur totale : 11,4 cm

RÉF. DU PRODUIT :

2x3 fourches -

Extrémités mousses

5065 [25 mm]

Profondeur de la lame : 25 mm

Longueur totale : 11,4 cm

5067 [30 mm]

Profondeur de la lame : 30 mm

Longueur totale : 11,4 cm

2x3 fourches -

Extrémités pointues

5066 [25 mm]

Profondeur de la lame : 25 mm

Longueur totale : 11,4 cm

5068 [30 mm]

Profondeur de la lame : 30 mm

Longueur totale : 11,4 cm

Écarteur de fracture du radius distal de Williams

Conçu par Craig S. Williams, Docteur en médecine et Eric Dahlinger

Conçu pour offrir une exposition d'excellente qualité pendant la réduction d'une fracture et l'application d'un revêtement

RÉF. DU PRODUIT :

1837-L [Gauche]

Pour des aiguilles mesurant jusqu'à 1,1 mm

Longueur totale : 11,4 cm

Profondeur de la lame : 20 mm

Largeur de la lame : 12,5 mm

1837-R [Droite]

Pour des aiguilles mesurant jusqu'à 1,1 mm

Longueur totale : 11,4 cm

Profondeur de la lame : 20 mm

Largeur de la lame : 12,5 mm



Écarteur autostatique ambidextre de Faillace



Conçu par John J. Faillace, Docteur en médecine

La poignée peut être basculée pour libérer le champ de vision après l'insertion

Les longues pattes et fourches de l'écarteur autostatique permettent d'accroître la plage d'ouverture des plaies en largeur et en profondeur.

RÉF. DU PRODUIT :

1580 [7 dents]
Longueur totale : 19,1 cm
Profondeur de la fourche : 38 mm
Largeur de la fourche : 34 mm
1579 [4 dents]
Longueur totale : 15,2 cm
Profondeur de la fourche : 38 mm
Largeur de la fourche : 18 mm
1579-01 [Version petit - 4x3 dents]
Longueur totale : 13,3 cm
Profondeur de la fourche : 20 mm
Largeur de la fourche : 18 mm / 13 mm

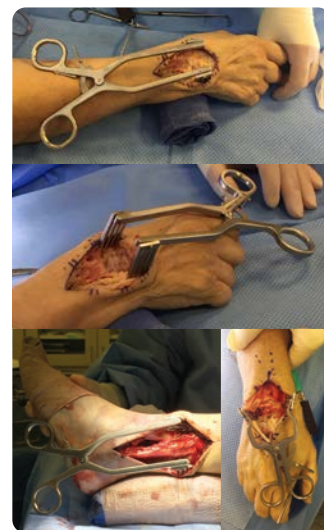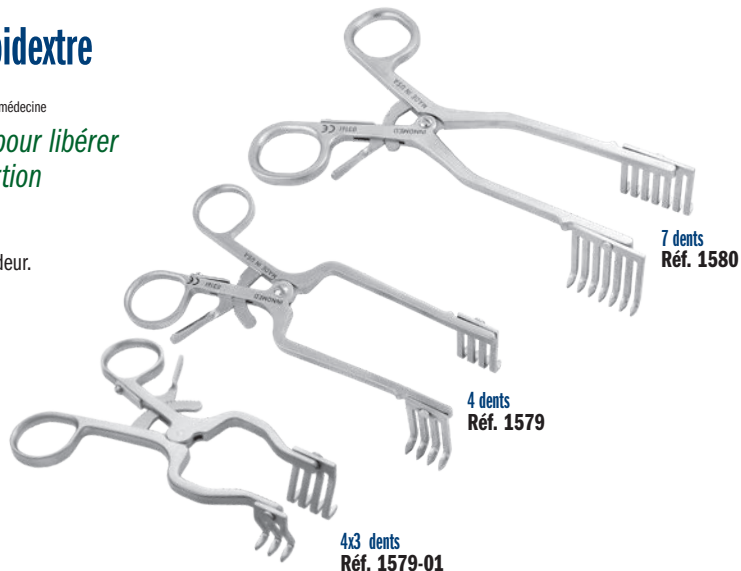

Écarteur modulaire de Dodson

Conçu par Mark A. Dodson, Docteur en médecine

Il permet de faire pivoter le membre (en pronation ou en supination) sans altérer l'exposition. Les écarteurs Hohmann possèdent trois tailles de trous offrant plusieurs options d'angle de positionnement en utilisant les dents de la poignée auto statique. Un positionnement entre les dents peut également être envisagé. L'écarteur Hohmann est placé autour de l'os afin de réduire la force exercée sur les tissus mous tout en améliorant l'exposition. Il peut être utilisé sur l'avant-bras pour soigner les fractures du corps du radius et du cubitus, les fractures de l'humérus ainsi que les fractures du péroné.

RÉF. DU PRODUIT :

1838-00 [Jeu]
Composants de rechange :
1838-01 [Manche seul]
Longueur totale : 14 cm
1838-02 [Lame seule - Une unité]
Longueur totale : 13,3 cm
Largeur de la lame : 9 mm
1025 [Boîte de stérilisation seule]



Composants disponibles en option (non fournis avec le kit) :

1645-MOD [Écarteur de J.B. Redler modifié]
Longueur totale : 31,4 cm
Profondeur de la lame : 7,3 cm
Largeur de la lame : 20 mm
Largeur de la fourche à l'extrémité : 5 mm
1838-02R [Lame radio-transparente]
Longueur totale : 13,3 cm
Largeur de la lame : 9 mm

Les lames du mini-écarteur de Hohmann radio-transparent et de l'écarteur de J.B. Redler modifié sont disponibles en option et vendues séparément.

Conçu pour faciliter l'exposition d'un os de petite taille à taille moyenne pour effectuer une fixation interne. Il peut être utilisé pour les fractures du radius distal, du cubitus, de l'humérus et du péroné

Le kit inclut un écarteur autostatique, deux lames de mini-écarteur Hohmann et une boîte de stérilisation. Les lames du mini-écarteur Hohmann radio-transparentes sont disponibles en option.

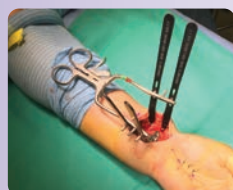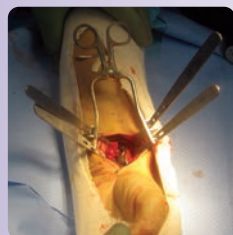

Nouveau!

Optionnel :
Écarteur de J.B. Redler modifié
Réf. 1645-MOD

Modifié avec trois tailles de trous qui permettent de varier les angles de positionnement à l'aide des dents de l'écarteur de Dodson

Manche seul
Réf. 1838-01

Lame seule
(Une unité)
Réf. 1838-02

Brevet américain
n° 9 161 745 B2

Optionnel :
Lame radio-transparente
Réf. 1838-02R

La lame radio-transparente est fabriquée à partir d'un composite résistant et léger en fibres carbone/PEEK, qui est totalement radio-transparent, elle protège les surfaces des composants contre les rayures et elle peut être stérilisée à la vapeur.

Écarteur de névrome de Hendren

Conçu par Douglas H. Hendren, Docteur en médecine

Les fourchons étroits n'agressent pas les tissus tout en offrant la résistance requise pour rétracter l'os

Fournit une exposition d'excellente qualité. Cet instrument est également utile dans les interventions chirurgicales de réparation de la fracture du scaphoïde.

RÉF. DU PRODUIT :

1680-02 [Grand format]
Longueur totale : 14 cm
1680-01 [Petit format]
Longueur totale : 10,8 cm




Grand format
Réf. 1680-02

Petit format
Réf. 1680-01

Distracteur/Compresseur pour articulations de Gurbani

Ce distracteur/compresseur pour articulations polyvalent offre une amplitude de mouvement à 360° pour les procédures arthroscopiques ou ouvertes pratiquées sur les articulations du pied, de la cheville, de la main et du poignet

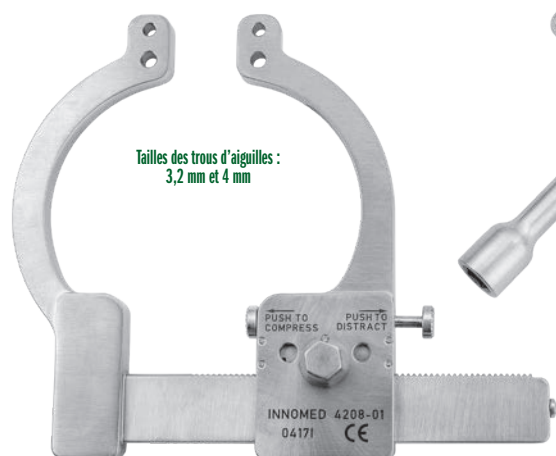

Tailles des trous d'aiguilles :
3,2 mm et 4 mm



Le chirurgien enfonce les aiguilles dans l'os, puis il fait glisser les trous du dispositif au-dessus des aiguilles et procède ensuite à la distraction ou à la compression. Le dispositif peut être verrouillé dans l'un des deux sens. Cet instrument est particulièrement utile pour les arthroscopies de l'articulation sub-talienne, talo-naviculaire, calcanéo-cuboïde et du poignet. La clé en T permet d'effectuer une manipulation précise et contrôlée.

RÉF. DU PRODUIT :	
4208-00	[Kit avec boîte] Composants inclus : Distracteur/Compresseur, clé en T et boîte
Disponible à l'unité :	
4208-01	[Distracteur/Compresseur seul] Dimensions : 16,2 cm de large x 12,7 cm de haut Distraction jusqu'à : 7 cm/Compression à partir de : 13 mm
4208-TW	[Clé en T] Longueur totale : 25,4 cm
1025	[Boîte de stérilisation]

Conçu par Naren G. Gurbani, Docteur en médecine



Écarteur calcanéen

Conçu par Michael Forness, Docteur en ostéopathie


Permet de séparer l'os calcanéen ostéotomisé pour mettre en place un greffon osseux tricortical

Les patins possèdent une zone de surface étendue qui sépare facilement l'os calcanéen ostéotomisé en vue de la mise en place du greffon osseux tricortical. La partie large recouverte d'un patin évite de comprimer l'os spongieux calcanéen mou.



Patins lisses

Patins striés

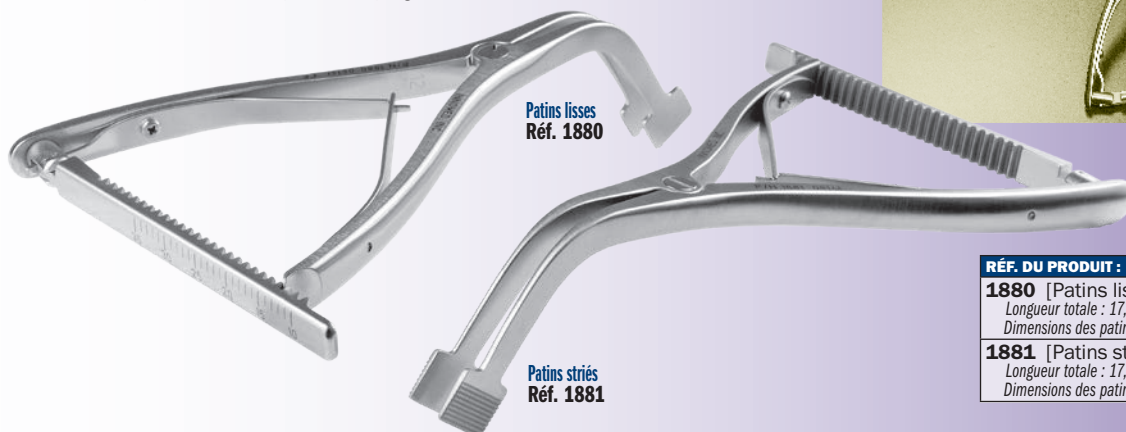

Patins lisses
Réf. 1880

Patins striés
Réf. 1881





RÉF. DU PRODUIT :	
1880	[Patins lisses] Longueur totale : 17,8 cm Dimensions des patins : 15 mm x 12 mm
1881	[Patins striés] Longueur totale : 17,8 cm Dimensions des patins : 15 mm x 12 mm

Écarteur pour articulation et calcanéen de Weinraub

Conçu par Glenn M. Weinraub Docteur en médecine podiatrique, FACFAS

Conçu pour faciliter l'ouverture des petites articulations de la main et du pied en vue d'utiliser des techniques de fusion et de greffe

Offre une excellente exposition de l'articulation sans bloquer l'accès intra-articulaire ou à l'ostéotomie. Contribue à éviter tout glissement ou chute de l'articulation en plaçant les bras de chaque côté du site à distraire, en enfonçant deux aiguilles et en ouvrant l'articulation.

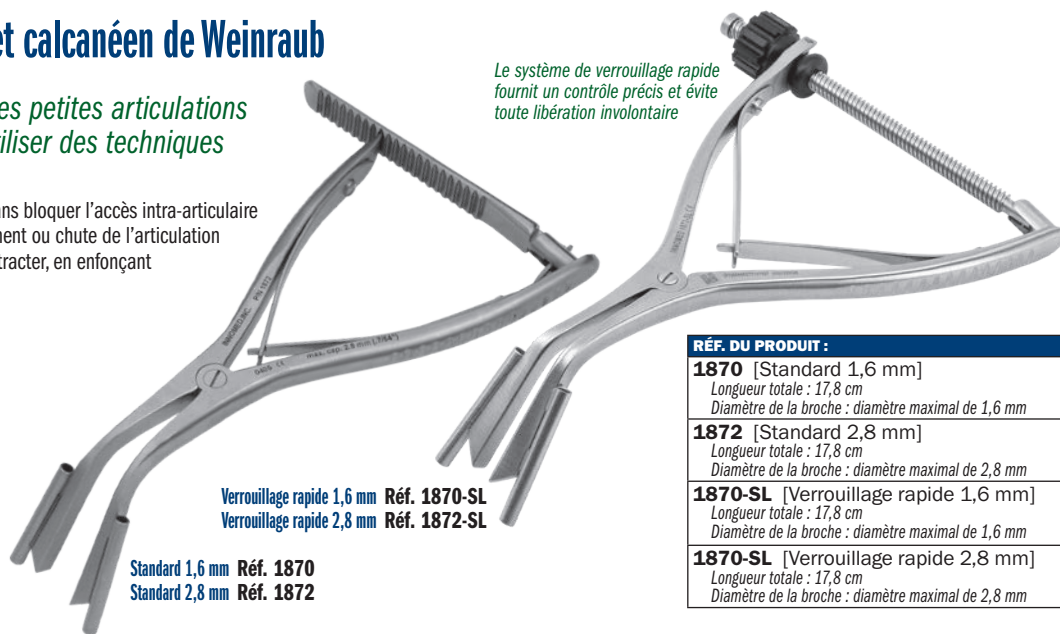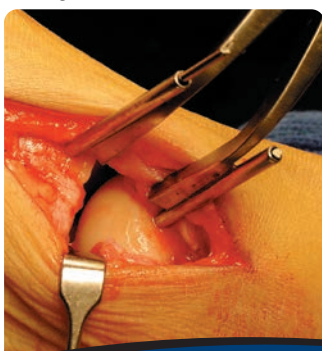

Le système de verrouillage rapide fournit un contrôle précis et évite toute libération involontaire

Verrouillage rapide 1,6 mm Réf. 1870-SL
Verrouillage rapide 2,8 mm Réf. 1872-SL

Standard 1,6 mm Réf. 1870
Standard 2,8 mm Réf. 1872

RÉF. DU PRODUIT :	
1870	[Standard 1,6 mm] Longueur totale : 17,8 cm Diamètre de la broche : diamètre maximal de 1,6 mm
1872	[Standard 2,8 mm] Longueur totale : 17,8 cm Diamètre de la broche : diamètre maximal de 2,8 mm
1870-SL	[Verrouillage rapide 1,6 mm] Longueur totale : 17,8 cm Diamètre de la broche : diamètre maximal de 1,6 mm
1870-SL	[Verrouillage rapide 2,8 mm] Longueur totale : 17,8 cm Diamètre de la broche : diamètre maximal de 2,8 mm

Écarteur de colonne latérale calcanéenne


Conçu par K. Wagner, Docteur en médecine

Utilisé pour rallonger la colonne latérale du calcanéum

RÉF. DU PRODUIT :

1725

Patins : 14 mm x 12 mm
Largeur d'ouverture des bras : 4,5 cm
Longueur totale : 10,8 cm

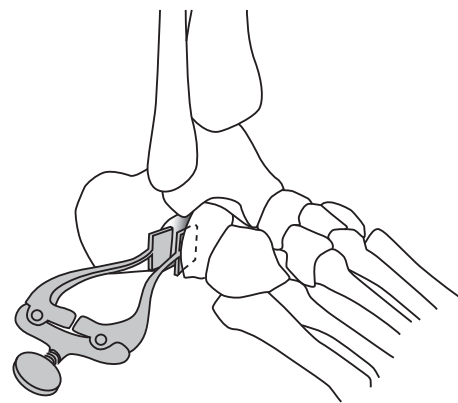


Écarteur autostatique à lame ouverte Clearview de Desai

Conçu par Sarang Desai, Docteur en ostéopathie

La conception à lame ouverte permet de visualiser parfaitement les tissus mous et les structures neurovasculaires rétractés


Les lames coniques permettent de rétracter les tissus mous profonds à 90° et facilitent l'insertion dans la plaie. Les lames ouvertes permettent également au chirurgien de travailler dans une zone de lame ouverte, comme pour les interventions de récession du muscle gastrocnémien.

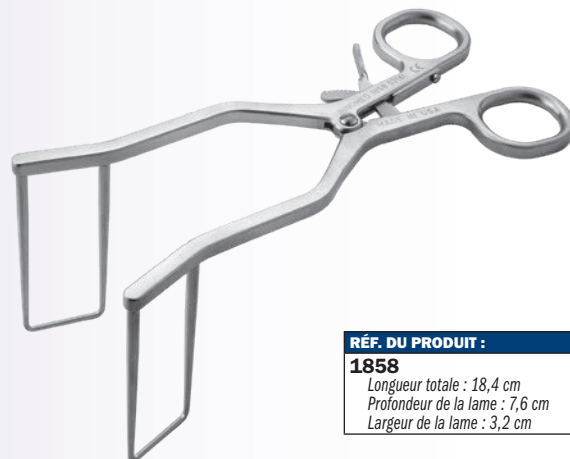

RÉF. DU PRODUIT :

1858


Longueur totale : 18,4 cm
Profondeur de la lame : 7,6 cm
Largeur de la lame : 3,2 cm

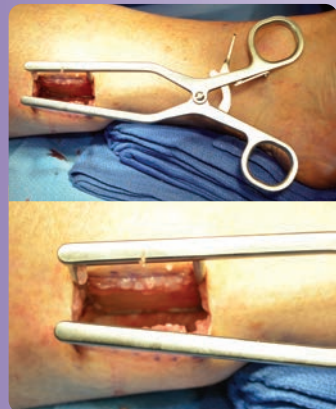

Écarteur de Strayer

Conçu par Irvin Oh, Docteur en médecine

Écarteur laminaire avec de longues lames fines conçu pour rétracter le muscle soléaire et les tissus mous afin d'isoler et d'exposer le fascia du muscle jumeau à des fins de libération

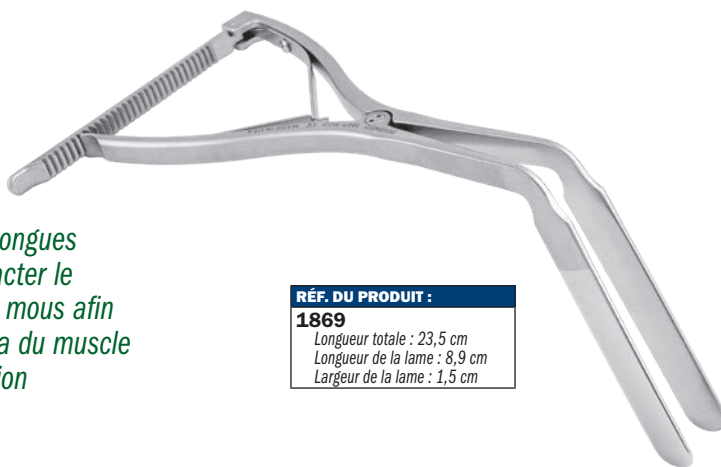

RÉF. DU PRODUIT :

1869


Longueur totale : 23,5 cm
Longueur de la lame : 8,9 cm
Largeur de la lame : 1,5 cm



Écarteur Ortho étaloné avec des embouts fendus

Conçu par Jason Bariteau, Docteur en médecine

Écarteur laminaire de grande taille avec un profil fermé très fin conçu pour faciliter la distraction dans les zones articulaires étroites comme les articulations sub-taliennes et talo-naviculaires

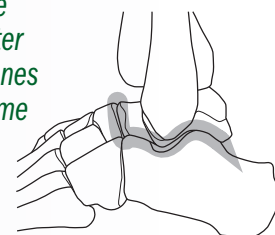

RÉF. DU PRODUIT :

1841

Longueur totale : 17,1 cm
Longueur de la fourche : 12,7 mm
Étalonnages : de 10 mm à 35 mm




Écarteur avec tournevis Mantis

Conçu par J. Albert Diaz, Docteur en médecine

Conçu pour fournir une distraction stable au niveau des fractures complexe à l'aide de deux tournevis fixés*

*Tournevis non fournis.

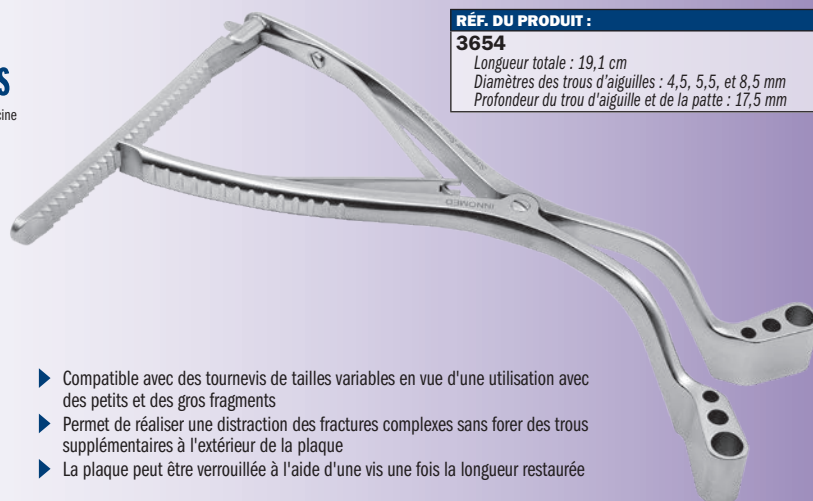

RÉF. DU PRODUIT :

3654

Longueur totale : 19,1 cm

Diamètres des trous d'aiguilles : 4,5, 5,5, et 8,5 mm

Profondeur du trou d'aiguille et de la patte : 17,5 mm

- Compatible avec des tournevis de tailles variables en vue d'une utilisation avec des petits et des gros fragments
- Permet de réaliser une distraction des fractures complexes sans forer des trous supplémentaires à l'extérieur de la plaque
- La plaque peut être verrouillée à l'aide d'une vis une fois la longueur restaurée

Écarteurs de petits os, du calcanéum et des articulations

RÉF. DU PRODUIT :

BRAS ÉCARTÉS

4210-LB [Grand format]

Diamètres des trous : Pour des aiguilles de fil de Kirschner de 1,6 et 2,4 mm
Longueur totale : 20,3 cm

4210-SB [Petit format]

Diamètres des trous : Pour des aiguilles de fil de Kirschner de 1,6 et 2,4 mm
Longueur totale : 15,2 cm

BRAS FERMÉS

4210-LS [Grand format]

Diamètres des trous : Pour des aiguilles de fil de Kirschner de 1,6 et 2,4 mm
Longueur totale : 20,3 cm

4210-SS [Petit format]

Diamètres des trous : Pour des aiguilles de fil de Kirschner de 1,6 et 2,4 mm
Longueur totale : 15,2 cm

4210-XSD [Format extra petit]

Diamètres des trous : Pour des aiguilles de fil de Kirschner de 1,6 et 2,4 mm
Longueur totale : 10,8 cm



Les deux tailles de trous et les deux conceptions de bras proposées facilitent le choix de la taille de l'aiguille et simplifient la distraction dans diverses indications

Écarteurs de petits os, du calcanéum et des articulations avec vis à oreilles

Thumbscrew Modification Conçu par Kelly McCormick, Docteur en médecine

Les vis à oreilles évitent au dispositif de glisser sur les broches



Avec vis à oreilles
Grand et petit format,
bras écartés et fermés

RÉF. DU PRODUIT :

BRAS ÉCARTÉS

4215-LB [Grand format]

Diamètres des trous : Pour des aiguilles de fil de Kirschner de 1,6 et 2,4 mm
Longueur totale : 20,3 cm

4215-SB [Petit format]

Diamètres des trous : Pour des aiguilles de fil de Kirschner de 1,6 et 2,4 mm
Longueur totale : 15,2 cm

BRAS FERMÉS

4215-LS [Grand format]

Diamètres des trous : Pour des aiguilles de fil de Kirschner de 1,6 et 2,4 mm
Longueur totale : 20,3 cm

4215-SS [Petit format]

Diamètres des trous : Pour des aiguilles de fil de Kirschner de 1,6 et 2,4 mm
Longueur totale : 15,2 cm



Format extra petit
Réf. 4210-XSC

Petit format
Réf. 4210-SC

Compresseurs de petits os, du calcanéum et des articulations

Conçus pour effectuer une compression pendant les procédures de réparation des fractures et d'ostéotomie

Deux tailles de trous sont disponibles pour faciliter le choix de la taille de l'aiguille : 1,6 mm et 2,4 mm

RÉF. DU PRODUIT :

4210-SC [Petit format]

Longueur totale : 15,2 cm

4210-XSC [Format extra petit]


Longueur totale : 10,8 cm

Compresseur/Distracteur HFD

Mécanisme avec bouton de réglage facilitant le contrôle précis des fils insérés dans les interventions chirurgicales pratiquées sur de petits os pour maintenir une position, effectuer une compression ou une distraction


- ▶ Une aiguille de 3,2 mm peut être introduite dans les trous de la molette pour exercer un effet de levier
- ▶ Petit format: Les deux tailles de trous disponibles facilitent le choix de la taille de l'aiguille : 1,1 mm et 1,6 mm
- ▶ Grand format: Les deux tailles de trous disponibles facilitent le choix de la taille de l'aiguille : 2,0 mm et 3,2 mm
- ▶ Les bras radio transparents sont fabriqués à partir d'un composite en fibres carbone/PEEK
- ▶ Les deux modèles peuvent être stérilisés à la vapeur.

RÉF. DU PRODUIT :	
PETIT FORMAT	GRAND FORMAT
1834 [Acier inoxydable] Dimensions: 50 mm x 55 mm Ouverture maximale du bras : 3,4 cm	1836 [Acier inoxydable] Longueur totale : 10,2 cm Ouverture maximale du bras : 5,7 cm
1834-R [Avec bras radio transparents] Dimensions: 50 mm x 55 mm Ouverture maximale du bras : 3,4 cm	1836-R [Avec bras radio transparents] Longueur totale : 10,2 cm Ouverture maximale du bras : 5,7 cm

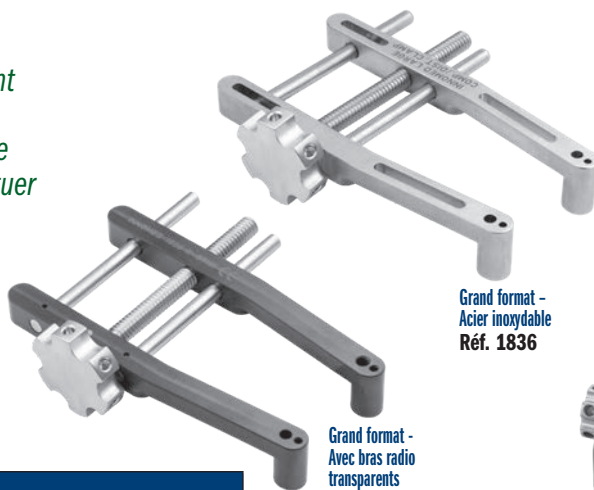

Grand format -
Acier inoxydable
Réf. 1836

Grand format -
Avec bras radio
transparentes
Réf. 1836-R

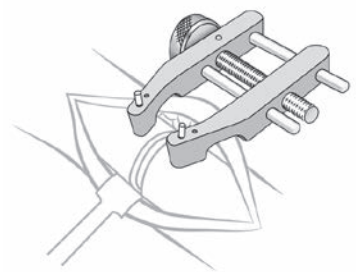

Petit format -
Acier inoxydable
Réf. 1834

Petit format - Avec
bras radio transparents
Réf. 1834-R

Compresseur de petites articulations de Wurapa

Conçu par Raymond K. Wurapa, Docteur en médecine

Conçu pour permettre une manipulation et un déploiement à une seule main après la mise en place des aiguilles de fixation

Conçu pour simplifier diverses procédures pratiquées sur les petites articulations :

- ▶ Préparation des non-consolidations des petits os avant la greffe osseuse et la fixation
- ▶ Préparation des petites articulations pour l'arthrodèse (fusion partielle du poignet, par exemple)
- ▶ Distracte et améliore l'évaluation des petites articulations avant de déterminer une prise en charge finale
- ▶ Utile pour la stabilisation inter carpienne avant de procéder aux reconstructions ligamentaires (par exemple, réparation/reconstruction du ligament scapho-lunaire)



1,1 & 1,6-mm trous Réf. 1752
1,1-mm trou Réf. 1754


Les aiguilles doivent être coupées juste au-dessus des broches de guidage pour fournir un accès complet au site chirurgical.



RÉF. DU PRODUIT :	
Deux trous de 1,1 mm et de 1,6 mm	
1752* [Distracteur] Distraction jusqu'à : 46 mm Longueur totale : 11,7 cm	
Trou unique de 1,1 mm	
1754 [Distracteur] Distraction jusqu'à : 46 mm Longueur totale : 11,4 cm	

Compresseur/Distracteur de petits os, du calcanéum et des articulations avec système de verrouillage rapide

Le système de verrouillage rapide fournit un contrôle précis et évite toute libération involontaire

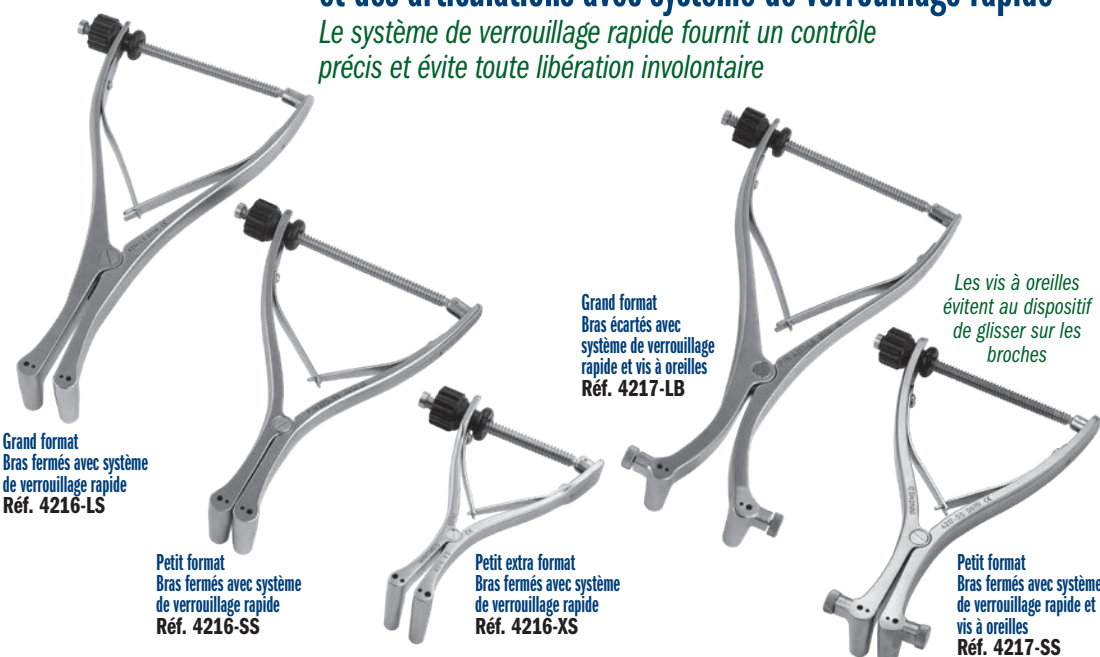

Grand format
Bras fermés avec système
de verrouillage rapide
Réf. 4216-LS

Petit format
Bras fermés avec système
de verrouillage rapide
Réf. 4216-SS

Petit extra format
Bras fermés avec système
de verrouillage rapide
Réf. 4216-XS

Grand format
Bras écartés avec
système de verrouillage
rapide et vis à oreilles
Réf. 4217-LB

Les vis à oreilles évitent au dispositif de glisser sur les broches

Petit format
Bras fermés avec système
de verrouillage rapide et
vis à oreilles
Réf. 4217-SS

RÉF. DU PRODUIT :	
BRAS FERMÉS AVEC SYSTÈME DE VERROUILLAGE RAPIDE	
4216-LS [Grand format] Diamètres des trous : Pour des aiguilles de fil de Kirschner de 1,6 et 2,4 mm Longueur totale : 20,3 cm	
4216-SS [Petit format] Diamètres des trous : Pour des aiguilles de fil de Kirschner de 1,6 et 2,4 mm Longueur totale : 15,2 cm	
4216-XS [Format extra petit] Diamètres des trous : Pour des aiguilles de fil de Kirschner de 1,6 et 2,4 mm Longueur totale : 11,4 cm	
BRAS ÉCARTÉS AVEC SYSTÈME DE VERROUILLAGE RAPIDE ET VIS À OREILLES	
4217-LB [Grand format] Diamètres des trous : Pour des aiguilles de fil de Kirschner de 1,6 et 2,4 mm Longueur totale : 20,3 cm	
BRAS FERMÉS AVEC SYSTÈME DE VERROUILLAGE RAPIDE ET VIS À OREILLES	
4217-SS [Petit format] Diamètres des trous : Pour des aiguilles de fil de Kirschner de 1,6 et 2,4 mm Longueur totale : 15,2 cm	



Écarteur de fracture de Wixted

Conçu par John J. Wixted, Docteur en médecine


Conçu pour fournir un effet de levier opposé afin de ramener le péroné (ou un autre os) à sa longueur appropriée après sa réduction suite à une fracture

RÉF. DU PRODUIT :


1882

Longueur totale : 17,8 cm

Une vis de 3,5 mm est temporairement insérée sur une plaque afin de créer un effet de levier sur l'extrémité de maintien de la vis de l'écarteur. L'extrémité en forme de pointe incurvée est ensuite introduite dans un trou se trouvant sur la plaque osseuse et l'écarteur est actionné pour ramener l'os à sa longueur appropriée avant la fixation.

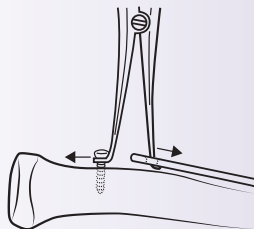

Découpe pour la vis fournit un effet de levier sûr sur une vis de 3,5 mm mise en place de manière temporaire

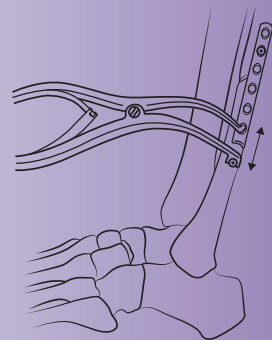

L'extrémité en forme de pointe incurvée est introduite dans un trou de la plaque osseuse pour créer un effet de levier

Compresseur et distracteur des broches grand format

Grand trou de broche de 3,2 mm pour une distraction ou une compression extra-résistante

RÉF. DU PRODUIT :

4233 [Distracteur de broches grand format]

Diamètres des trous :

Pour les broches de fil de Kirschner de 3,2 mm

Longueur totale : 20,3 cm


4234 [Compresseur de broches grand format]

Diamètres des trous :


Pour les broches de fil de Kirschner de 3,2 mm

Longueur totale : 20,3 cm

Distracteur de broches grand format
Réf. 4233

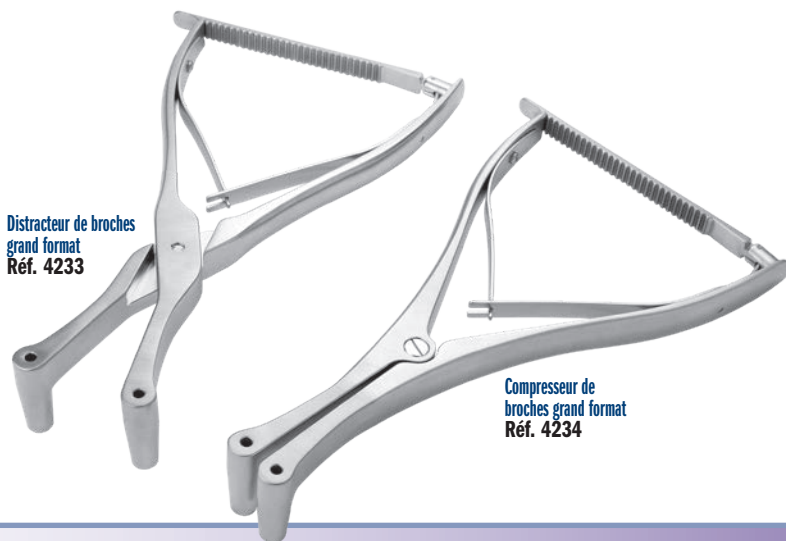

Compresseur de broches grand format
Réf. 4234

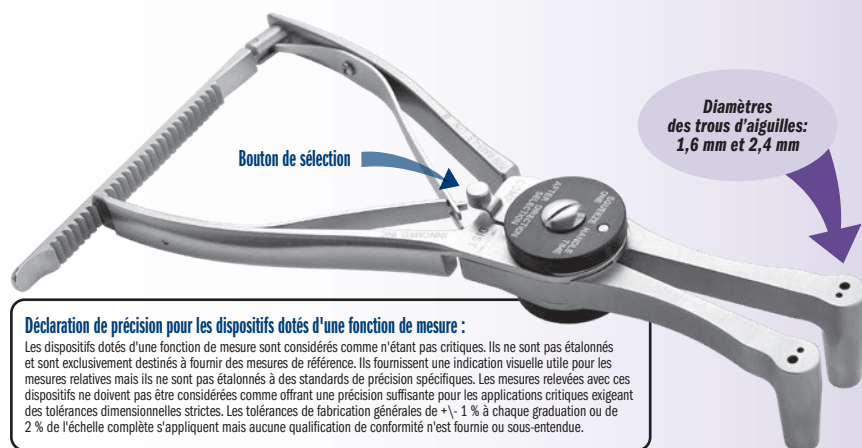

Bouton de sélection

Diamètres des trous d'aiguilles:
1,6 mm et 2,4 mm

Déclaration de précision pour les dispositifs dotés d'une fonction de mesure :

Les dispositifs dotés d'une fonction de mesure sont considérés comme n'étant pas critiques. Ils ne sont pas étalonnés et sont exclusivement destinés à fournir des mesures de référence. Ils fournissent une indication visuelle utile pour les mesures relatives mais ils ne sont pas étalonnés à des standards de précision spécifiques. Les mesures relevées avec ces dispositifs ne doivent pas être considérées comme offrant une précision suffisante pour les applications critiques exigeant des tolérances dimensionnelles strictes. Les tolérances de fabrication générales de $\pm 1\%$ à chaque graduation ou de 2 % de l'échelle complète s'appliquent mais aucune qualification de conformité n'est fournie ou sous-entendue.

Compresseur/Distracteur de petits os, du calcanéum et des articulations

Le bouton de sélection permet d'actionner le mécanisme de passage de la compression à la distraction

Il suffit de comprimer la poignée une fois après avoir choisi le sens pour enclencher le mécanisme. Deux tailles de trous permettent de choisir la taille d'aiguille appropriée.

RÉF. DU PRODUIT :

4865-LS [Format standard]

Longueur totale : 21,6 cm

Diamètres des trous : Pour des aiguilles de fil de Kirschner de 1,6 et 2,4 mm

Écarteur Ortho autostatique avec broches guides

Conçu par Sean Dunn, Docteur en médecine podiatrique

Conçu pour distraire une petite articulation lors d'une chirurgie de fusion d'alignement par ostéotomie

RÉF. DU PRODUIT :

1842-02

Longueur totale : 16,5 cm


Largeur de la lame : 7 mm

Extension de la lame (après les guides) : 1 cm

Épaisseur de la lame : 1,68 mm

Longueur de la broche guide : 3,2 cm

Diamètre interne de la broche guide : 2,1 mm

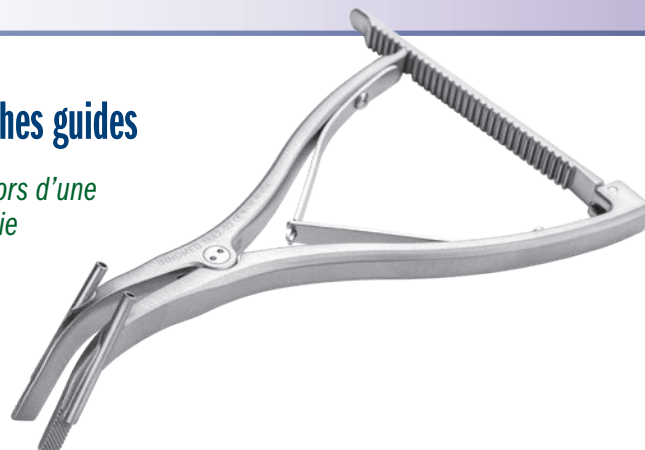

- ▶ Les broches de guidage parallèles sont compatibles avec des aiguilles de 2 mm maximum
- ▶ Les lames externes striées peuvent être dépliées sur 1 cm après l'extrémité des broches de guidage
- ▶ Le cliquet étalonné mesure le diamètre interne du mors jusqu'à 50 mm

Écarteur pour petits espaces de Monaco

Conçu pour rétracter les tissus adipeux et les tissus mous environnants au travers d'une petite incision pour les aponévrotomies plantaires ouvertes, les excisions du névrome et la libération latérale lors d'une intervention chirurgicale réalisée pour une bursite des orteils



Cet instrument s'avère également utile pour diverses interventions chirurgicales de la main (canal carpien, par exemple).

RÉF. DU PRODUIT :

1887-01

Longueur totale : 10,8 cm
Profondeur de la lame : 18 mm
Largeur de la lame : 12 mm
Bord de la lame : 3,5 mm

Conception modifiée par
Spencer Monaco, Docteur en
médecine podiatrique, FACFAS

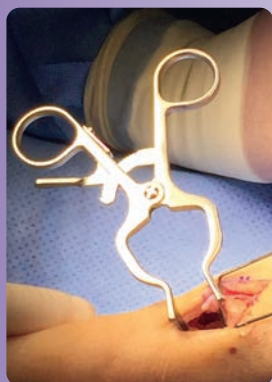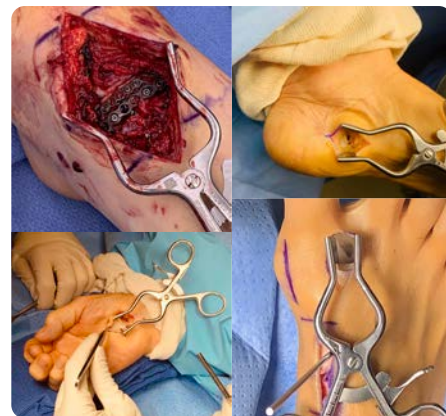

Écarteur autostatique HFD des petits os


Écarteur polyvalent présentant des lames coniques étroites qui, une fois rassemblées, forment une petite cale afin de pénétrer dans une interface osseuse confinée ou une ostéotomie

Les lames possèdent des motifs antidérapants non agressifs qui peuvent être utilisés pour écarter les os ou rétracter les tissus mous dans les plaies plus petites.

RÉF. DU PRODUIT :

1829

Longueur totale : 11,4 cm
Profondeur de la lame : 28 mm
La largeur de la lame passe de : 8 mm à 5 mm

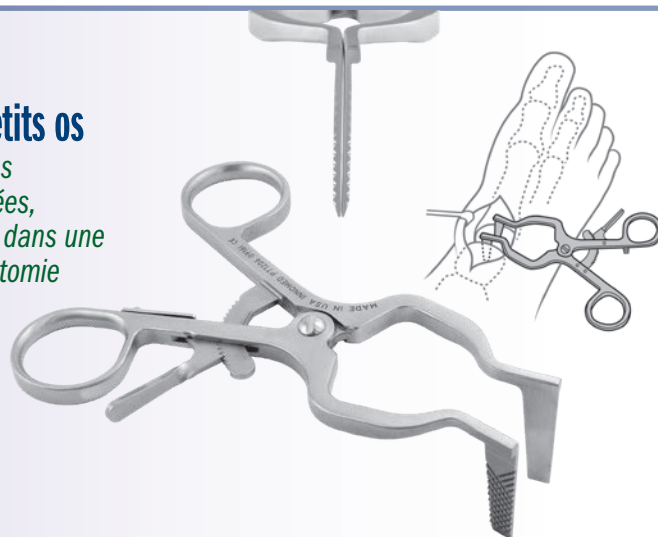

Écarteur du canal carpien de Burgess


Conçu par Craig Burgess, Docteur en ostéopathie

Conçu pour réaliser une exposition lors d'une intervention pratiquée sur le canal carpien

RÉF. DU PRODUIT :

1887

Longueur totale : 10,8 cm
Longueur de la lame : 12 mm
Profondeur de la lame : 8 mm

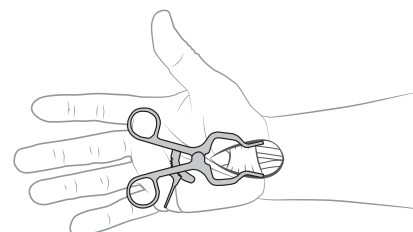

Écarteur à déclencheur manuel de Wilson

Conçu par Ralph V. Wilson, Docteur en médecine

RÉF. DU PRODUIT :

1884

Longueur totale : 10,8 cm
Lames : 6,5 mm de large x 10 mm de profondeur



Nouveau!

Guide de libération ligamentaire de Sutter

Conçu par Damian Sutter, Docteur en médecine

Conçu pour la libération du ligament annulaire A1 guidée par échographie, le guide est utilisé avec une lame crochetée. La libération est effectuée au moyen d'une petite incision alors que l'intervention est réalisée pratiquement totalement en percutané au moyen du contrôle par échographie

RÉF. DU PRODUIT :


1121

Longueur totale : 25,7 cm
Longueur de la lame d'insertion : 5,4 cm
Hauteur de la lame d'insertion : 1,7 mm
Largeur de la lame d'insertion : 3,4 mm
Largeur du canal de guidage : 2,4 mm



Rétracteurs du canal carpien de Kakar

Conçu par Sanj Kakar, Docteur en médecine

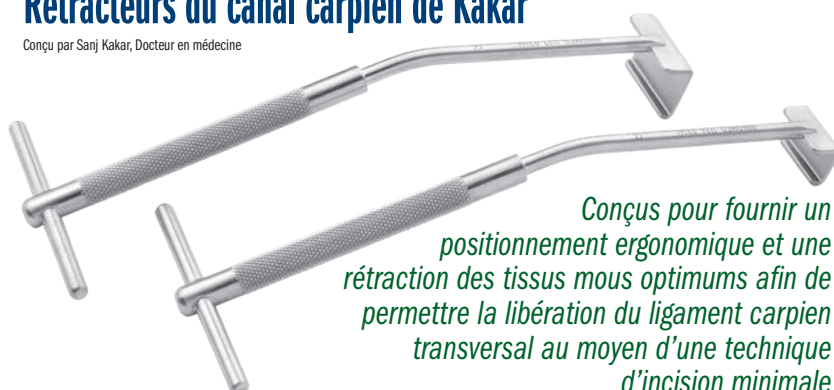

Conçus pour fournir un positionnement ergonomique et une rétraction des tissus mous optimaux afin de permettre la libération du ligament carpien transversal au moyen d'une technique d'incision minimale

Grand format
Réf. 1127

Petit format
Réf. 1126

RÉF. DU PRODUIT :

1126 [Petit format]


Longueur totale : 15,2 cm
Lame : 15 mm de large x 11 mm de long

1127 [Grand format]

Longueur totale : 15,2 cm
Lame : 20 mm de large x 15 mm de long

Écarteur du canal carpien auto statique de Holiday





Conçu par Allan Holiday, Docteur en médecine

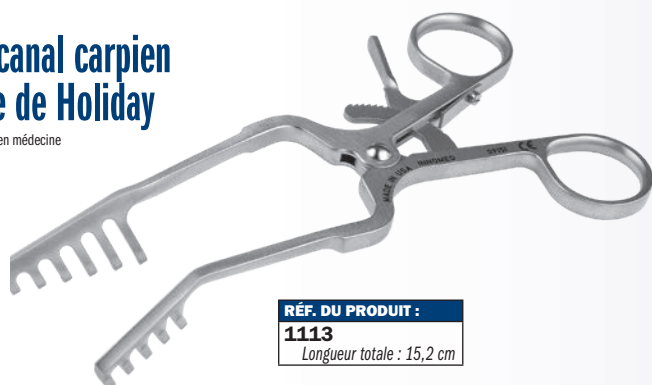

RÉF. DU PRODUIT :

1113


Longueur totale : 15,2 cm

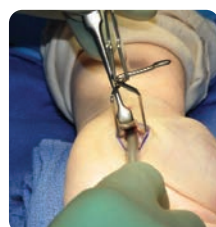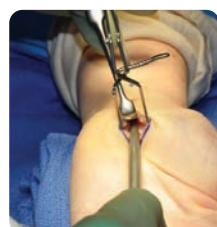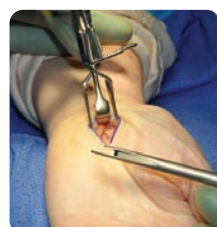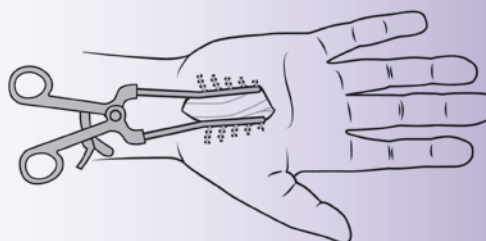

RÉF. DU PRODUIT :

1150

Longueur totale : 12,7 cm

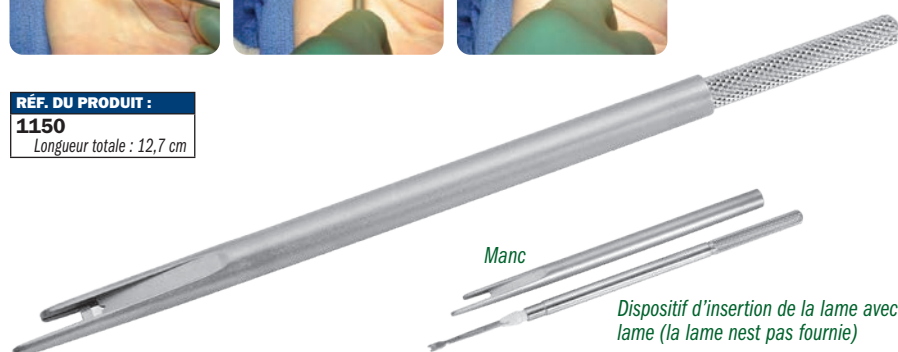

Manc

Dispositif d'insertion de la lame avec lame (la lame nest pas fournie)

Manchon de libération du canal carpien de Hagan

Conçu par Hugh Hagan, Docteur en médecine

Conçu pour protéger les structures anatomiques environnantes en fournissant un manchon dans lequel il est possible de faire avancer en douceur une lame de type Beaver pour diviser et libérer le ligament carpien transversal

Conçu pour être utilisé lors d'une approche non-endoscopique mini-ouverte, le manchon isole la lame en protégeant les structures anatomiques environnantes. L'extrémité inférieure plus longue du manchon est insérée entre le nerf médian et le ligament carpien transversal alors que l'extrémité supérieure plus courte empêche tout soulèvement des structures situées au-dessus du ligament. La lame est ensuite enfoncée dans le manchon pour libérer le ligament.


Guide de libération du canal carpien et jeu de lames

Guide conçu par Peter J. Evans, Docteur en médecine, PhD

Guide conçu pour améliorer la protection du nerf médian tout en créant une voie qui permet d'introduire en douceur la lame afin de diviser le ligament carpien transversal lors d'une voie d'abord non endoscopique mini-ouverte

Guide de canal carpien d'Evans
Réf. 1128

Lame de libération du canal carpien
Réf. 1124-02 (Lot de 2)

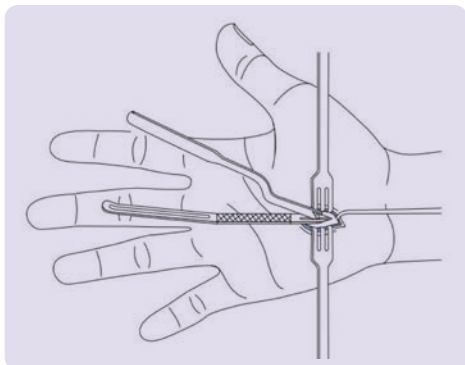

RÉF. DU PRODUIT :

1124-00 [Kit avec un guide et une lame]

Le kit inclut :

[Lame de libération du canal carpien]

Longueur totale : 12 cm

Longueur de la lame : 3,5 cm

Hauteur de la lame : 5,6 mm

Largeur de la lame : 1 mm

1128 [Guide de canal carpien d'Evans]

Longueur totale : 20,3 cm

Largeurs du guide-lame : 2 mm et 5 mm

Pièces de rechange :

1124-02 [Lame de libération du canal carpien] Lot de 2

Une lame est fournie avec le kit.

Deux lames sont fournies avec cette référence.

Kit de libération du canal carpien de Ditmars

Conçu par Donald M. Ditmars Jr., Docteur en médecine

Conçu pour faciliter la rétraction et offrir un accès lors des opérations de libération du canal carpien



RÉF. DU PRODUIT :

1132-00 [Kit de libération du canal carpien avec boîte]

Composants également disponibles à l'unité :

1132-01 [Grand écarteur de libération incurvé]

Longueur totale : 12,8 cm

Longueur de la poignée : 7,6 cm

Diamètre du tube interne : 7,5 mm

1132-02 [Petite écarteur de libération incurvé]

Longueur totale : 12 cm

Longueur de la poignée : 7,6 cm

Diamètre du tube interne : 4 mm

1132-03 [Sonde droite pour canal carpien]

Longueur totale : 19,1 cm

Diamètre de la poignée : 6,25 mm

1025 [Boîte de stérilisation]

Grand écarteur
de libération incurvé
Réf. 1132-01

Écarteur destiné aux interventions
de libération du canal carpien
Diamètre du tube interne de 7,5 mm

Petit écarteur
de libération incurvé
Réf. 1132-02

Petit écarteur destiné aux phases
préliminaires des interventions de
libération du canal carpien
Diamètre du tube interne de 4 mm

Sonde droite
pour canal carpien
Réf. 1132-03

Cette sonde fait office de dilateur
afin d'introduire un petit écarteur du
canal carpien lors des interventions
de libération

Guide-lame de canal carpien universel de Evans

Conçu pour protéger le nerf médian tout en offrant plusieurs rainures destinées à un couteau rétrograde ou pour les ciseaux de ténotomie

Permet d'enfoncer la lame ou les ciseaux en douceur afin de diviser le ligament carpien transversal. Conçu pour une approche non-endoscopique mini-ouverte.


Conçu par Peter J. Evans, Docteur en médecine, PhD

RÉF. DU PRODUIT :

1128

Longueur totale : 20,3 cm

Largeurs du guide-lame : 2 mm et 5 mm


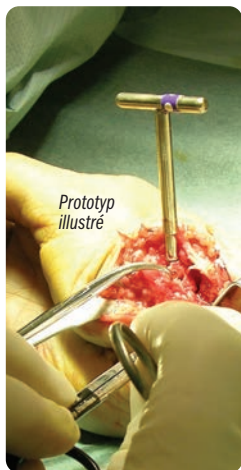


Tire-bouchon rallongé de Lubahn

Conçu par John D. Lubahn, Docteur en médecine

Conçu pour être fixé à un trapèze pendant une arthroplastie de l'articulation basale lorsque l'os est retiré en bloc

- Il peut être utilisé pour faciliter la réalisation d'une carpectomie de la rangée proximale en le fixant sur le scaphoïde, le lunatum ou le triquétrum.
- Il peut en outre être utilisé pour retirer le pisiforme en cas d'arthrite de l'articulation piso-triquétrale

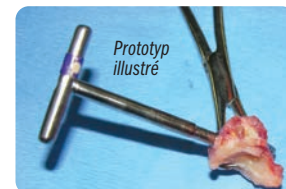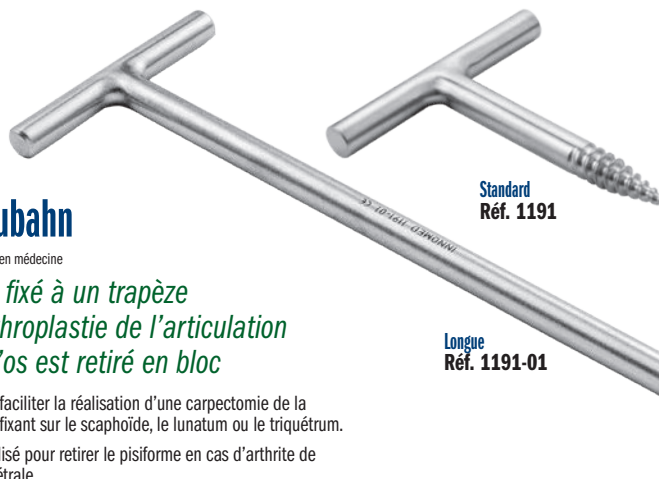

RÉF. DU PRODUIT :	
1191 [Standard]	Longueur totale : 5,7 cm
1191-01 [Longue]	Longueur totale : 16,5 cm

Manipulateur pour petits os à extrémité vrillée

Conçu par Raymond Wurapa, Docteur en médecine

Conçu avec un filetage agressif pour faciliter l'excision des petits os de la main et du pied

L'extrémité à raccordement rapide permet d'insérer facilement le dispositif à l'aide d'une perceuse électrique standard. Après l'insertion, la perceuse est détachée et le processus d'extraction de l'os peut être poursuivi et contrôlé manuellement à l'aide du disque situé sur l'axe ou en fixant une poignée.



- Facilite le retrait de l'os trapèze lors d'une arthroplastie de l'articulation basale.
- Simplifie l'extraction des os carpiens lors des interventions pratiquées sur le poignet : carpectomie de la rangée proximale, fusions partielles du poignet, excision de l'os pisiforme

RÉF. DU PRODUIT :	
1615	Longueur totale : 10,2 cm Longueur après le disque : 5,7 cm Longueur après le trait : 1,6 cm Longueur de l'extrémité vrillée : 1 cm
Facultatif :	
S0113 [Poignée universelle]	Longueur totale : 10,2 cm

Avec une poignée universelle disponible en option



RÉF. DU PRODUIT :	
1578-00 [Jeu]	
Composants inclus dans le kit/ disponibles à l'unité :	
1578-01 [Mini cadre]	Dimensions : 7,6 x 6,4 cm
1578-02 [Mini lame courte]	(2) incluses dans le jeu ; (1) avec cette référence uniquement Longueur totale : 6,4 cm Largeur de la lame : 16 mm Profondeur de la lame : 22 mm
1578-03 [Mini lame petit format]	(2) incluses dans le jeu ; (1) avec cette référence uniquement Longueur totale : 6,7 cm Largeur de la lame : 16 mm Profondeur de la lame : 29 mm
Lames disponibles en option (non fournies avec le jeu) :	
1578-04 [Mini lame grand format]	Longueur totale : 6,4 cm Largeur de la lame : 24 mm Profondeur de la lame : 29 mm

Jeu de mini-lames et de mini-cadres pour les fractures du radius distal de Lawton


Conçu par Jeffrey Lawton, Docteur en médecine

Conçu pour réaliser une exposition autostatique afin de réduire une fracture du radius distal ou d'insérer des plaques



Mini cadre
Réf. 1578-01

Le jeu inclut : (1) cadre, (2) lames courtes, (2) petites lames. Une lame de 100 mm supplémentaire est disponible séparément.

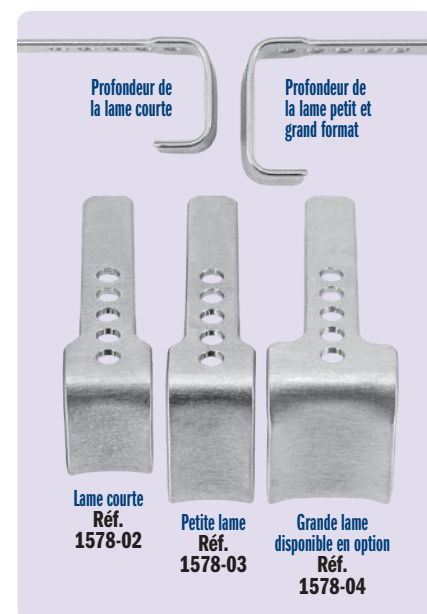

Profondeur de la lame courte

Profondeur de la lame petit et grand format

Lame courte
Réf. 1578-02

Petite lame
Réf. 1578-03

Grande lame disponible en option
Réf. 1578-04

Écarteur Hohmann large du radius distal de Beard

Conçu par David Beard, Docteur en médecine

Conçu pour l'exposition de la fracture du radius distal et diaphysaire. La lame large protège les tissus mous et la poignée coudée améliore l'accès et la visualisation

RÉF. DU PRODUIT :

5837-01

Longueur totale : 13,7 cm
Largeur de la lame : 25 mm

Dispositif de protection des tissus du biceps distal de Chandran

Conçu par Rama E. Chandran, Docteur en médecine

Conçu pour faciliter la protection des tissus et l'exposition de la tubérosité radiale lors d'une procédure de réparation du tendon du biceps distal

RÉF. DU PRODUIT :

3224

Longueur totale : 20,3 cm
Longueur de la poignée : 14 cm
Profondeur de la lame : 4,3 cm
Largeur de la lame : 1,7 cm



En exerçant une pression vers le bas, les dents favorisent la pénétration dans l'os afin d'ancrer le dispositif de protection.

Facilite la protection des tissus et l'exposition de la tubérosité radiale lors d'une procédure de réparation du tendon du biceps distal

Il permet également d'exposer l'humérus lors d'une procédure de réparation du biceps sous-pectoral proximal



Cet instrument permet également d'exposer l'humérus lors d'une procédure de réparation du biceps sous-pectoral proximal.

Écarteur de réparation du tendon du biceps distal de Vaughan


Conçu par Roderick A. Vaughan, Docteur en médecine

Conçu pour rétracter de manière continue dans les trois directions en évitant que les structures vitales environnantes ne pénètrent dans le champ pendant la phase de forage ou de réparation

RÉF. DU PRODUIT :

3223

Longueur totale : 21,3 cm
Longueur de la poignée : 13,3 cm
Profondeur : 5,1 cm

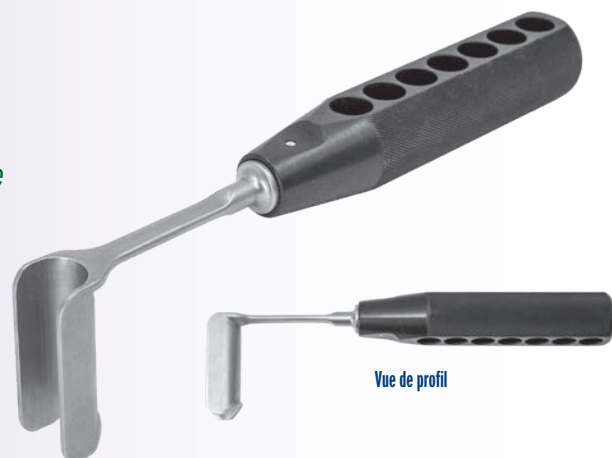

Vue de profil

Écarteur de la zone d'extrémité de Vaughan

Conçu par Roderick Vaughan, Docteur en médecine


Destiné à être utilisé lors de la mise en place des vis d'extrémité pendant le revêtement d'une fracture en recourant à une technique mini invasive

La forme en U favorise une exposition maximale sur toute la longueur ou au niveau de la « zone d'extrémité » d'une incision tout en conservant une largeur et une rétraction adéquate au niveau des bords de l'exposition.

RÉF. DU PRODUIT :

1766

Longueur totale : 22,2 cm
Grande profondeur : 45 mm
Grande largeur interne : 14 mm
Petite profondeur : 25 mm
Petite largeur interne : 12 mm

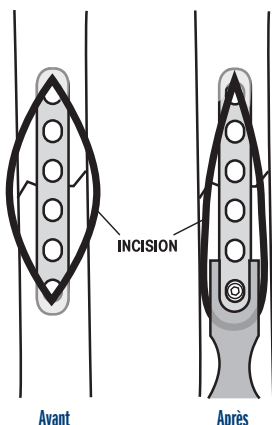



Écarteurs mini Hohmann OrthoLucent™

Conçu par Jeffrey Lawton, Docteur en médecine

Écarteurs légers et radio-transparents

Instrument à base de fibres de carbone résistantes et légères, complètement radio-transparent. Il peut être stérilisé à la vapeur et protège les surfaces des composants contre les rayures.

RÉF. DU PRODUIT :

1594-R [8 mm]
Longueur totale : 17,5 cm

1597-R [16 mm]
Longueur totale : 17,5 cm





Élévateur de Swanson

Conçu par Richard Ferkel, Docteur en médecine

Sa conception angulaire épouse parfaitement la forme de l'os afin d'effectuer une rétraction et une élévation. Il s'avère particulièrement utile pour les interventions chirurgicales pratiquées sur de petits os (main/poignet et pied/cheville)

RÉF. DU PRODUIT :

1644
Longueur totale : 16,2 cm
Profondeur de la lame : 1,9 cm

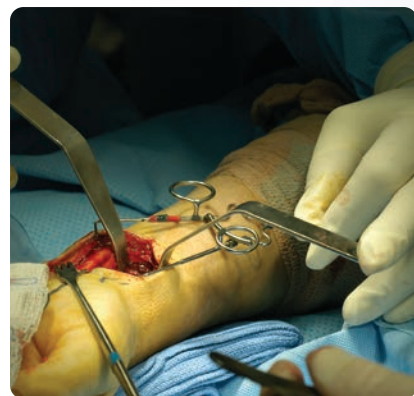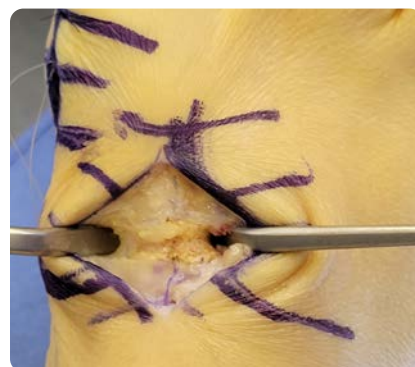

Écarteur de J.B. Redler

Conçu par M.R. Redler, Docteur en médecine

RÉF. DU PRODUIT :

1645
Longueur totale : 12,7 cm



Écarteur en forme de balancier unique conçu pour exposer les os dans plusieurs interventions des membres supérieurs

La conception à deux angles offre une exposition idéale en déployant un minimum d'efforts pour maintenir l'écarteur en éloignant les mains de l'assistant du site d'exposition. Le trou situé à la base de la poignée permet de fixer l'écarteur à la table à l'aide d'un drain de Penrose pour effectuer une approche sans les mains.

Écarteur Army-Navy court de Kawell


Conçu par Ron Kane, Docteur en médecine podiatrique

Écarteur Army-Navy à poignée courte particulièrement utile pour pratiquer une récession gastrocnémienne



RÉF. DU PRODUIT :

1148
Longueur totale : 12,1 cm
Longueur de la grande lame : 4,4 cm
Largeur de la grande lame : 1,6 cm
Longueur de la petite lame : 2,5 cm
Largeur de la petite lame : 0,8 cm

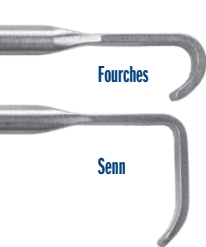

Fourches

Senn

Écarteurs avec poignée en T de Chung

Conçu par Raymond Chung, Docteur en médecine

Conçus avec une poignée en T pour faciliter le maintien et réduire la fatigue du doigt et du pouce

Nouveau!
POIGNÉE
PIVOTÉE A 90°

Avec poignées
standard



Écarteur à fourches pointues
Réf. 1159



Écarteur à fourches mousses
Réf. 1161



Senn
Réf. 1162

Avec de poignées
rallongé



Écarteur à griffes pointues rallongé
Réf. 1159-01



Écarteur à fourches mousses rallongé
Réf. 1161-01



Senn rallongé
Réf. 1162-01

RÉF. DU PRODUIT :

1159 [Écarteur à fourches pointues]
Longueur totale : 11,7 cm
Largeur de la lame : 9 mm
Profondeur de la lame : 7 mm

1161 [Écarteur à fourches mousses]
Longueur totale : 11,7 cm
Largeur de la lame : 9 mm
Profondeur de la lame : 7 mm

1162 [Senn]
Longueur totale : 11,7 cm
Largeur de la lame : 6 mm
Profondeur de la lame : 16 mm

1159-01 [Écarteur à griffes pointues rallongé]
Longueur totale : 14,6 cm
Largeur de la lame : 9 mm
Profondeur de la lame : 7 mm

1161-01 [Écarteur à griffes mousses rallongé]
Longueur totale : 14,6 cm
Largeur de la lame : 9 mm
Profondeur de la lame : 7 mm

1162-01 [Senn rallongé]
Longueur totale : 14,6 cm
Largeur de la lame : 6 mm
Profondeur de la lame : 16 mm

RÉF. DU PRODUIT :

1665
Longueur totale : 14,9 cm
Largeur de la lame : 6 mm
Partie tombante de la lame : 35 mm

1665-01
Longueur totale : 14 cm
Largeur de la lame : 6 mm
Partie tombante de la lame : 17 mm

1666
Longueur totale : 14,9 cm
Largeur de la lame : 8 mm
Partie tombante de la lame : 35 mm

1666-01
Longueur totale : 14 cm
Largeur de la lame : 8 mm
Partie tombante de la lame : 17 mm

1666-01
Longueur totale : 15,9 cm
Largeur de la lame : 8 mm
Partie tombante de la lame : 17 mm

1666-LG
Longueur totale : 18,1 cm
Largeur de la lame : 8 mm
Profondeur de la lame : 72 mm

Écarteurs mini Hohmann modifiés

Conçu par Jeffrey Lawton, Docteur en médecine

Utilisés pour les
interventions
pratiquées sur
les petits os



6 mm Large /
35 mm Profonde
Réf. 1665

6 mm Large /
17 mm Profonde
Réf. 1665-01

8 mm Large /
35 mm Profonde
Réf. 1666

8 mm Large /
17 mm Profonde
Réf. 1666-01

8 mm Large /
17 mm Profonde
avec Modification
coracoïde supérieure
Réf. 1666-02

8 mm Large /
72 mm Profonde
Réf. 1666-LG

Modification
coracoïde supérieure

Écarteurs de cheville et de pied à profil surbaissé de Johnson


Conçu par Michael Johnson, Docteur en médecine

Conçu pour rétracter les tissus mous
du pied et de la cheville

RÉF. DU PRODUIT :

1636-01 [Version droite]
Longueur totale : 19 cm
Largeur de la lame : 1 cm

1636-02 [Version incurvée]
Longueur totale : 22,5 cm
Largeur de la lame : 1 cm

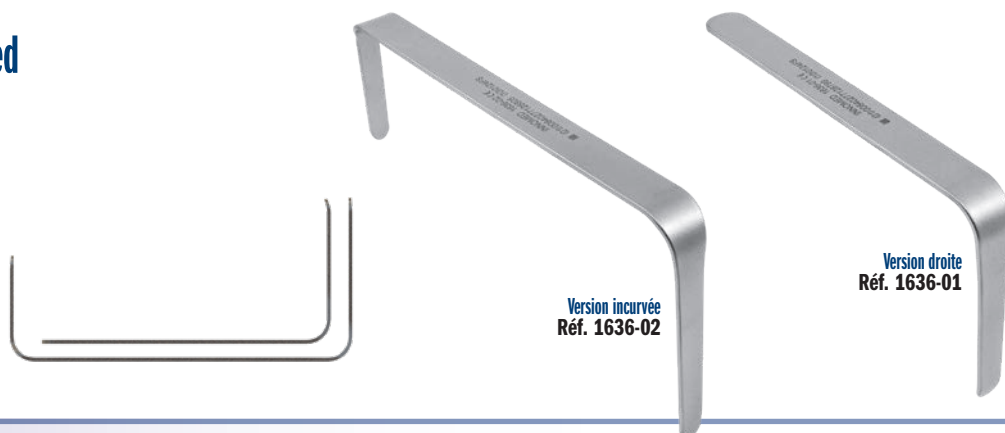

Version incurvée
Réf. 1636-02

Version droite
Réf. 1636-01

Écarteur de Woods

Conçu par Richard Ferkel, Docteur en médecine

Conçu pour être utilisé
sur le pied, la cheville,
le poignet et le coude

Nouveau!



RÉF. DU PRODUIT :

1147
Longueur totale : 14,6 cm
Largeur de la lame avec griffe : 1,7 cm
Profondeur de la lame avec griffe : 1,7 cm
Largeur de la partie plate : 1 cm
Profondeur de la partie plate : 2,54 cm

Tige avec petite sphère canulée

Conçue par Benjamin C. Taylor, Docteur en médecine

Conçue pour faciliter et préserver la réduction d'un fragment osseux. La canule permet d'insérer une broche de Kirchner (mesurant jusqu'à 1,6 mm) dans le fragment


RÉF. DU PRODUIT :

8092

Longueur totale : 11,4 cm
Longueur de la poignée : 7,6 cm
Diamètre de la boule : 7 mm



- ▶ Évite tout risque de glissement pendant l'insertion de broches de Kirchner
- ▶ Cette tige peut également être utilisée comme une poignée pour les joysticks des broches de Kirchner

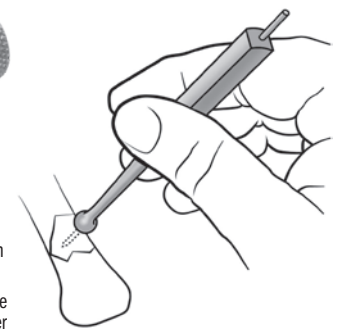

Manchons de foret prolongés


Conçus par Reza Firoozabadi, Docteur en médecine

Conçus pour faciliter la réduction des fractures lorsque des fils de Kirschner sont insérés. Le manchon de foret extra long permet de protéger les tissus mous et d'éviter d'empiler deux manchons



Nouveau!

TAILLE NON DISPONIBLE
DANS LE KIT
VENDUE SÉPARÉMENT

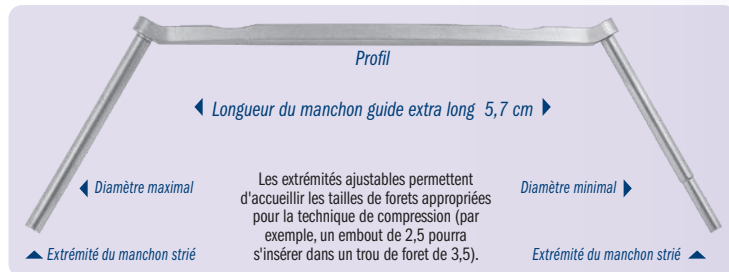

- ▶ Les extrémités striées améliorent la préhension lors de la réalisation d'un forage angulaire ou lors de la poussée d'un fragment de fracture pour simplifier sa réduction
- ▶ Le manchon peut faciliter la réduction en y insérant un fil de Kirschner
- ▶ Les extrémités ajustables permettent d'accueillir les tailles de forets appropriées pour la technique de compression (par exemple, un embout de 2,5 pourra s'insérer dans un trou de foret de 3,5)

RÉF. DU PRODUIT :

3014-00 [Jeu de 3 manchons]

Composants inclus dans le jeu/disponibles à l'unité :

3014-01 [2,4/1,8 mm]

Longueur totale : 17,6 cm
Longueur du tube de guidage : 5,7 cm
Angle du guide à partir de la poignée : 30°

3014-02 [2,7/2,0 mm]

Longueur totale : 17,6 cm
Longueur du tube de guidage : 5,7 cm
Angle du guide à partir de la poignée : 30°

3014-03 [3,5/2,5 mm]

Longueur totale : 17,6 cm
Longueur du tube de guidage : 5,7 cm
Angle du guide à partir de la poignée : 30°


RÉF. DU PRODUIT :

Disponible séparément.

3014-04 [4,5/4,0 mm]

Longueur totale : 17,6 cm
Longueur du tube de guidage : 5,7 cm
Angle du guide à partir de la poignée : 30°


Nouveau!

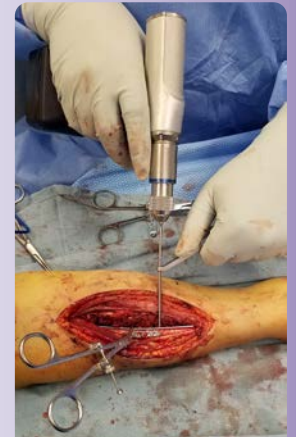

Exemple de procédure où un manchon de foret de 3,5/2,5 mm modifié est utilisé pour insérer des vis de 3,5 mm dans une fracture de l'avant-bras. Le manchon étendu permet de protéger les tissus mous pendant le forage.



L'extrémité de 2,0 mm du manchon de foret est placée dans un trou préalablement percé de 2,7 mm utilisé comme une vis de compression de 2,7 mm.

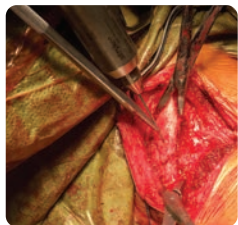

Outil de tassements des petits os avec trou de fil de Kirschner oblique de Resnick

Conçus par Charles Resnick, Docteur en médecine

Conçu pour réaliser une réduction concurrente d'une fracture et insérer un fil dans le site de la fracture. Particulièrement utile si l'exposition chirurgicale est très limitée, les fragments de la fracture sont petits et si la réduction est complexe

- ▶ L'extrémité distale striée réduit le risque de glissement au niveau de la surface corticale, ne gêne pas la mise en place du fil-guide et permet au chirurgien d'effectuer une angulation per-opératoire ultérieure du fil après la perforation du premier cortex
- ▶ Particulièrement utile pour les fractures impliquant une surface articulaire, notamment pour les fractures de type doigt maillet de la phalange distale les fractures articulaires impliquant les insertions ligamentaires ou du tendon des phalanges, les petits fragments des fractures du pôle du scaphoïde ou toutes les autres petites fractures carpiennes ainsi que les fractures styloïdes radiales

DEUX TAILLES SONT DISPONIBLES :
Trous de fil pour fil de Kirschner mesurant jusqu'à 1,1 mm ou 1,6 mm



RÉF. DU PRODUIT :

5294 [1,1 mm]

Diamètre du trou du fil :
Fil de Kirschner de 1,1 mm
Longueur totale : 19,1 cm
Diamètre de la tige : 6,3 mm
Diamètre de l'embout : 2,5 mm

5294-01 [1,6 mm]

Diamètre du trou du fil :
Fil de Kirschner de 1,6 mm
Longueur totale : 19,1 cm
Diamètre de la tige : 6,3 mm
Diamètre de l'embout : 2,5 mm

Nouveau!

Jeu de pointeaux et de trocars canulés d'Izuka

Conçu par Byron Izuka, Docteur en médecine

Pointeaux canulés (embout émoussé et embout pointu) avec un trocart désignés pour faciliter la mise en place sûre et précise des fils de Kirschner standard mesurant jusqu'à 2,1 mm lors de techniques en ouvert ou percutanées afin d'éviter d'endommager les tissus mous

Pointeau émoussé
Réf. 8093-01

Pointeau à pic
Réf. 8093-02

Tige de trocart
Réf. 8093-03

- L'embout pointu minimise le risque de migration du pointeau lors de l'insertion du fil de Kirschner en formant un angle oblique par rapport à la surface de l'os.
- Cet instrument peut également être utilisé pour mettre en place des fils de Kirschner afin de les utiliser avec des kits spéciaux (incluant des fils-guides plus courts que les fils de Kirschner standard) avec des modifications mineures de la technique.
- Le trocart facilite le retrait des tissus qui peuvent être présents au niveau du pointeau

RÉF. DU PRODUIT :	
8093-00	[Kit]
Composants inclus dans le kit/disponibles à l'unité :	
8093-01	[Pointeau émoussé] Longueur totale : 12,6 cm Largeur de la tige : 9 mm Canulé pour être utilisé avec des fils de Kirschner mesurant jusqu'à : 2,1 mm
8093-02	[Pointeau à pic] Longueur totale : 12,6 cm Largeur de la tige : 9 mm Canulé pour être utilisé avec des fils de Kirschner mesurant jusqu'à : 2,1 mm
8093-03	[Tige de trocart] Longueur totale : 7,4 cm Largeur de la tige : 2 mm Diamètre de l'extrémité arrondie : 2 cm



Guide conçu pour insérer des broches guides ou des fils de Kirschner dans deux os métatarsiens adjacents



Guide d'insertion d'un fil de Kirschner/broche de Mogul

Conçu par Stuart J. Mogul, Docteur en médecine podiatrique, FACFA

RÉF. DU PRODUIT :	
3017	
Dimensions: 6 cm de haut x 9,5 cm de large Diamètre maximum de la broche : 2,4 mm Ouverture maximum en position serrée : 5,1 cm Ouverture minimum en position serrée : 1 cm Longueur de la broche/du fil de Kirschner : 23,5 mm	

Instrument d'aide à la réduction des fractures malléolaires médiales

Conçu par Christopher Blair, Docteur en ostéopathie


Conçu pour se fixer sous la malléole médiale afin de réduire le fragment malléolaire médial avec deux guide-fils de Kirschner pour guider les fils

Compatible avec des fils de Kirschner mesurant jusqu'à 1,6 mm.

RÉF. DU PRODUIT :

3664

Longueur totale : 7,8 cm
Longueur de la poignée : 10,2 cm
Largeur de la plaque : 2 cm
Longueur de la plaque : 7,6 cm
Longueur du tube de guidage : 6 mm

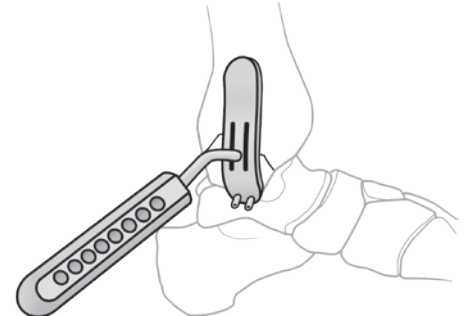

Guide-fil à angle fixe de Zell


Conçu par Richard Zell, Docteur en médecine


Conçu pour faciliter la mise en place des guide-fils et des fils de Kirschner dans les interventions chirurgicales du pied et de la cheville (bursite des orteils, fusion du centre du pied et réduction ouverte avec fixation interne du centre du pied)

RÉF. DU PRODUIT :

3021

Longueur totale : 7 cm
Plateau de la poignée : 25 x 22 mm
Angle du tube de guidage : 35°
Tube de guidage compatible avec des fils mesurant jusqu'à : 1,3 mm

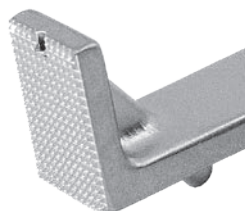


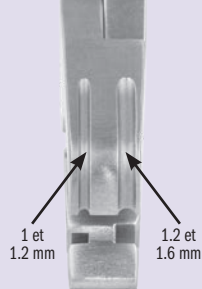

Cintreuse/Découpeur de fil de Kirschner

Conçu pour plier un fil de Kirschner étiré à partir de l'os sans appliquer de tension mécanique

L'aiguille doit simplement dépasser de 20 mm à partir de la surface cutanée à plier.

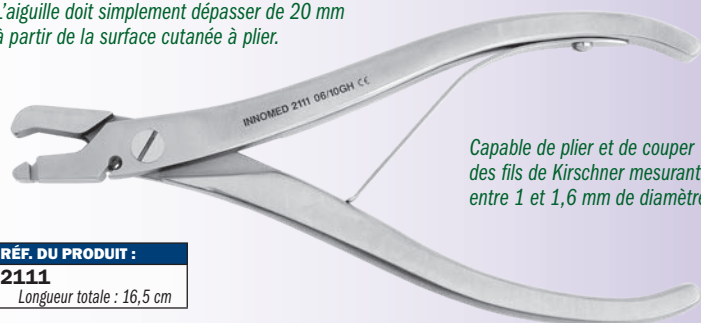

Capable de plier et de couper des fils de Kirschner mesurant entre 1 et 1,6 mm de diamètre

RÉF. DU PRODUIT :

2111

Longueur totale : 16,5 cm

Courbure douce


Découpe nette

Pilage

Avec le mors de l'instrument ouvert, le fil de Kirschner est inséré par le côté dans l'un des trous du mors inférieur. Pendant l'opération de pliage, l'aiguille est enfoncée vers l'arrière par le bec du mors supérieur et guidée par une petite rainure.

Découpe

L'aiguille est introduite dans la rainure de coupe et la cintreuse/le découpeur réalise une coupe par cisaillement (comme un coupe-cigare) sans écrasement. Cette technique permet d'obtenir une surface de coupe propre et nette.

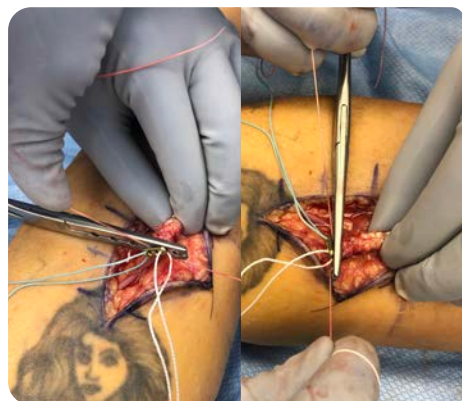

Pince à fente pour la réparation par bouton cortical du biceps distal

Conçue par Corey Trease, Docteur en médecine

RÉF. DU PRODUIT :

5262

Longueur totale : 20,4 cm

Largeur du mors effilé de : 6 à 2,5



Destinée à faciliter la détermination de l'espace du cortex du radius entre le moignon du biceps distal et le bouton cortical

Extracteur de broches - Petit format

Grâce à son petit format, il peut être utilisé dans les petites incisions pour faciliter le retrait d'une broche de Kirschner de 2 mm ou moins

RÉF. DU PRODUIT :

3033

Longueur totale : 16,5 cm

Largeur du mors : 6,2 mm effilée à 3 mm à l'extrémité

Hauteur du mors : 11,7 mm



Pince de retrait d'aiguilles droites de Stanton

Conçu par John Stanton, Docteur en médecine

RÉF. DU PRODUIT :

1893

Longueur totale : 16,2 cm

Longueur du mors : 4,1 cm

Largeur de l'instrument : 1 cm



Ciseaux/Porte-aiguilles de verrouillage de Rogozinski

Conçus avec une poignée de verrouillage/libération rapide, ils permettent de guider une aiguille et de couper un fil de suture sans changer d'instrument

RÉF. DU PRODUIT :

3083 [Standard]
Longueur totale : 16,5 cm

3084 [Large]
Longueur totale : 19,7 cm

Conçus par Chaim Rogozinski, Docteur en médecine

Standard Réf. 3083

Large Réf. 3084



Porte-aiguille/Ciseaux orthopédiques

Permet de guider une aiguille et de couper un fil de suture sans changer d'instrument

RÉF. DU PRODUIT :

Extrémités standard

3070 17,8 cm

Extrémités en carbure de tungstène

3055 14 cm

3065 16,5 cm



3075 17,8 cm

14 cm Extrémités en carbure de tungstène
Réf. 3055

16,5 cm Extrémités en carbure de tungstène
Réf. 3065

17,8 cm Extrémités en carbure de tungstène
Réf. 3075

17,8 cm Standard
Réf. 3070

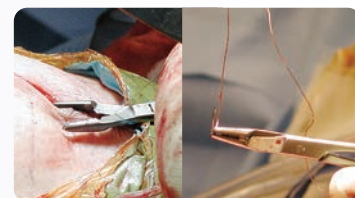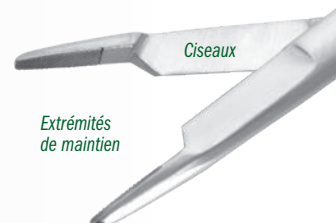

Ciseaux de dissection de Sweed

Conçus par Tamer Sweed, FRCS (Orth)

Dotés d'un embout plat arrondi au niveau de la branche inférieure, ces ciseaux peuvent également être faire office de dissector pour protéger les structures vitales sous-jacentes



RÉF. DU PRODUIT :

3081

Longueur totale : 16,8 cm
Patin inférieur : 16 mm x 6 mm
Longueur du bourrelet du patin : 6 mm


Pinces de retrait d'aiguilles coudées de Stanton


Conçu par John Stanton, Docteur en médecine

RÉF. DU PRODUIT :

1894

Longueur totale : 16,5 cm
Longueur du mors : 4,2 cm
Largeur de l'instrument : 1 cm

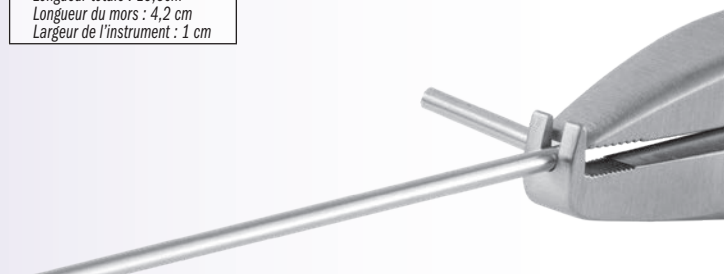


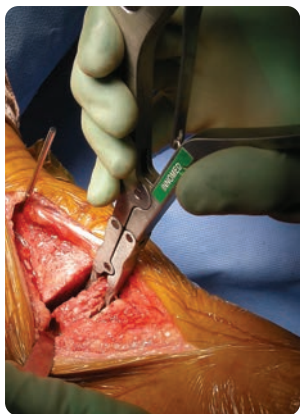

Rongeur à embout carré de Macko

Conçu par Victor W. Macko, Docteur en médecine

Le mors agressif et surbaissé facilite le retrait de l'os tibial malgré les contraintes en termes d'espace. L'extrémité à embout carré permet d'obtenir une surface plane et finie après l'alésage de la facette du talus antérieur. Grâce à son manche ergonomique, son mécanisme à double action, sa portée étendue et son profil surbaissé, ce rongeur s'avère utile lors des opérations du rachis, de la hanche et du genou. Lorsqu'il est utilisé pour morceler le greffon osseux, le mors court et large contribue à éviter l'impaction.

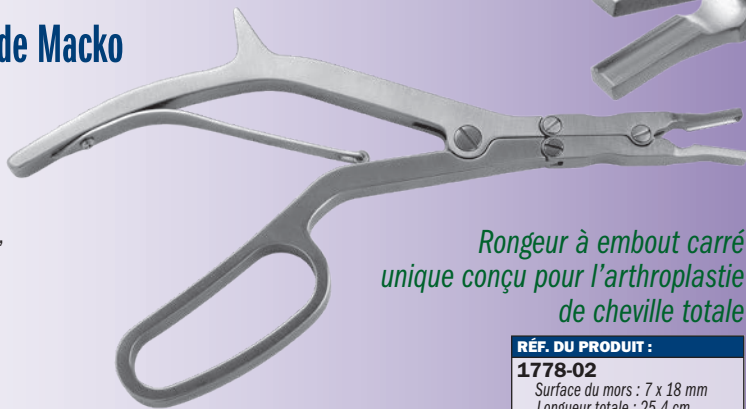

Rongeur à embout carré unique conçu pour l'arthroplastie de cheville totale

RÉF. DU PRODUIT :

1778-02

Surface du mors : 7 x 18 mm
Longueur totale : 25,4 cm


Rongeur de Mazzara avec petite poignée pistolet

Conçu par James T. Mazzara, Docteur en médecine


Conçu pour le retrait des os et des tissus mous lors des interventions chirurgicales pratiquées sur les petites articulations, la petite poignée pistolet réduit la fatigue de la main et le risque de glissement tout en améliorant la visualisation



2 x 10 mm
Réf. 1765-04

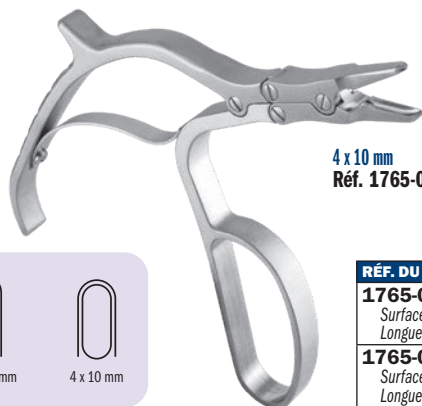

4 x 10 mm
Réf. 1765-05

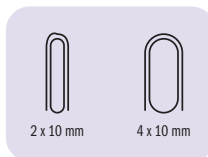

RÉF. DU PRODUIT :

1765-04

Surface du mors : 2 x 10 mm
Longueur totale : 22,9 cm

1765-05

Surface du mors : 4 x 10 mm
Longueur totale : 22,9 cm



Petit format
Réf. 1789

Extra petit
Réf. 1789-04

Rongeurs pour petits os de Yezerski

Conçus par John Yezerski, Docteur en médecine


RÉF. DU PRODUIT :

1789 [Petit format]

Longueur totale : 18,1 cm
Largeur du mors : 4 mm
Largeur de la surface du mors : 3 mm
Longueur de la surface du mors : 20 mm

1789-01 [Extra petit]

Longueur totale : 11,4 cm
Largeur du mors : Effilée de 4,7 mm à 3 mm
Longueur de la surface du mors : 15 mm

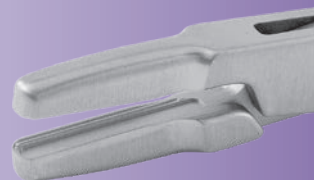

Conçus pour les applications réalisées sur les petits os de la main et du pied

RÉF. DU PRODUIT :

1775-01 [Mors court]


Largeur du mors : 8 mm
Longueur totale : 23,5 cm

1775-02 [Mors moyen]

Largeur du mors : 5 mm
Longueur totale : 23,5 cm

1775-03 [Mors long]

Largeur du mors : 3 mm
Longueur totale : 23,5 cm

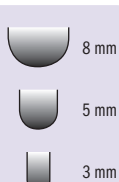

Pince de préhension de Hannum

Conçu par Scott Hannum, Docteur en médecine

Les dents du mors maintiennent solidement l'os et les tissus

La conception sans verrouillage facilite la préhension sans exercer de pression supplémentaire. Trois tailles de mors sont disponibles : mors court pour maintenir l'os, mors moyen pour les os plus petits et mors long pour les tissus.





Instrument utile pour retirer une broche qui a été coupée au ras de l'os et qui peut être difficile à capturer avec des outils standard.

RÉF. DU PRODUIT :

2113-00 [Jeu de 3 tailles]

Composants inclus dans le jeu/ disponibles à l'unité :

2113-01 [2 mm]

Pour les clous flexibles de 1,5 à 2,0 mm
Longueur totale : 14 cm

2113-02 [3 mm]

Pour les clous flexibles de 2,5 à 3,0 mm
Longueur totale : 14 cm

2113-03 [4 mm]

Pour les clous flexibles de 3,5 à 4,0 mm
Longueur totale : 14 cm

Jeu de canules de pliage de broches de Roberts

Conçu par David Roberts, Docteur en médecine

Conçu pour faciliter le fléchissement de l'extrémité d'une broche intramédullaire flexible qui a été coupé au ras de l'os afin d'améliorer la préhension lors du retrait de la broche

Après l'exposition de l'extrémité de la broche, la canule permet de fléchir la broche afin qu'elle soit plus accessible lors de son retrait tout en conservant une petite incision.

4 mm Réf. 2113-03

3 mm Réf. 2113-02

2 mm Réf. 2113-01



Caractéristiques

- ▶ Extrémité biseautée pour capturer facilement l'extrémité de la broche
- ▶ La canule peut être utilisée comme un trépan pour les broches présentant une surcroissance osseuse
- ▶ Dispositif réutilisable grâce à ses parois épaisses qui peuvent supporter plusieurs utilisations

Ostéotomes pour le col du talus de Anderson

Conçu par John Anderson, Docteur en médecine

Conçu pour améliorer l'amplitude de mouvement et soulager la douleur provoquée par le conflit osseux antérieur de la cheville en retirant l'ostéophyte depuis le col du talus antérieur et le tibia distal antérieur

RÉF. DU PRODUIT :

5075

Gouge : 17 mm de large
Longueur totale : 25,1 cm
Longueur de la poignée : 11,4 cm

5075-50

Gouge : 12,7 mm de large
Longueur totale : 25,1 cm
Longueur de la poignée : 11,4 cm


5075-75

Gouge : 9,5 mm de large
Longueur totale : 25,1 cm
Longueur de la poignée : 11,4 cm

9.5 mm
Réf. 5075-75

12.7 mm
Réf. 5075-50

17 mm
Réf. 5075

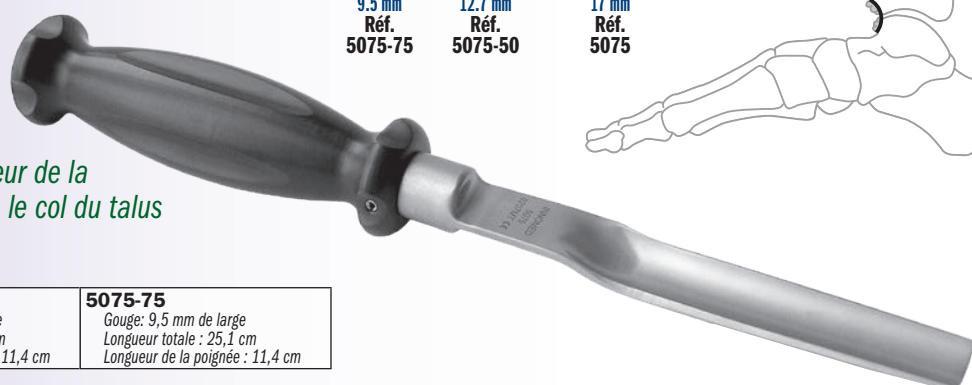


Kit de guides d'ostéotomie de Scarf-Chevron et de fils à olive d'O'Brien

Conçu par Todd O'Brien, Docteur en médecine podiatrique

Guide d'ostéotomie pour les ostéotomies de Chevron et de Scarf du premier métatarsien et des bursectomies gauche et droite en utilisant des fils à olive pour la fixation

Le kit inclut un guide d'ostéotomie de chaque taille et trois fils à olive.

Nouveau!

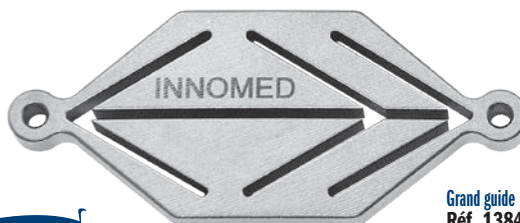


Grand guide
Réf. 1384-01



Petit guide
Réf. 1384-02



Fil à olive
Réf. 1384-W [Lot de 3]

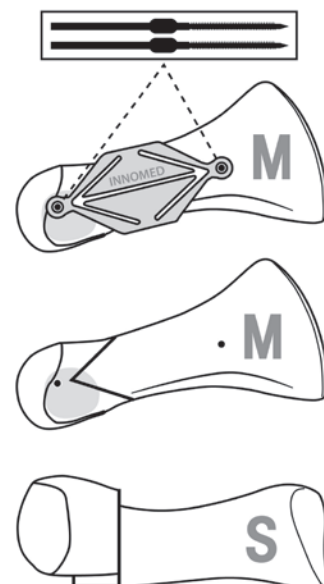

RÉF. DU PRODUIT :

1384-00 [Jeu de deux tailles de guides et de trois fils à olive]

Composants vendus à l'unité :

1384-01 [Grand guide]

Dimensions : 44 x 20 x 4 mm

1384-02 [Petit guide]

Dimensions : 40 x 18 x 4 mm

1384-W [Fil à olive] Lot de 3

Longueur totale : 55 mm

Longueur de la section filetée : 25 mm

Main avec bagues de positionnement en silicone



Conçue pour faciliter le positionnement de la main et des doigts en vue de l'intervention chirurgicale. Les bagues en silicone permettent de stabiliser les doigts.

La souplesse du silicone permet de le plier facilement tout en permettant de conserver la position définie. La main et les bagues en silicone peuvent être stérilisées à la vapeur.

Le kit inclut une main en silicone et six (6) bagues de positionnement en silicone.

RÉF. DU PRODUIT :	
1746-00	[Main en silicone avec 6 bagues]
Disponibles à l'unité :	
1746-02	[Bagues de positionnement] Lot de 12
Dimensions : 28 mm (diamètre externe), Épaisseur : 3 mm	

Nouveau!

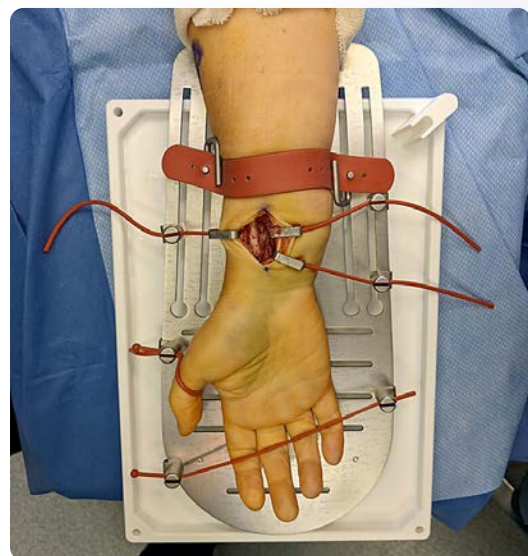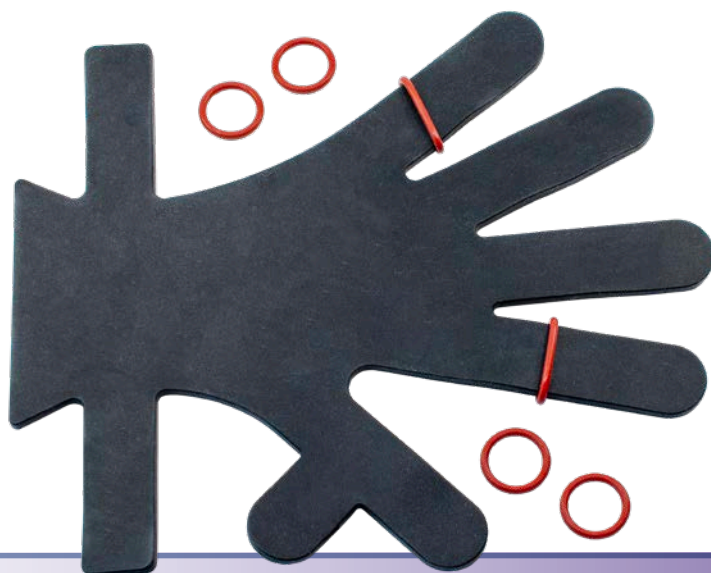


RÉF. DU PRODUIT :	
1747-00	[Système de positionnement de la main d'Auerbach]
Composants également disponibles à l'unité :	
1747-01	[Plaque pour la main] Dimensions : 38,1 cm x 17,8 cm
1747-02	[Plateau pour la main] Dimensions : 34,9 cm x 24,8 cm
1747-03	[Support pour le pouce]
1747-03-C	[Système d'attache du support pour le pouce]
1747-04	[Dispositif de fixation des sangles] Sept (7) dispositifs de fixation sont fournis dans le kit, un (1) dispositif de fixation est fourni avec cette référence.
1747-05	[Écarteur] Quatre (4) écarteurs sont fournis dans le kit, un (1) écarteur est fourni avec cette référence
1747-06	[Crochet des bandes de fixation du poignet] Deux (2) crochets sont fournis dans le kit, un (1) crochet est fourni avec cette référence
1747-07	[Bande de fixation du poignet] Deux (2) bandes de fixation sont fournies dans le kit, une (1) bande de fixation est fournie avec cette référence
1747-08-6	[Jeu de 6 sangles]
1747-09	[Support du tube d'aspiration]

Système de positionnement de la main d'Auerbach

Conçus par David Auerbach, Docteur en médecine

Conçu pour positionner et rétracter la peau lors des expositions chirurgicales de la main, du poignet et de l'avant-bras

Plaque pour la main
Réf. 1747-01

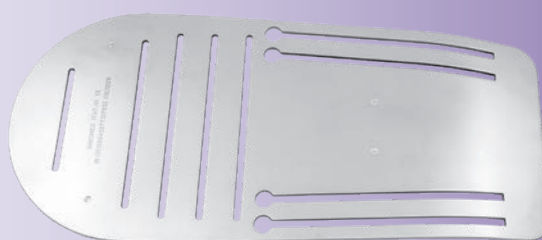

Plateau pour la main
Réf. 1747-02



Support pour le pouce
Réf. 1747-03



Système d'attache du support
Réf. 1747-03-C



Dispositifs de fixation des sangles
Réf. 1747-04



Écarteurs
Réf. 1747-05



Crochets des bandes de fixation du poignet
Réf. 1747-06




Support du tube d'aspiration
Réf. 1747-09




Bandes de fixation du poignets
Réf. 1747-07



Sangles
Réf. 1747-08-6

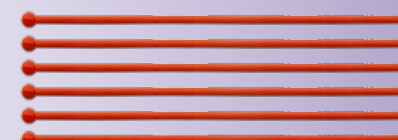

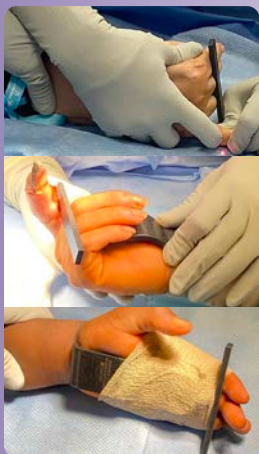

Positionneur pour la main/les doigts

Conçu par Emad Aboujaoude, MS, MPAS, PA-C

Conçu pour faciliter le positionnement chirurgical lors d'une fluoroscopie et de la fixation en isolant les doigts traumatisés et en rétractant les doigts sains

Le positionneur radio-transparent peut être stérilisé à la vapeur ou au gaz.


RÉF. DU PRODUIT :

1134

Longueur totale : 14,6 cm

Largeur de la poignée : 10,8 cm

Largeur de la lame : 4 cm

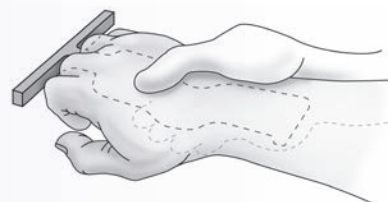

Les indications d'utilisation sont les suivantes (liste non exhaustive) :

- ▶ Vis métacarpiennes intramédullaires
- ▶ Réduction fermée avec embrochage percutané des phalanges
- ▶ Amputation des doigts
- ▶ Excision de la masse du doigt
- ▶ Fusion de l'articulation du doigt



11 mm Réf. 1643-11

13 mm Réf. 1643-13

15 mm Réf. 1643-15

17 mm Réf. 1643-17

Élévateurs de type McGlamry

Conçus pour faciliter le dégantage de la tête métatarsienne et utiles dans de nombreuses autres interventions

RÉF. DU PRODUIT :

1643-11 [11 mm]

Longueur totale : 16,5 cm

1643-13 [13 mm]

Longueur totale : 16,5 cm

1643-15 [15 mm]

Longueur totale : 16,5 cm

1643-17 [17 mm]

Longueur totale : 16,5 cm



10,2 cm Réf. 2740-01

15,2 cm Réf. 2740-02

Tube de positionnement de jambe de Sanders

Conçu par Richard A. Sanders, Docteur en médecine

Conçus pour soutenir le genou et la cheville lors d'une intervention effectuée sur les membres inférieurs

Le tube de 15,2 cm surélève le genou au-dessus de la table d'opération et permet de le fléchir à 30° environ. Ce dispositif est particulièrement utile pour suturer les incisions pratiquées suite à la mise en place d'une prothèse totale de genou, soutenir les fractures du fémur distal et les fractures du plateau tibial. Le tube de 10,2 cm surélève le pied et la cheville dans le cadre d'une intervention à la suite d'une fracture de la cheville. Les tubes sont en aluminium et peuvent être autoclavés. Ils évitent d'avoir à utiliser des supports en tôles laminées.

RÉF. DU PRODUIT :

2740-01 [Petit format]

Diamètre : 10,2 cm

Largeur : 20,3 cm

2740-02 [Grand format]

Diamètre : 15,2 cm


Largeur : 20,3 cm

Positionneur des membres inférieurs

Conçu par Ronald Romanelli, Docteur en médecine

Conçu pour surélever le genou pendant les applications de plâtrage des membres inférieurs

Il est également parfaitement adapté aux fractures de la cheville. Il est fourni avec un coussin en silicone autoclavable. Le positionneur est radio-transparent et il peut être stérilisé au gaz ou à la vapeur.

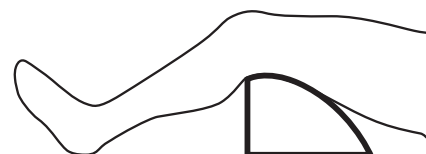

RÉF. DU PRODUIT :

2745

Dimensions : 14 cm de haut x 24,1 cm de long x 23,5 cm de large

Pièces de rechange :

2760-P [Tapis en silicone]

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

#1 Offres

Sauf accord contraire, nos offres sont valables pendant un mois à compter de la date d'émission. Les informations contenues dans les devis, brochures, catalogues, dessins, photos, etc. sont basées sur les spécifications en vigueur au moment de l'offre. Les modifications techniques entre le moment de l'offre et celui de la livraison sont réservées, à condition qu'elles n'altèrent pas, ne compliquent pas ou n'augmentent pas le coût de l'utilisation prévue telle que spécifiée par l'acheteur lors de la conclusion du contrat.

§ 2 Prix

Sauf accord écrit contraire, les prix s'entendent nets hors TVA, départ entrepôt Schwenningen/Allemagne ou CHAM/Suisse, sans aucune déduction. Tous les frais supplémentaires tels que l'emballage de transport, le fret, l'assurance, les documents, les permis et/ou certifications d'exportation, de transit, d'importation et autres sont à la charge de l'acheteur.

§ 3 Délai de livraison

Les dates de livraison convenues lors de la conclusion du contrat seront respectées au mieux de nos capacités. Si la livraison est retardée pour des raisons non imputables à **INNOMED-Europe LLC ou INNOMED Europe GmbH** (force majeure, difficultés d'importation ou de transport, événements politiques, retards des sous-traitants, modifications demandées par l'acheteur, etc.), la date de livraison sera reportée en conséquence. Le dépassement du délai de livraison ne donne pas droit à l'acheteur de se retirer du contrat, de refuser la réception ou de réclamer des dommages-intérêts ou des réductions de prix.

§ 4 Transport

La livraison est toujours aux frais et risques de l'acheteur. Les réclamations liées au transport doivent être adressées au transporteur immédiatement après réception de la livraison et/ou des documents de fret.

§ 5 Réclamations

L'acheteur ou le destinataire doit inspecter la livraison immédiatement après réception et signaler tout défaut par écrit sans délai.

§ 6 Conditions de paiement

Les paiements doivent être effectués comme indiqué sur la facture, nets sans aucune déduction, à compter de la date de la facture. Le paiement doit être effectué en EUR, USD ou Francs suisses. En cas de non-respect des délais de paiement, l'acheteur doit des intérêts de retard de

5 % à partir de la date d'échéance sans rappel particulier. Les pièces manquantes mineures ou les réclamations de garantie ne justifient pas la retenue des paiements. En cas de retard d'acceptation, le prix d'achat total ou restant devient immédiatement exigible. En cas de défaut, y compris de retard de paiement, nous nous réservons le droit de renoncer à l'exécution ultérieure et de réclamer des dommages-intérêts ou de nous retirer du contrat. Tous les autres dommages restent réservés. Les frais bancaires sont à la charge du client.

§ 7 Échantillons d'instruments

Des instruments peuvent être demandés pour sélection lors d'une opération. Ils doivent être retournés dans les 4 jours suivant l'opération, sinon le prix de vente sera facturé.

§ 8 Retour de marchandises

Les articles standards de la liste de prix actuelle qui ne conviennent pas ou ont été commandés par erreur peuvent être retournés dans les 10 jours suivant la livraison sous les conditions suivantes :

- Articles avec emballage et étiquettes intacts, et formulaire de retour entièrement rempli : crédit intégral.
- Instruments utilisés ou endommagés (voir § 9 pour les instruments prêtés) seront retournés au client sans crédit.
- Pour les articles utilisés ou endommagés, un formulaire de "Réclamation" doit être rempli et retourné à **INNOMED-Europe** au préalable.
- Une autorisation de retour (RMA) doit être obtenue auprès du service client d'**INNOMED-Europe** avant tout retour de produit. Les produits reçus sans numéro RMA ne seront pas traités.
- Les produits fabriqués sur mesure ne sont en aucun cas acceptés en retour.

§ 9 Instruments prêtés

Les instruments standards peuvent être commandés en prêt. Après l'opération, ils doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés en interne à la clinique et retournés dans les 4 jours. Les frais de réparation des instruments endommagés seront facturés, avec un minimum de CHF 150. Les instruments doivent être retournés avec des informations détaillées sur le défaut ou la réclamation.

!! L'acceptation des marchandises pour tout retour n'est possible qu'avec un numéro RMA valide, un formulaire de retour entière-

ment rempli et une confirmation de stérilisation attachée à l'extérieur du colis !!

Les documents manquants seront facturés CHF/EUR 80.

§ 10 Approbations, documentation et notices

L'acheteur doit informer **INNOMED-Europe LLC/INNOMED Europe GmbH** des exigences légales et réglementaires pertinentes et est responsable de leur respect. Les licences et permis nécessaires doivent être obtenus par l'acheteur. Les revendeurs doivent transmettre le produit avec toute la documentation et les notices. Ils doivent également maintenir un système de suivi des instruments par numéro d'article et de lot pour permettre la traçabilité sur demande d'**INNOMED-Europe**.

§ 11 Garantie

L'acheteur doit inspecter immédiatement la livraison pour détecter les défauts visibles. La période de garantie pour les défauts cachés est de 12 mois à compter de la livraison. Les réclamations doivent être signalées par écrit immédiatement après leur découverte. Les réclamations ne donnent pas droit à l'acheteur de retenir les paiements. La garantie exclut les dommages dus à une utilisation incorrecte, une manipulation négligente, le non-respect des instructions, l'usure et le vieillissement naturels, une sollicitation excessive, une utilisation incorrecte d'outils ou d'autres raisons non imputables à **INNOMED-Europe**. Les produits sont fabriqués selon l'état de la science et de la technologie au moment de la production. La responsabilité pour les dommages consécutifs (par exemple, frais médicaux supplémentaires, opérations supplémentaires, perte de revenus, demandes d'indemnisation) est expressément exclue.

§ 12 Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution pour toutes les livraisons et paiements est Cham (Canton de Zoug, Suisse).

§ 13 Droit applicable et juridiction


Toutes les relations juridiques avec **INNOMED-Europe LLC** et **INNOMED Europe GmbH** sont régies par le droit suisse (à l'exclusion de la Convention de Vienne sur la vente). Le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges est Zoug, Suisse.

Valable à partir du 1er août 2025

Mesures dans ce catalogue

Nous nous sommes efforcés d'indiquer des mesures précises dans ce catalogue. Toutefois, de légères différences peuvent exister entre les mesures réelles et les mesures spécifiées.

Les mesures de la **longueur totale** correspondent à la distance linéaire entre une extrémité de l'instrument et son extrémité opposée, comme illustré ci-dessous :

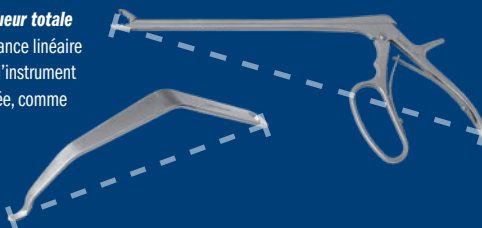

Les mesures de la **longueur de la lame** correspondent à la distance linéaire entre une extrémité de l'instrument et son extrémité opposée, généralement située au niveau du point le plus large (sauf indication contraire), comme illustré ci-contre :



À PROPOS D'INNOMED



orders.innomed-europe.com

La société Innomed, Inc. fabrique des instruments chirurgicaux orthopédiques. Son siège social est situé à Savannah, en Géorgie (US).

Elle a progressivement étoffé sa gamme qui se composait d'un seul instrument à sa date de création en 1987 afin de proposer actuellement des instruments uniques, pour la plupart conçus pour les chirurgiens orthopédistes à la recherche d'un outil unique pour réaliser une opération spécifique. La majorité de nos produits ont été développés par des chirurgiens orthopédistes pour effectuer des opérations spécifiques plus facilement et plus rapidement.

Innomed est spécialisée dans le développement d'instruments qui accroissent l'efficacité dans le bloc opératoire. Nous poursuivons nos efforts afin de développer et de commercialiser de nouvelles solutions innovantes pour faciliter les interventions réalisées au niveau de la hanche, du genou de l'épaule, du rachis, des petits os ou traumatologiques. Nous nous engageons à fournir des produits de qualité et des prestations haut de gamme pour satisfaire pleinement nos clients.

La plupart de nos instruments sont fabriqués aux États-Unis, en Allemagne et en Suisse. Nous utilisons exclusivement des alliages et des matériaux de qualité destinés à un usage médical.



Siège social d'Innomed-Europe LLC

Alte Steinhäuserstrasse 19
CH-6330 Cham
Suisse

Tél: 0041 (0) 41 740 67 74
info@innomed-europe.com

Innomed-Europe GmbH Agence commerciale en Allemagne

c/o Emons Logistik GmbH
In Rammelswiesen 9
D-78056 Villingen-Schwenningen
Allemagne

Tél: 0049 (0) 7720 46110 60

CE ISO 13485:2016

La relâchement de prothèse est un sujet qui vous préoccupe?

Un relâchement aseptique est un mode de défaillance prédominant dans l'arthroplastie primaire du genou avec implant cimenté.^{1,2}



CarboJet®

Système de préparation osseuse au CO₂

1. Schurr, K.R., Berend, L., Berend, M.E., Berend, R., Harty, M. (2013) Why Are Total Knee Replacements Failing? History of Total Knee Revisions in 2011 and 2012. J. Arthroplasty 28: 1774-8.
2. Sharkey, P. et al. (2014) Why Are Total Knee Replacements Failing Today?—Has Anything Changed After 10 Years? J. Arthroplasty 29: 1774-8.

Êtes-vous à la recherche d'une solution qui vous permettrait d'éliminer de façon plus efficace les lipides, les éléments médullaires, le sang et la solution saline de l'interface en ciment? Le jet de gaz au dioxyde de carbone (CO₂) de CarboJet assure une élimination rapide et en profondeur des débris du lit osseux, améliore la pénétration de ciment^{3,4} et renforce l'adhésivité du ciment⁵. De nombreuses études cliniques et des dizaines de milliers de procédures de reconstruction articulaire ont montré l'innocuité et l'efficacité de la solution CarboJet. Des embouts sont disponibles pour les arthroplasties totales du genou, les arthroplasties du genou compartimentales, les arthroplasties totales de la hanche et les arthroplasties totales de l'épaule et d'autres applications cimentées. Essayez et voyez par vous-même ce que nous entendons par un lit osseux vraiment propre!

Un outil essentiel pour les arthroplasties totales du genou sans garrot

Meneghini (2018) Tourmiquetless TKA... Decreases Pain & Opioid Consumption in Women. J. Arthroplasty.
Jones (2011) Total knee arthroplasty without the use of a tourniquet. Seminars in Arthroplasty.

Amélioration de la pénétration du ciment

3. Meneghini (2019) The Effect of Tourniquet Use and Sterile CO₂ Bone Preparation on Cement Penetration in Primary TKA. J. Arthroplasty.
4. Goldstein (2007) Improvement of cement mantle thickness with pressurized CO₂. JSTA.

Consolidation de l'interface ciment-os

5. Stanley (2010) Bone-cement interface strength using two preparation techniques. Hand Surg.

Réduction des possibilités de micro-embolies

6. Lassiter (2010) Intraoperative embolic events with use of pulsatile saline versus CO₂ lavage. ORS.



Préparation du lit osseux avec lavage pulsatile à la solution saline. Lignes radiotransparentes indiquées par des flèches.



Lit osseux préparé avec CarboJet. Aucune ligne radiotransparente visible.

Réf. du produit:

25-100-2001

CarboJet CO₂ Kit de tubes en emballage stérile

La question des débris métalliques vous préoccupe?

Des câbles de cerclage en métal accélèrent l'usure du matériau poly et contribuent au relâchement local et systémique du métal.^{1,2}

SuperCable®

Cerclage polymère Iso-Elastic™

1. Callaghan (1987) Contribution of cable debris to accelerated poly wear. Clin Orthop.
2. Urban (2004) Accumulation in the hip and spine of metal particles generated at nonbearing surfaces in hip arthroplasty. J. Arthroplasty.

Ce câble élastique en polymère extrêmement robuste permet d'éviter tout risque de diffusion de débris métalliques et de diffusion d'ions dans le corps de vos patients qui doivent faire l'objet d'un cerclage. Les faisceaux de câbles à filaments métalliques peuvent être soumis à différentes contraintes susceptibles d'entraîner la corrosion, une usure par frottement et des défaillances dues à l'effort. La construction en polymère du **SuperCable** permet également de réduire les risques de déchirure de gants, ainsi que les blessures causées par des extrémités de câble métallique tranchantes.

Grande résistance à l'effort

Hack (2005) Novel iso-elastic cerclage cable for treatment of fractures. ORS.

Élimination des risques liés aux parties tranchantes


Stoker (2009) Sharps Safety for Orthopedic Surgeons. Managing Infection Control.

Performances prouvées

Della Valle (2010) Early experience with a novel nonmetallic cable... Clin Orthop.

Edwards (2011) Polymer cerclage cables in revision shoulder... Orthopedics.

Berend, Lombardi (2014) Polymer cable/grip-plate for stable fixation... Surg Tech Int.

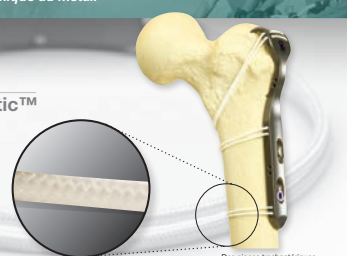

Des pinces isométriques et des plaques de câbles sont disponibles dans le système.



Pourquoi risquer une déchirure de gants et des blessures causées par des parties tranchantes lorsque vous travaillez au niveau de la plaie? Les matériaux polymériques sans risque pour les doigts utilisés dans la conception du SuperCable permettent d'éviter de tels risques.

"I have yet to do a case with metal cables where I did not feel the sharp edges of the cable through my glove. I have been using the Kinamed SuperCables for many years and I have found them to be easy to use, very strong and they don't cut me or my gloves! As far as I am concerned, the Kinamed SuperCable is the best cable system available today."

Paul Nourbakhsh, M.D.
Barrington Orthopedic Specialists
Chicago, IL

Réf. du produit:

35-100-1010

Iso-Elastic™ Câble de cerclage

Bandes en polyester

Pour le rapprochement des tissus mous

Indiquées pour le rapprochement des tissus mous et la reconstruction des ligaments et des tendons

Sûres

Résistantes

Simple

Références de commande

Bandes en polyester standard (vendues stériles) :

102-1010 Bande en polyester, 10 mm x 500 mm (tissu aéré)


102-1080 Bande en polyester, 10 mm x 800 mm (tissu aéré)

102-1081 Bande en polyester, 15 mm x 800 mm (tissu aéré)

102-1082 Bande en polyester, 20 mm x 800 mm (tissu aéré)

102-1083 Bande en polyester, 30 mm x 800 mm (tissu aéré)

102-1084 Bande en polyester, 40 mm x 800 mm (tissu aéré)

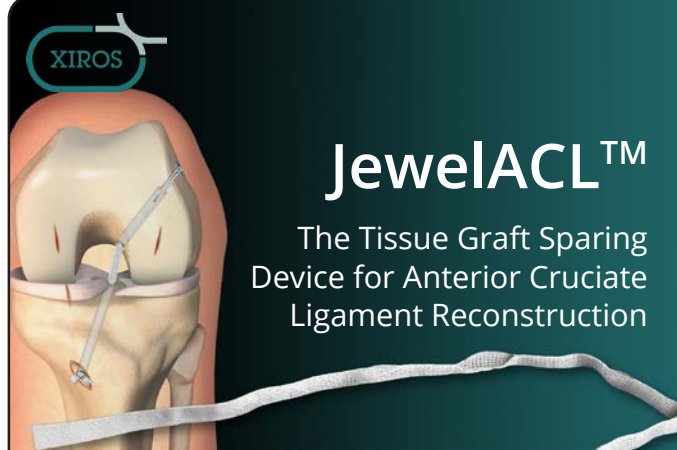

JewelACL™

The Tissue Graft Sparing Device for Anterior Cruciate Ligament Reconstruction

Why JewelACL?

- Can be implanted either as a stand alone device to eliminate graft morbidity (total tissue graft sparing), or with a single hamstring tendon to reduce morbidity (partial tissue graft sparing).
- Secured to the bone with cortical suspensory fixation with loop or soft threaded interference screws. (See LAB 138, JewelACL Surgical Technique Manual, and WP 006, Mechanical Properties and Performance Testing of the JewelACL, for additional information).
- Implanted using standard contemporary cruciate reconstruction drill guide systems.
- Surfaces of the implant are modified with a unique gas plasma treatment process that renders the JewelACL hydrophilic.
- The JewelACL is integrated in natural body tissue that surrounds the device and occupies the spaces within it.

Systeme Gripper™



MOINS DE MAINTIEN, **PLUS** D'OPERATION !

Information de commande

Référence	Description	Packaging
ME-FD 1000	Kit de hanche (table standard)	Lot de 10
ME-FD 3000	Adaptateur de Table	Lot de 1
ME-FD 4000	Kit de genou	Lot de 1
Shoulder Set	Bientôt disponible	Lot de 1

Solutions EzySuit™



MOINS DE DRAPAGE, **PLUS** D'INTERVENTION

Article	Description	Numéro d'article	Unité	Quantité par emballage
EzySuit™ Supine	Kit de drapage pour position dorsale	ME-ED 1000	Pièce	5
EzySuit™ Lateral	Kit de drapage pour position latérale	ME-ED 1100	Pièce	5
EzySuit™ Table	Kit de drapage pour table	ME-ED 1200	Pièce	4
EzySuit™ Knee	Kit de drapage pour genou	ME-ED 2000	Pièce	5
EzySuit™ Shoulder	Kit de drapage pour épaule	ME-ED 3000	Pièce	5



Instrument pour la fixation de la main / des doigts pendant la chirurgie


Brevet n° 1979086.6 - « Intention de délivrance » - Office européen des brevets (OEB).
Marquage CE : Reg. 6.6.1-2019-98304



Kit ManuFix

5 supports pour doigts, 1 plaque de transport
+ 2 rallonges optionnelles.

La plaque de transport maintient les supports pour doigts en place et minimise l'effet de l'aiguille puissante.

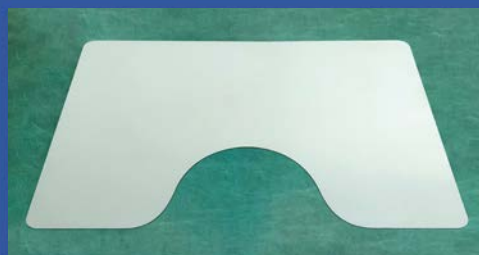

Plaque de base

N'a pas besoin d'être stérile (placée sous le champ opératoire stérile).

Innomed Europe LLC
Alte Steinhäuserstrasse 19
CH-6330 Cham
Tel. 0041 (0) 41 740 67 74
info@innomed-europe.com


Innomed Europe GmbH
c/o Emms Logistik GmbH
IN Rammelwiesen 9C
D-78056 Villingen-Schwenningen
Tel. 0049 (0) 7720 46110 60

INNOMED

Guide de trajectoire parallèle mini invasive de la bursite de Lee

Conçu par Wonyong Lee, Docteur en médecine

Conçu pour faciliter la correction d'une bursite de manière mini invasive en veillant à obtenir une trajectoire parallèle idéale des deux broches guides pour fixer la première vis métatarsienne avec un trou de guide biseauté destiné à éviter tout risque de glissement de la broche de l'os

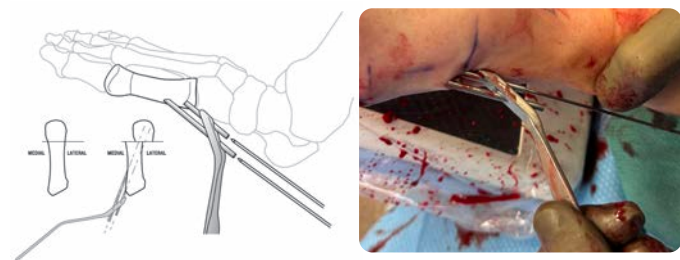

RÉF. DU PRODUIT :

1377


Dimensions :
5,1 x 2,5 x 0,8 cm

Guide d'ostéotomie en Z calcanéenne de DeOrio

Conçu par James K. DeOrio, Docteur en médecine

Conçu pour faciliter la réalisation d'une ostéotomie en Z du calcanéum

Le cadre-guide peut être fixé au calcanéum avec des broches de 1,6 mm. Une première découpe horizontale peut être effectuée à 0° suivie d'une deuxième découpe à 5°, 10° ou 15° à l'aide du guide bloc de coupe afin de se retrouver à 3 cm horizontalement par rapport à la découpe horizontale afin de créer une cale d'ostéotomie destinée à être retirée. Conçu pour être utilisé avec une scie de 50,0 mm x 9,0 mm x 0,61 mm.

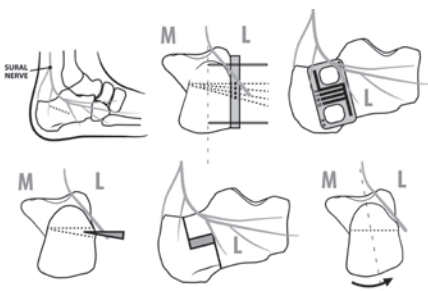

Nouveau!

INNOMED

Commandez maintenant Online & Simple



<https://orders.innomed-europe.com>

Ou par E-Mail
orders@innomed-europe.com

POUR DEVIS OU COMMANDE EN FRANCE :

contact.france@innomed-europe.com

Siège social d'Innomed-Europe LLC

Alte Steinhauserstrasse 19

CH-6330 Cham

Suisse

Tél : 0041 (0) 41 740 67 74

info@innomed-europe.com

Innomed-Europe GmbH

Agence commerciale en Allemagne

c/o Emons Logistik GmbH

In Rammelswiesen 9

D-78056 Villingen-Schwenningen

Allemagne

Tél : 0049 (0) 7720 46110 60

www.innomed-europe.com